



Application Note AN-S-373

Chloride in potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution

Method validation according to the U.S. Pharmacopoeia

Potassium chloride and potassium bicarbonate effervescent tablets are used to prevent low levels of potassium in blood [1]. Using the monographs from the United States Pharmacopeia and National Formulary (USP-NF) allows pharmaceutical manufacturers and labs to fulfill strict quality regulations for drugs and formulations.

The USP has embarked on a global initiative to modernize many existing monographs. The monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution»

comprises different methods to determine potassium, sodium, but also chloride in these tablets [2]. Ion chromatography (IC) with suppressed conductivity detection has been approved by the USP as a validated method to quantify chloride content in potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral suspension [2]. The Metrosep A Supp 16 - 100/4.0 (L91) column provides the required separation of chloride. The method is validated according to USP General Chapter <621> Chromatography, system suitability [3].

SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

Sample analyses are performed with a solution of the respective effervescent tablets. No additional sample

preparation is required.



Figure 1. Instrumental setup including a 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP and an 858 Professional Sample Processor.

EXPERIMENTAL

A sample stock solution (nominally 4434.52 µg/mL chloride) is prepared by adding 50 g (equivalent to 10 tablets weight) of finely powdered potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution to a 2000 mL volumetric flask. The powder is dissolved in 200 mL ultrapure water (UPW). After effervescence ceases, the volumetric flask is filled up to the mark. A small volume (1.692 mL) of this stock solution is transferred to a 500 mL volumetric flask and filled up to the mark with UPW. This final sample solution nominally contains 15.0 µg/mL chloride.

The working standard solution of 15 µg/mL is prepared from a USP Potassium Chloride RS standard. Samples and standard solutions are injected directly into the IC using an 858 Professional Sample Processor (**Figure 1**). Separation of chloride from other anions is performed using a Metrosep A Supp 16 - 100/4.0 column. This anion-exchange column, consisting of a strong ion exchanger made from monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads combined with quaternary amines, qualifies for certain USP methods using the USP chromatographic column packing L91.

The calibration is performed with a 6-point linear calibration curve using a concentration range of

2.25–22.50 µg/mL chloride. The sample is then analyzed in duplicate.

Table 1. Requirements for the IC method for chloride determination as per USP Monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» [2].

Column with L91 packing	Metrosep A Supp 16 - 100/4.0
Eluent	15 mmol/L sodium carbonate, 1.5 mmol/L sodium hydroxide
Flow rate	0.8 mL/min
Temperature	45 °C
Injection volume	20 µL
Detection	Suppressed conductivity

RESULTS

The IC assay for chloride content was validated according to the USP Monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» [2]. The accuracy of the chloride determination in the sample was calculated as 101.2% (Figure 2) and falls into the acceptance

criteria. All analytical quality requirements were fulfilled, e.g., the correlation coefficient for chloride was 0.9998, and the relative standard deviation of repeated standard solutions was 0.05% (n = 6) (Table 2).

Table 2. Analytical quality criteria for method acceptance according to USP Monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» [2].

Parameter	Actual	USP requirement	Status
% RSD	0.05	NMT 0.5	Pass
Tailing factor	1.27	NMT 2.0	Pass
Recovery	101.2%	90–110%	Pass
Resolution	2.48	NLT 1.5	Pass

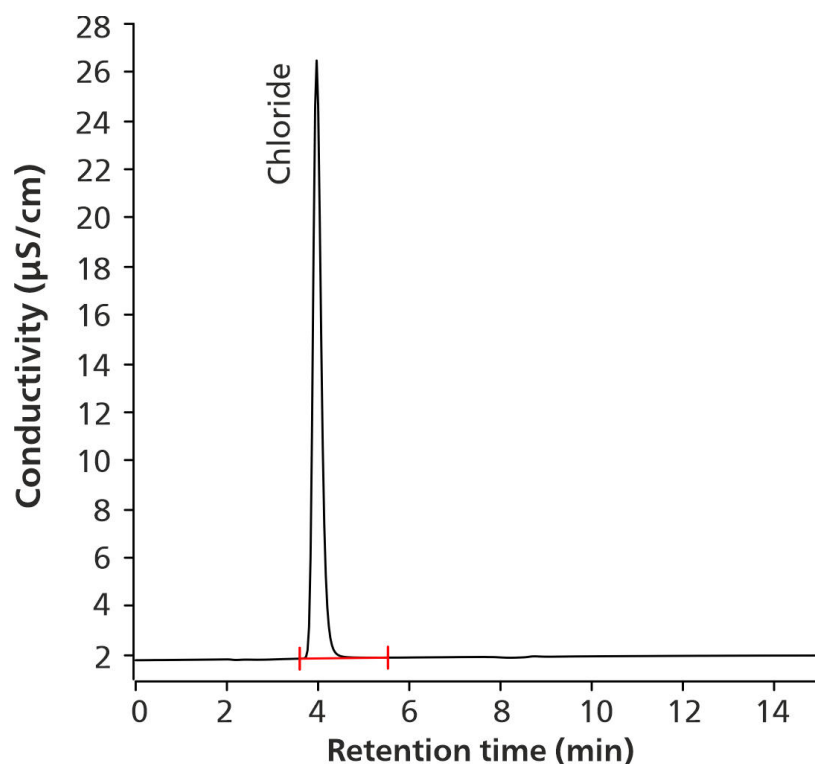


Figure 2. Chromatogram of 15.0 µg/mL chloride in the sample solution (101.1% recovery of the nominal concentration).

The presented IC method for chloride in potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution is officially included into the USP [2]. Chloride separation is performed with a strong anion-exchanger – the Metrosep A Supp 16 - 100/4.0 column, corresponding to packing material

L91. Robustness and reliability of the method was demonstrated following the guidelines of the USP General Chapter <621> [3]. The presented setup is suitable to quantify chloride according to the USP requirements. Further USP methods are summarized in the flyer «Bring your USP methods up to date!» [4].

REFERENCES

1. Kardalas, E.; Paschou, S. A.; Anagnostis, P.; et al. Hypokalemia: A Clinical Update. *Endocr Connect* **2018**, 7 (4), R135–R146. <https://doi.org/10.1530/EC-18-0109>.
2. *Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution*; Monograph; U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. https://doi.org/10.31003/USPNF_M67253_02_01.
3. <621> *Chromatography, General Chapter*; U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. <https://www.uspnf.com/notices-gc-621-nitr-20220826>.
4. Metrohm AG. Bring Your USP Methods up to Date!, 2023. [8.000.5436EN](https://www.metrohm.com/8.000.5436EN)

CONTACT

Metrohm Suisse SA
Industriestrasse 13
4800 Zofingen

info@metrohm.ch

CONFIGURATION



Metrosep A Supp 16 - 100/4,0

La colonne de séparation Metrosep A Supp 16 haute capacité est basée sur un copolymère de polystyrène/divinylbenzène à surface fonctionnalisée. Les groupes fonctionnels sont liés par covalence. Une sélectivité hors pair est obtenue grâce à la morphologie de l'échangeur d'anions. Par ailleurs, ce type de colonne se caractérise par une capacité de charge mécanique et chimique élevée.

La colonne est particulièrement adaptée pour les applications impliquant une forte charge ionique n'exigeant qu'une résolution relativement faible. Son utilisation pour la détermination du bromate dans les eaux par la méthode triiodure (EPA 326, DIN EN ISO 11206) est une autre application parmi les nombreuses qu'offre cette Metrosep A Supp 16 - 100/4,0.



Metrosep A Supp 16 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.



930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg

Le 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg est un appareil CI compact intelligent avec un **four à colonne**, **suppression séquentielle**, une **pompe péristaltique** pour la régénération du suppresseur et un **dégazeur** intégré. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions ou de cations avec suppression séquentielle et détection de conductivité



858 Professional Sample Processor

Le 858 Professional Sample Processor traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique au 850 Professional IC System soit par un 800 Dosino.



Dépliant: Actualisez vos méthodes USP !

Ce dépliant présente une vue d'ensemble des monographies récemment mises à jour par l'USP, et qui mentionnent désormais des méthodes de chromatographie ionique pour de nombreux dosages pharmaceutiques d'API, d'impuretés et d'excipients.