



NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

2.921.1520

Robustes Messsystem für die Reaktionsüberwachung von Flüssigkeiten im Technikum und Pilotanlagen

Der NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer ermöglicht die effiziente Bestimmung der Zusammensetzung von wässrigen Produkten, klaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln sowie viskosen Proben. Das Gerät eignet sich ebenso gut für den Einsatz im Technikum sowie für Atline-Anwendungen im Rahmen des Scale-ups von Produktionsprozessen. Für viskose Proben stehen NIRS Einwegvials aus Glas zur Verfügung, was den Reinigungsaufwand auf ein Minimum beschränkt. Der optional erhältliche NIRS VialHeater ermöglicht Analyse von Proben bis zu einer Temperatur von 200 °C.

Lieferumfang 2.921.1520

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Das Ergebnis von 50 Jahren Erfahrung im Bereich Spektroskopie floss in die Entwicklung dieses NIRSystems Spektrometers. Die einzigartige Technologie verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis bei hoher Auflösung und erhöht Genauigkeit und Präzision. Der patentierte Monochromator und das modular aufgebaute Messmodulsystem machen NIRSystems Geräte unverzichtbar für die spektrale Vermessung aller erdenklichen Probenotypen im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich (400 - 2500 nm). Die Messmodule lassen sich mühelos, auch während des Betriebs, tauschen. So profitiert der Anwender von der hohen Flexibilität in allen Applikationsbereichen.



Robustes Messsystem für die Reaktionsüberwachung von Flüssigkeiten im Technikum und Pilotanlagen


Der NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer ermöglicht die effiziente Bestimmung der Zusammensetzung von wässrigen Produkten, klaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln sowie viskosen Proben. Das Gerät eignet sich ebenso gut für den Einsatz im Technikum sowie für AtlineAnwendungen im Rahmen des Scale-ups von Produktionsprozessen. Für viskose Proben stehen NIRS Einwegvials aus Glas zur Verfügung, was den Reinigungsaufwand auf ein Minimum beschränkt. Der optional erhältliche NIRS VialHeater ermöglicht Analyse von Proben bis zu einer Temperatur von 200 °C.



Zubehör-Kit für NIRS XDS Labormonochromatoren



NIRS Kalibriervorrichtung für Transmissionssonde

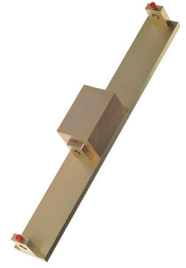

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7430.010	NIRS XDS Ersatzteile für Laborgerät	
	NIRS XDS Ersatzteile für Laborgerät besteht aus zwei Ersatzlampen, zwei Lüfterfilter und vier Sicherungen.	
6.7430.000	NIRS XDS Ersatzlampe für Laborgerät	
	Ersatzlampe mit 12 V und 50 W für den Monochromator der NIRS XDS Laborgeräte	
6.7450.040	NIRS Transmissionswellenlängenstandard	
	Transmissionwellenlängenstandard für NIRS XDS RLA Analyzer und NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer	

Vision Air - Universelle Spektroskopie Software.

Vision Air Complete ist eine moderne und einfach zu bedienende Softwarelösung für den Einsatz im regulierten Umfeld.



Die Vorteile von Vision Air im Überblick:

- Individuelle Softwareanwendungen mit angepassten Nutzeroberflächen gewährleisten eine intuitive und einfache Bedienung
- Einfache Erstellung und Wartung von Arbeitsvorschriften
- SQL Datenbank für ein sicheres und einfaches Datenmanagement

Die Version Vision Air Complete (66072208) beinhaltet alle Anwendungen für die Qualitätssicherung mittels Vis-NIR Spektroskopie:

- Anwendung für das Instrumenten- und Datenmanagement
- Anwendung für die Methodenentwicklung
- Anwendung für die Routineanalyse

Weitere Vision Air Complete Lösungen:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - Universelle Spektroskopie Software.

Vision Air Network ist eine moderne und einfach zu bedienende Software-Lösung. Die Netzwerk Version ermöglicht den Aufbau eines globalen Server-Client Netzwerks mit zentraler Datenbank.



Die Vorteile von Vision Air im Überblick:

- Individuelle Softwareanwendungen mit angepassten Nutzeroberflächen gewährleisten eine intuitive und einfache Bedienung
- Zentralisiertes Daten- und Instrumentenmanagement
- Einfache Konfiguration und Aktualisierung mehrerer Geräte in wenigen Schritten

Die Version Vision Air Network Complete (66072207) beinhaltet alle Anwendungen für die Qualitätssicherung mittels Vis-NIR Spektroskopie:

- Anwendung für ein globales Instrumenten und Datenmanagement
- Anwendung für die Methodenentwicklung
- Anwendung für die Routineanalyse

Vision Air - Universelle Spektroskopie Software.

Vision Air Pharma Complete ist eine moderne und einfach zu bedienende Softwarelösung für den Einsatz im regulierten Umfeld.



Die Vorteile von Vision Air im Überblick:

- Individuelle Softwareanwendungen mit angepassten Nutzeroberflächen gewährleisten eine intuitive und einfache Bedienung
- Einfache Erstellung und Wartung von Arbeitsvorschriften
- SQL Datenbank für ein sicheres und einfaches Datenmanagement
- Erfüllt alle Title 21 CFR Part 11 Anforderungen

Die Version Vision Air Pharma Complete (66072209) beinhaltet alle Anwendungen für die Qualitätssicherung mittels Vis-NIR Spektroskopie:

- Anwendung für das Instrumenten- und Datenmanagement
- Anwendung für die Methodenentwicklung
- Anwendung für die Routineanalyse

Vision Air - Universelle Spektroskopie Software.

Vision Air Pharma Network Complete ist eine moderne und einfach zu bedienende Software-Lösung. Die Netzwerk Version ermöglicht den Aufbau eines globalen Server-Client Netzwerks mit zentraler Datenbank.



Die Vorteile von Vision Air im Überblick:

- Individuelle Softwareanwendungen mit angepassten Nutzeroberflächen gewährleisten eine intuitive und einfache Bedienung
- Zentralisiertes Daten- und Instrumentenmanagement
- Einfache Konfiguration und Aktualisierung mehrerer Geräte in wenigen Schritten
- Erfüllt alle Title 21 CFR Part 11 Anforderungen

Die Version Vision Air Pharma Network Complete (66072210) beinhaltet alle Anwendungen für die Qualitätssicherung mittels Vis-NIR Spektroskopie:

- Anwendung für ein globales Instrumenten und Datenmanagement
- Anwendung für die Methodenentwicklung
- Anwendung für die Routineanalyse

Zertifizierte Wellenlängen- und Transmissionsstandards (0.25AU, 0.5AU, 1AU, 1.5AU und 2.0AU) für NIRS XDS RapidLiquid Analyzer und NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer im regulierten Umfeld.



6.7430.060

Reinigungstuch aus Mikrofaser

Reinigungstuch für Bildschirme und Optiken.

