



930 Combustion IC DR (AJ)

2.930.9020

Das 930 Metrohm Combustion IC ermöglicht die Analyse von Halogenen und Schwefel in brennbaren Proben aller Art mittels inline Verbrennungsaufschluss (Pyrohydrolyse) mit anschließender ionenchromatographischer Bestimmung (Combustion IC). Es umfasst alle benötigten Komponenten, wie das Combustion Module von Analytik Jena (2.136.0700), das 920 Absorber Module, den 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg, den 800 Dosino zur Suppressorregeneration und die MagIC Net Software.

Das 930 Metrohm Combustion IC-Paket kann bei Bedarf mit einem Autosampler für feste oder flüssige Proben ergänzt werden (Autosampler MMS 5000). Die gesamte Analyse inklusive der Probenaufgabe und des Probenaufschlusses ist komplett automatisiert und wird vollständig von MagIC Net gesteuert.

Lieferumfang 2.930.9020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.136.0700

Combustion Module (Oven + ABD, AJ)



3 STK

1.800.0040

800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



1 STK

1.850.9010

IC Conductivity Detector

Kompakter und intelligenter Hochleistungs-Leitfähigkeits-Detektor zu den intelligenten IC Geräten. Hervorragende Temperaturkonstanz, die gesamte Signalverarbeitung innerhalb des geschützten Detektorblocks und DSP – Digital Signal Processing – der letzten Generation garantieren höchste Präzision der Messung. Dank dem dynamischen Arbeitsbereich sind keine (auch nicht automatische) Bereichswechsel notwendig.



1 STK

1.920.0010

920 Absorber Module

Das 920 Absorber Module verbindet das Combustion Module mit dem Ionenchromatographen. Das 920 Absorber Module sorgt dafür, dass die gasförmigen Verbindungen der Analyten gelöst und dem IC zugeführt werden. Es ist für das gesamte Liquid-Handling verantwortlich. Neben der Combustion IC kann es auch für die Gasanalytik Anwendung finden.



Für Anionen-anreicherung und Matrixeliminierung. Die Vergrößerung des Packungsbetts erhöht die Kapazität der beiden vollständig aus PEEK gefertigten Anreicherungssäulen. Die hohe Kapazität wird vor allem dann benötigt, wenn Matrixeffekte eine Überladung der Anreicherungssäule verursachen könnten oder Proben mit hoher Ionenstärke analysiert werden sollen.



Hochkapazitive Anionensäule, die zur Reinigung des Eluentenstroms eingesetzt wird. Selbst Reagenzien der höchsten Qualitätsstufe, z. B. «Ultrapur» oder «puriss» können noch minimale anionische Verunreinigungen enthalten. Diese werden von der Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 sicher zurückgehalten.

Diese Säule wird vor allem bei Gradientenapplikationen eingesetzt.



Die Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule wird zur Entfernung ionischer, das heisst kationischer und anionischer Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen eingesetzt. Ihre Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der «Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule können Einflüsse des Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.



Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



1 STK

6.1602.150

Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 × UNF 10/32

Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



2 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.050

Trockenflasche / 100 mL / GL 45



2 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



2 STK

6.1609.000

Adsorberrohr / gross und gebogen

Zu Füllen mit Adsorbermaterial.




3 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.

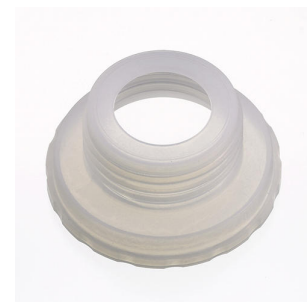

2 STK

6.1803.030

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.




1 STK

6.1803.130

Kapillare 1/8 in. / 1/16 in. i.D. / 1.5 m

Verbindungskapillare von den Eluentkomponenten zum Eluent Synthesizer.

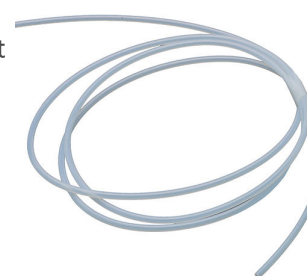

4 STK

6.1803.160

PTFE-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

PTFE-Kapillare zur Verwendung im 920 Absorber Module.



2 STK

6.1805.040

FEP-Schlauch / M6 / 9 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.060

T-Verbinder / M6 innen

3 mal Gewinde M6 innen.



1 STK

6.1808.280

Adapter 807 Dosing Unit Port 4, M6 innen

Adapter zur Verwendung von Port 4 der 807 Dosing Unit zur Verbindung mit einem FEP-Schlauch / M6.



2 STK

6.1816.080

Silikonschlauch 6 mm i.D. / 2 m

Ablaufschlauch zum «Waste Collector».



1 STK

6.1825.290

PEEK-Probenschleife 250 µL

Probenschleife zur «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) und zum PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 PEEK-Druckschrauben.



1 STK

6.1831.040

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 15 cm


Zur Inline-Dialyse. Für IC Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.



2 STK

6.1838.020

FEP-Schlauchverbindung zu Absorber Module, M6, 150 cm

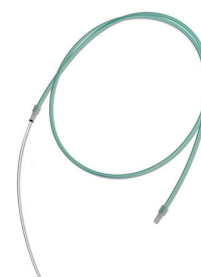

2 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



2 STK

6.2057.230

Dosino-Halter zum Absorber Module

Halter zur Befestigung von Dosinos am Absorber Module.



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.



1 STK

6.2421.000

Absorberrohr zum Absorber Module

Absorberrohr zur Absorption der Verbrennungsgase aus dem Combustion Module.



1 STK

6.2621.080

Kapillarschneider

Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.



3 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



3 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



4 STK

6.2744.090

Druckschraube lang

Lange Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 2 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren (MCS und Proben-Degasser).



1 STK

6.2744.170

Druckschraube PEEK UNF 1/4-28, 3 Stück

Anschluss der Verbindungskapillaren der Eluentkomponenten an den Eluent Synthesizer.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



8 STK

6.2744.220

Gewindestopfen 10/32 lang

Für Professional IC Instrumente. Zum Verschliessen von nicht benutzten Ein- und Ausgängen von Degassern und MCS.




2 STK

6.2744.350

Druckschraube PEEK 14 mm, 3 Stück

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren im Absorber Module.

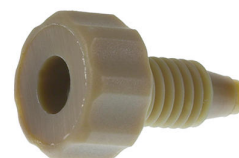

1 STK

6.2766.000

Halter für Absorberrohr

Halter zur Befestigung des Absorberrohrs im Absorber Module.



1 STK

6.2766.010

Halter für Einlassventil

Halter für Einlassventil zum Absorber Module.



1 STK

6.2824.170

Einlassventil PEEK

Metallfreies Rückschlagventil für die Einlassseite der IC Pumpenköpfe der Geräte 940, 930, 925, 883, 882, 881 und 850.



1 STK

6.2832.000

MSM Rotor A

Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)



1 STK

6.2842.020

Adapterhülse, MSM

Mit Hilfe der Adapterhülse kann sowohl der MSM Rotor A wie auch der MSM-LC Rotor A im Rotorgehäuse installiert werden.



1 STK

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



1 STK

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



1 STK

6.5000.000

Zubehör-Kit: Vario/Flex Basis

Grundzubehörsatz zu einem Professional IC Vario oder Compact IC Flex.



1 STK

6.5000.010

Zubehör-Kit: Vario/Flex ONE

Zubehörsatz zum ONE-Module (IC-Pumpe mit Injektor) für Professional IC Vario und Compact IC Flex Geräte.



1 STK

6.5000.020

Zubehör-Kit: Vario/Flex SeS

Zubehörsatz zur sequentiellen Suppression (SeS) für Professional IC Vario und Compact IC Flex Geräte. Ohne Suppressor-Rotor.



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1829.020

FEP-Ansaugschlauch / M6 / 0.5 m

Für Dosiereinheit




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

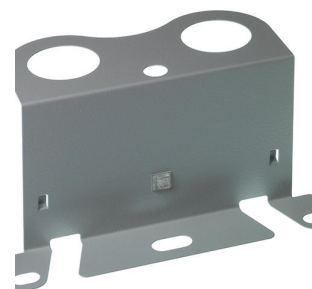

1 STK

6.2821.120

Inline-Filter 2 µm

Inline-Filter 2 µm.



1 STK

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



Professionelle Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung eines intelligenten Compact IC Gerätes, eines Detektors und eines Autosamplers oder eines 771 Compact Interface. Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.



Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Compact erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

1 Lizenz.

Die Installation und Dokumente werden auf einem USB Stick geliefert.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7301.000	Verbrennungsrohr (AJ) Quarzverbrennungsrohr zum Combustion Module.	
6.7301.100	Führungsrohr für ABD (alt) Führungsrohr für Automatic Boat Driver des Combustion Module (bis ABD Seriennummer 1709 590).	
6.7301.110	Haken für ABD Quarzglashaken für Quarzglasschiffchen im Automatic Boat Driver des Combustion Module.	
6.7301.140	Septum 12.5 mm Septum für Flüssigprobenport, 5 Stück.	

6.7301.150 Trägermaterial aus Quarz für Flüssigproben

Trägermaterial für Flüssigprobeninjektionen, 3 Stück.



6.7301.160 Handdosierspritze 100 µL

Handdosierspritze für manuelle Flüssigprobeninjektion




6.7301.170 O-Ring 14 × 4 mm für ABD

Dichtring für Verbindung ABD zu Quarzglasrohr



6.7301.180 Finger-Tight-Set 1/8 in.

Finger-Tight für Gasverbindung am Automatic Boat Driver

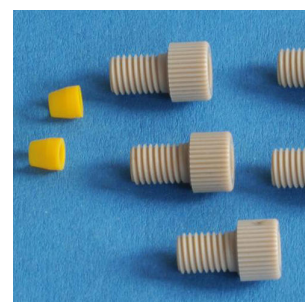

6.7301.190 Dichtung Schleuse für ABD

Dichtung für die Schleuse am Automatic Boat Driver.



6.7301.210 T-Verbinder CIC

T-Verbinder nach am Auslass des Ofens für Zuführung Absorptionslösung.



6.7301.220 Federdrahtschelle 7.3 -7.8 mm

Federdrahtschelle zu Fast Verbinder



6.7301.230 Rückschlagkanüle Combustion IC

Rückschlagkanüle zum Schutz der Gasbox



6.7301.240 Einfädelhilfe 1/16 in. Schlauch Combustion IC

Einfädelhilfe für Kapillaren in FAST Verbinder




6.7301.250 Flammensensor

Flammensensor für die vollautomatische Probenverbrennung



6.7301.260 O-Ringe zu Spülgefäß CIC

Ersatz-O-Ringe zum Spülgefäß im Combustion IC, 3 Stück.

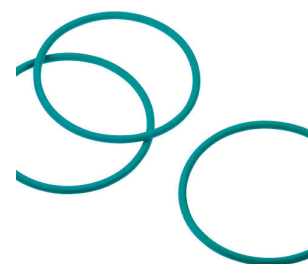

6.7302.000 Kit für feste Proben zu MMS 5000, 35 Positionen

Kit für feste Proben zu MMS 5000 mit Rack für Probenschiffchen, Greifer und 10 Quarzglasschiffchen.



6.7302.100

Quarzschißchen 40 × 9 mm (AJ)


Quarzglasschißchen für Probenaufgabe in Combustion Module, 10 Stück.



6.7302.110

Quarzvial, 6 x 18 mm, für CIC, 50 Stück

Probenröhrchen aus Quarz für die Combustion-IC. Die Probenröhrchen werden eingesetzt, wenn die Probe Alkali- und/oder Erdalkalikationen enthalten, welche das Quarzverbrennungsröhr in Mitleidenschaft ziehen könnten. Diese Kationen reagieren mit dem Quarz des Probenröhrchens und werden so vom Verbrennungsröhr ferngehalten. Die Proben werden mittels Quarzwolle (6.7302.120) im Probenröhrchen fixiert.

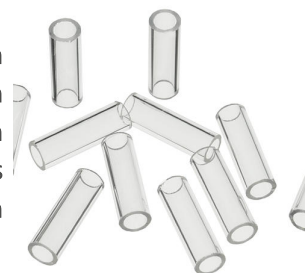

6.7302.120

Quarzwolle zu 6.7302.110, 10 g

Quarzwolle zum Fixieren der Probe im Probenröhrchen aus Quarz (6.7302.110).



6.7302.130

Keramikschißchen 40 x 9 mm (AJ)


Keramikschißchen für Probenaufgabe in Combustion Module, 10 Stück.



6.7302.200

Greifer für Schiffchen


Greifer für Feststoffwechslerssetup MMS 5000

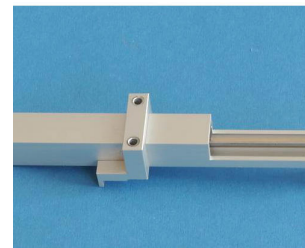

6.7303.000

Kit für flüssige Proben zu MMS 5000, 112 Positionen

Kit für flüssige Proben zu MMS 5000 mit Rack für Probengefäße, 100 µL Spritze mit wechselbarer Nadel und 100 Schnappingflaschen.

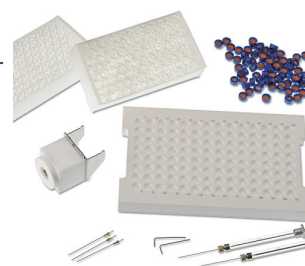

6.7303.100

Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück


Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.110

Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.

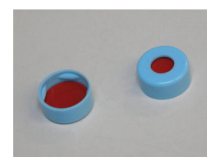

6.7303.200 Spritze 50 μ L mit wechselbarer Nadel

Ersatzspritze für MMS 5000 Flüssigkeitssetup



6.7303.210 Spritze 100 μ L mit wechselbarer Nadel

Ersatzspritze für MMS 5000 Flüssigkeitssetup



6.7303.220 Nadeln für 50 μ L/100 μ L Spritzen, 3 Stück

Ersatznadel für Spritzen für MMS 5000 Flüssigkeitssetup



6.7303.240 Septum für Spülgefäß

Septum für Spülgefäß im Flüssigkeits-Kit zu MMS 5000



6.7303.250

Septum zu Abfallgefäß 5x

Septum zu Abfallgefäß im MMS 5000 (2.136.0800).



6.7304.000

FAST Verbinder gewinkelt

Für Verbindungen zum Quarzglasrohr



6.7304.010

FAST Verbinder gerade

Für Verbindungen zum Quarzglasrohr



6.7304.020

Sauerstoff-/Argon-Anschlussschlauch 2m

Anschlussschlauch für Gaszuführung zum Combustion Module



6.7304.030 Kupplungsstück Oven zu LPG/GSS (AJ)

Verbindungsstück zum anschliessen des LPG/GSS Module (AJ) an den Verbrennungsofen. Für Metrohm Combustion IC.



6.7305.000 Blasengefäss

Blasengefäss zum LPG/GSS Module.




6.7305.010 Verschraubung komplett zu Blasengefäss.

Verschraubung zur Befestigung am Blasengefäss.



6.7305.020 Septum gelocht für PEEK-Gaseinleitungsrohr

Septum gelocht zur Überführung des Messgases via ABD-Schleuse.

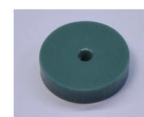

6.7305.030

Gaseinleitungsrohr PEEK für GSS/LPG

Flexibles Rohr aus PEEK durchgeführt durchs Septum gelocht 6.730.5020.



6.7305.040

Filter 0.5 µm zu Filtereinheit LPG

0.5 µm Partikelfilter am LPG Anschluss.



6.7305.050

T-Verbinder zu LPG/GSS Module

T-Verbinder mit zwei Anschlussschläuchen 6/4 mm, 10 cm und 70 cm



6.7305.060

Filter 40 µm zu Filtereinheit GSS

Partikelfilter 40 µm zum GSS Module




6.7301.200 Führungrohr für ABD (neu)

Führungrohr für Automatic Boat Driver des Combustion Module (ABD)
Seriennummern ab 1709591)




6.5330.190 IC-Ausrüstung: Dosino Regeneration

Zubehörset zur Montage eines Dosinos zur automatischen Regeneration
des Metrohm Suppressor Module (MSM).

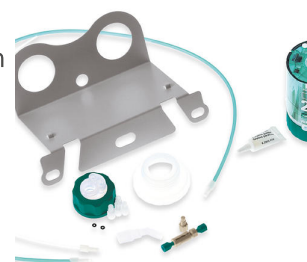

6.7303.310 Probenrack 112 Positionen für flüssige Proben

Für flüssige Proben.

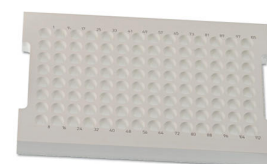

6.7302.310 Probenrack 35 Positionen für feste Proben

Für Feststoffe.



6.6059.406

MagIC Net 4.x Compact Upgrade zu MagIC Net 4.x Professional: 1 Lizenz

Programmerweiterung von MagIC Net Compact auf MagIC Net Professional.



6.6059.407

MagIC Net 4.x Compact Upgrade zu MagIC Net 4.x Multi: 3 Lizenzen

Programmerweiterung von MagIC Net Compact auf MagIC Net Multi.



Professionelle Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung eines intelligenten Compact IC Gerätes, eines Detektors und eines Autosamplers oder eines 771 Compact Interface. Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.



Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Compact erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

1 Lizenz.

Die Installation und Dokumente werden auf einem USB Stick geliefert.

Professionelle Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact IC Geräte und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc. Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.



Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Professional erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

1 Lizenz

Die Installation und Dokumente werden auf einem USB Stick geliefert.

Client/Server-fähige Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact IC Geräte und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc.

Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.

Die Daten und Methoden werden zentral auf dem Server gespeichert.

Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Multi erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

Die Performance für Client-Server Systeme mit Servern ausserhalb des Firmen-internen Netzwerkes wurde verbessert.

Client/Server Version mit 3 Lizenzen



2.948.0010

948 Continuous IC Module, CEP

Mit dem 948 Continuous IC Module werden Hydroxideluenten automatisiert hergestellt. Es können sowohl isokratische Eluenten hergestellt als auch Gradienten gefahren werden.

Das 948 Continuous IC Module, CEP besteht aus folgenden Bestandteilen:

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC, 6.02850.200)
- kontinuierliche Anion Trap (CT, 6.02850.100)
- Hochdruckdegasser (H-DEG, 6.02850.000)

Beispielmethoden gemäss Handbuch 948 Continuous IC Module.



Suppressor Rotor mit hoher Kapazität für Hydroxid-Eluenten für alle IC Geräte mit MSM-HC (Metrohm Suppressor Modul mit hoher Kapazität).



Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



Aussenrohr des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



Verbindungsrohr des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.330

Keramik Einlegestück, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Keramik Einlegestück des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.340

Fritte, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Fritte des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.350

Feststellschraube, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Feststellschraube des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.360

Überwurfmutter, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Überwurfmutter des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).

