



Ag-Titrode mit Ag₂S-Überzug

6.00430.100S

Kombinierte Silberringelektrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode.

Der Silberring ist für eine erhöhte Empfindlichkeit und bessere Nachweisgrenze mit Sulfid (Ag₂S) überzogen.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Fällungstitrationsen bei konstant bleibendem pH-Wert (Titriermittel Silbernitrat) von z.B.:

- Chlorid, Bromid, Iodid
- Sulfiden
- Schwefelwasserstoff
- Mercaptane
- Cyanide

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

Lieferumfang 6.00430.100S

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.
---------	------------	---

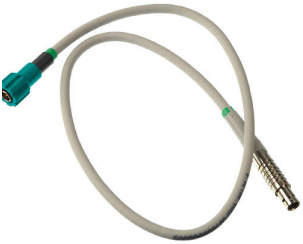


100 Stk	6.2008.040	Aufbewahrungsgefäß
---------	------------	--------------------

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.02104.000	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 0.55 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.010	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 1.5 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	