


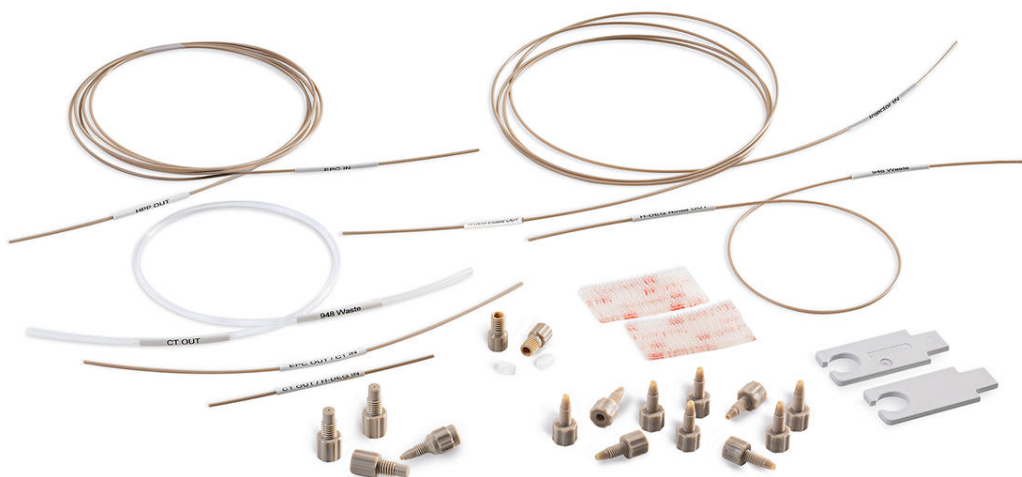

Zubehör-Kit: CEP

6.05000.300

Zubehör-Kit für die Installation des 948 Continuous IC Module, CEP

Lieferumfang 6.05000.300

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	6.01805.470	FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 500 mm, CT OUT
-------	-------------	---

Ein FEP-Schlauch der den Continuous Anion Trap ausgang mit dem Waste Collector des Ionen Chromatographen verbindet.




1 STK

6.01831.010

PEEK-Kapillare, 0.25 mm, HPP OUT

Eine PEEK-Kapillare die die Hochdruckpumpe des Ionen Chromatographen mit dem Eluent Producer Cartridge (EPC) des 948 Continuous IC Module, CEP verbindet.

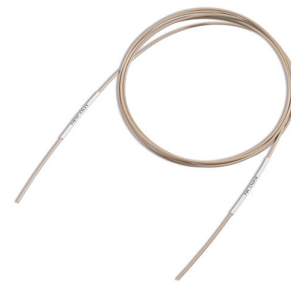

1 STK

6.01831.020

PEEK-Kapillare, 0.25 mm, EPC OUT

Eine PEEK-Kapillare die den Eluent Producer Cartridge (EPC) mit dem Continuous Trap (CT) des 948 Continuous IC Module, CEP verbindet.



1 STK

6.01831.030

PEEK-Kapillare, 0.25 mm, CT OUT

Eine PEEK-Kapillare die die Continuous Trap (CT) mit dem High-Pressure Degasser (H-DEG) des 948 Continuous IC Module, CEP verbindet.




1 STK

6.01831.040

PEEK Kapillare, 0.25 mm, H-DEG OUT

Eine PEEK-Kapillare die den High-Pressure Degasser (H-DEG) des 948 Continuous IC Module, CEP mit dem Injektor des Ionen Chromatographen verbindet.

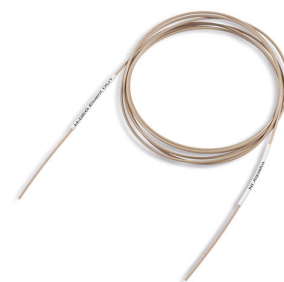

1 STK

6.01831.050

PEEK-Kapillare, 0.25 mm, H-DEG Rinse

Eine PEEK-Kapillare die den High-Pressure Degasser (H-DEG) des 948 Continuous IC Module, CEP mit dem Waste Collector des Ionen Chromatographen verbindet.



1 STK

6.2053.030

Befestigungsband zu 6.2744.340, 25 x 50 mm

Befestigungsband zur IC Ausrüstung Dosino-Gradient



2 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



2 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).

