



Zubehör-Kit WSM (1T/2P)

6.05001.110

Dieses Zubehör-Kit beinhaltet alle Komponenten, die für die Verschlauchung einer Spül- und einer Absaugpumpe am Pumpenmodul des OMNIS Workstation Module (1T/2P) benötigt werden. Dazu gehören neben vorkonfektionierten Schläuchen mit Luer-Anschluss auch je zwei Anpressklammern und Pumpschläuche. Zusätzlich befindet sich ein Werkzeug zur vereinfachten Anbringung der Luer-Anschlüsse mit im Set.

Lieferumfang 6.05001.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.01801.020	Pumpschlauch Pharm-A-line zu Pumpenmodul Peristaltik

Der Pumpschlauch ist bereits mit Adaptern versehen, die den direkten Einbau in die Peristaltikpumpe des Pumpenmoduls erlauben. Der Pharm-A-line Pumpschlauch ist für den Transport von wässrigen wie nicht-wässrigen Lösungen und muss in Verbindung mit der Anpressklammer weiss im Pumpenmodul betrieben werden.



2 STK

6.01805.110

PTFE-Schlauch mit Luer 80 cm

Schlauch für die Verbindung der Pumpenmodul Peristaltikpumpe 2 oder 4 mit dem Verteilstück (Absaugen) am Pick&Place-Modul.




2 STK

6.01805.120

PTFE Schlauch mit Luer 2.5 m

Schlauch für die Verbindung der Peristaltikpumpe im Pumpenmodul mit dem Kanister.

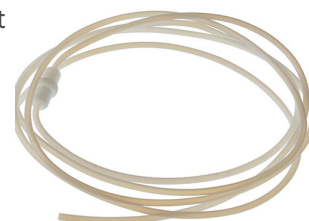

1 STK

6.02621.030

Luer-Werkzeug

Dieses Werkzeug erleichtert die Anbringung und Demontage von Luerlock-Verbindungen. Es kann auf den Luerlock-Anschluss aufgesetzt werden und erleichtert durch seine Form das Anbringen der mit Luer-Anschlüssen versehenen Schläuche.



2 STK

6.02703.000

Anpressklammer weiss zu Pumpenmodul "Peristaltik"

Mittels der Anpressklammer wird der Pumpschlauch im Pumpenmodul "Peristaltik" fixiert und gesichert.

