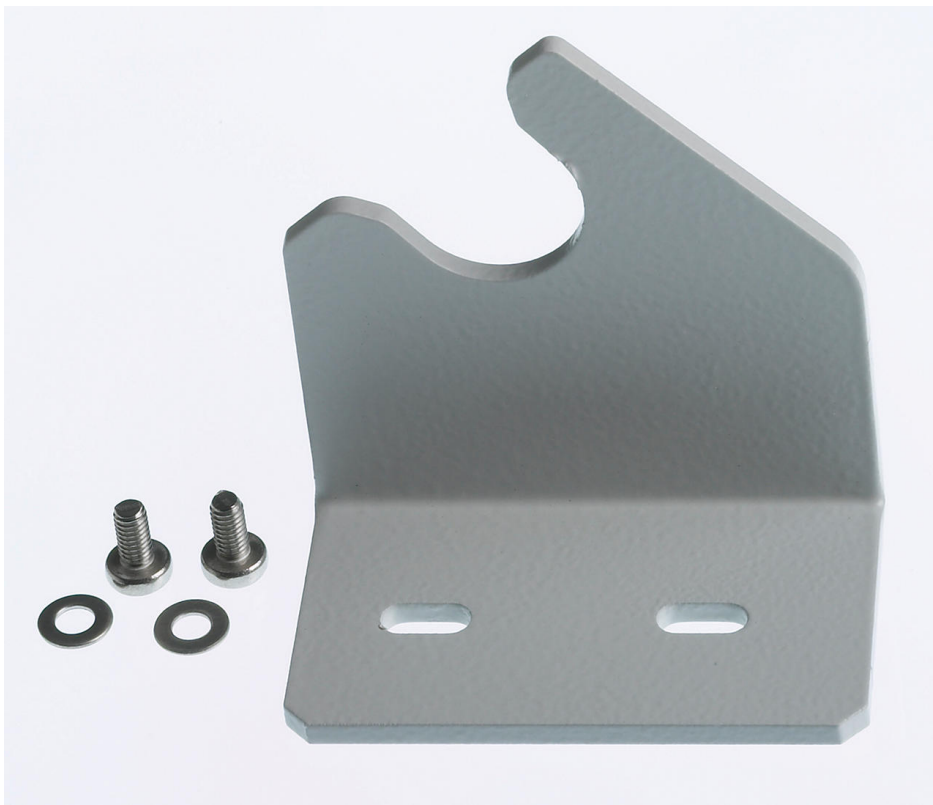




Abstreifer zu Adapter 61808250

6.2058.070

Der Abstreifer wird mit Hilfe der Befestigungsplatte 6.2058.050 an der Turmseite des Sample Processors montiert und ermöglicht das automatische Abwerfen der verwendeten Pipettenspitzen in den Auffangbehälter 6.1625.010.

Lieferumfang 6.2058.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.100	Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1808.250	Pipetten-Adapter 1-10 mL zu Transferkopf Adapter mit Aussengewinde M6 und Eppendorfkonus zum Einsatz in den Transferkopf 6.1462.240 zur Verwendung von 10 mL Eppendorf Pipettenspitzen

