



IC-Ausrüstung: MiPuT

6.5330.170

Zubehörset zur Montage eines Dosino für Proben-Pick-up (Metrohm intelligente Pick-up-Injektionstechnik).

Lieferumfang 6.5330.170

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Die Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule wird zur Entfernung ionischer, das heisst kationischer und anionischer Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen eingesetzt. Ihre Anwendung ist vor allem im Rahmen von «MISP», der «Metrohm Inline Sample Preparation», zur Reinigung des Transferwassers zu empfehlen. Durch die Verwendung der Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 Säule können Einflüsse des Transferwassers auf den Systemblank stark vermindert werden.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45




1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.

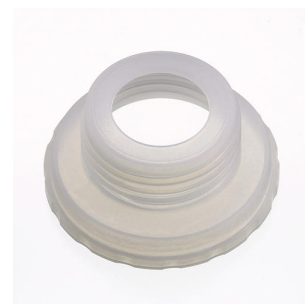

1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK 6.1805.120 FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK 6.1808.090 Gewindeadapter M8 aussen / M6 innen

Gewinde M8 aussen, M6 innen. Z.B. für die Montage der Luftrohre 6.2418.XXX in Reaktionsgefässen 6.1429.XXX von Stabilitätsmessgeräten.



1 STK 6.1819.110 FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



1 STK 6.1825.290 PEEK-Probenschleife 250 µL

Probenschleife zur «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) und zum PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 PEEK-Druckschrauben.



1 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.1841.000

PEEK-Transferkapillare 2 mL, 5 m




1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

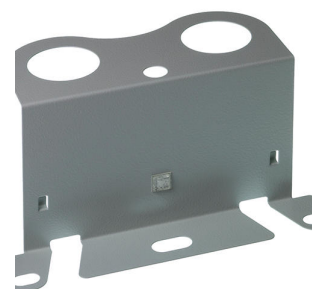

1 STK

6.2624.100

Pick-up-Nadel MF

Beschichtete Stahlnadel für den metallfreien Pick-up-Modus sowie für Eppendorf-Probengefäße.



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.



1 STK

6.2833.010

Nadelhalter 1/16 in.

Für IC Sample Processors. Für 1/16 in. Kanülen.



1 STK

6.2841.120

Liquid Handling Station, links

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation zu Probenwechslern mit Swinghead. Zur Montage links vom Turm.



1 STK

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL ohne Zubehör

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.



1 STK

6.9920.231

Becherniederhalter für Probenrack 159 x 2 mL + 3 x 300 mL

Platte zum Abstreifen der GefäÙsdeckel am Professional IC Sample Processor. Für 2 mL ProbengefäÙÙ.



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

