



VA-Elektrodenausrüstung mit scTRACE Gold für VA Computrace

6.5340.000

Kompletter Zubehörsatz für die Bestimmung von Arsen oder Quecksilber mit der scTRACE Gold. Enthält Elektrodenhalter, scTRACE Gold (4 Stück), Messgefäß, Rührer und weiteres Zubehör.

Lieferumfang 6.5340.000


Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1204.200	Rührer für VA-Stände
		Rührer für VA-Stände komplett, metallfrei



Halter für die scTRACE Gold mit Steckkontakten zum Anschluss der Elektrodenkabel für Arbeits-, Referenz- und Hilfelektrode. Der Elektrodenschaft ergibt zusammen mit der scTRACE Gold 6.1258.000 einen kompletten Sensor für die Voltammetrie zur Verwendung in Professional-VA-Geräten. Zum Einsatz in VA-Ständen und VA Computrace sind drei Adapter 6.2112.130 notwendig. Die scTRACE Gold muss lediglich auf den Schaft aufgesteckt werden. Während die scTRACE Gold in regelmässigen Abständen ausgetauscht wird, kann der Elektrodenschaft weiterverwendet werden.



für rotierende Scheibenelektroden und Rührer in VA-Ständen. (3 Stück)

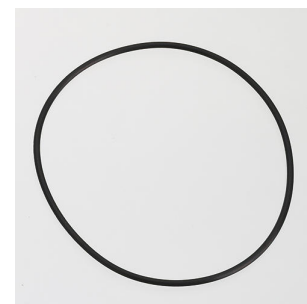

Goldmikrodraht-Elektrode auf Dickfilmbasis für die Bestimmung von Arsen in Wässern. Die scTRACE Gold ist ein kombinierter voltammetrischer Sensor für die Voltammetrie. Goldmikrodraht-Arbeitslektrode, Ag/AgCl-Referenzelektrode und Kohlenstoff-Hilfelektrode befinden sich auf einem Sensor. Einfach in der Handhabung und weitgehend wartungsfrei kann mit der scTRACE Gold zum Beispiel Arsen in Wasser im Spurenbereich bestimmt werden. Zusammen mit dem Elektrodenschaft 6.1241.080 kann sie in jedem Metrohm-Voltammetrie-Messstand verwendet werden.



1 STK

6.1446.000

Schliffstopfen / B-14/(15)



1 STK

6.1808.000

Kupplungsmuffe M6



3 STK

6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt,
vergoldet

Für VA-Elektroden



1 STK

6.2753.210

Deckel

Für Ölabscheider 62753200 und für Anwendungen mit der scTRACE
Gold.

