



TacticID-1064 Raman-Handspektrometer

BWT-840000920

Das TacticID[®]-1064 ist ein Raman-Handspektrometer für den Feldeinsatz, mit dem Sicherheitspersonal und Einsatzkräfte (z. B. von Strafverfolgungsbehörden, Zoll und Grenzschutz sowie Bombenräumkommandos) eine schnelle und präzise kontaktlose Analyse durchführen können. Das TacticID-1064 greift auf die bewährte Raman-Spektroskopie zurück und ermöglicht Benutzern die Echtzeit-Identifikation eines breiten Spektrums an unbekannten Chemikalien, Betäubungsmitteln, pharmazeutischen Drogen, Sprengstoffen und sonstigen Substanzen in weniger als einer Minute. Die Ansprechzeit und operative Unsicherheit werden somit erheblich verkürzt. Mit dem TacticID-1064 wird Fluoreszenz durch den Einsatz einer Wellenlänge von 1064 nm vermieden, sodass die Benutzer sogar mit schwierigen Strassenproben arbeiten können.

Lieferumfang BWT-840000920

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

BWT-840000295 Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm Durchmesser

Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.



1 STK

BWT-840000329 Tasche für 15-mm-Vials

Tasche für 15-mm-Vials.



1 STK

BWT-840000344 Adapter für Vial-Halter

Adapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.



1 STK

BWT-840000348 Validierungskappe aus Polystyrol

Validierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard.



1 STK

BWT-840000414 18-V-Netzadapter

Netzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten.

TID-PWA



1 STK

BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TactiID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



1 STK

BWT-840000858 USB-Kabel

USB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.



1 STK

BWT-840000948 USB-OTG-Hostkabel

USB-OTG-Hostkabel für die Datenübertragung zwischen einem USB-Stick und einem Handsystem.



1 STK

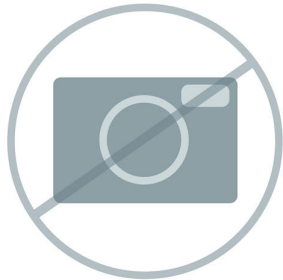
BWT-840000345 NanoRam Flaschenadapter

NanoRam Flaschenadapter.

NR2-BSA



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
BWT-840000294	Akku-Ladestation	
	Ladestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT).	
BWT-840000353	Schutzkappe für den Schaft	
	Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.	
BWT-840000361	Handmessgerät für die Laserleistung	
	Laserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.	
BWT-840000498	Kassette für Einwegbatterien	
	TaticID Batteriekassette zur Verwendung mit sechs Einwegbatterien des Typs 123A (z. B. Surefire). Ohne Batterien.	

BWT-840000969 Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064

Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)

Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.

NRX-BSA



BWT-840000428 WLAN-Router

Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.



BWT-840000949 Large Spot Adapter

Der Probennahmeadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigem Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.

TID-STA



Schultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.

TID-SBG

