



TacticID-1064 ST

BWT-840001134

Das TacticID®-1064 ST ist ein Raman-Handspektrometer mit einem 1064-nm-Laser für die schnelle Identifikation von Sprengstoffen, Betäubungsmitteln und anderen verdächtigen Substanzen vor Ort. Das TacticID-1064 ST kann Proben durch undurchsichtige und transparente Verpackungen zerstörungsfrei analysieren. Den Benutzern, z. B. Sicherheitspersonal, Einsatzkräften (etwa von Strafverfolgungsbehörden), Zoll und Grenzschutz sowie Bombenräumkommandos und Teams zur Gefahrstoffbeseitigung, wird der Gefährdungsgrad klar und deutlich angezeigt, sodass sie selbst bei minimalem Kontakt mit der Probe schnell reagieren können.

Das TacticID-1064 ST greift auf die bewährte Raman-Spektroskopie in Verbindung mit der patentierten STRaman®-Technologie zurück und ermöglicht Benutzern die als Beweismittel dienende Echtzeit-Identifikation von unbekannten Chemikalien, Betäubungsmitteln, pharmazeutischen Drogen, Sprengstoffen und vielen anderen Substanzen selbst durch blickdichte Barrieren und in weniger als einer Minute. Ansprechzeit und operative Unsicherheit werden somit erheblich reduziert.

Das TacticID-1064 ST mit einer Laseranregung bei 1064 nm und ST-Adapter für die Identifikation durch Verpackungen scannt einen grossen Probenbereich und erzeugt ein fluoreszenzfreies

Spektrum, ohne die Probe zu verbrennen. Dadurch können Benutzer auch dunkle und farbige Stoffe, schwierige Strassenproben, inhomogene Gemische und Substanzen direkt durch die Verpackung identifizieren.

Dieses System mit Schutzart IP68 verfügt über ein besonders helles Display mit Touchscreen und /oder Tasten und lässt sich selbst mit Schutzkleidung einfach bedienen.

Lieferumfang BWT-840001134

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	BWT-840000295	Vials für Flüssigkeiten mit 15 mm Durchmesser
		Packung mit 6 Vials aus Borosilikatglas (Durchmesser 15 mm) inklusive Tasche.
		
1 STK	BWT-840000344	Adapter für Vial-Halter
		Adapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm.
		
1 STK	BWT-840000345	NanoRam Flaschenadapter
		NanoRam Flaschenadapter.
		NR2-BSA
		

1 STK

BWT-840000348 Validierungskappe aus Polystyrol


Validierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard.



1 STK

BWT-840000353 Schutzkappe für den Schaft

Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.

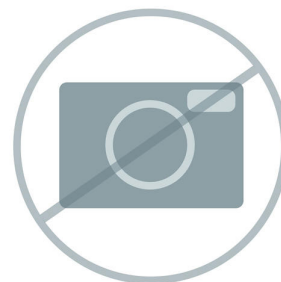

1 STK

BWT-840000329 Tasche für 15-mm-Vials

Tasche für 15-mm-Vials.



1 STK

BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TactiID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



1 STK

BWT-840000858 USB-Kabel

USB-Kabel, das den Micro-USB-Port bis Typ A USB 2.0 unterstützt.



1 STK

BWT-840000948 USB-OTG-Hostkabel

USB-OTG-Hostkabel für die Datenübertragung zwischen einem USB-Stick und einem Handsystem.



1 STK

BWT-840000949 Large Spot Adapter

Der Probennahmeadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigem Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.



TID-STA

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
BWT-840000294	Akku-Ladestation	
	Ladestation für Lithium-Ionen-Akku (nur zum Aufladen von NR-BAT und TID-BAT).	
BWT-840000361	Handmessgerät für die Laserleistung	
	Laserleistungsmessgerät, Stabausführung, kalibriert. Bereich: 5 Mikrowatt bis 1 Watt. Einsatz bei OQ/PQ und jährlicher Zertifizierung des Laserleistungsmessgeräts.	
BWT-840000428	WLAN-Router	
	Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.	
BWT-840000969	Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064	
	Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..	
	NRX-CTP-IMP	

BWT-840000970 NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)

Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.

NRX-BSA



BWT-840000498 Kassette für Einwegbatterien

TacticID Batteriekassette zur Verwendung mit sechs Einwegbatterien des Typs 123A (z. B. Surefire). Ohne Batterien.



BWT-840001154 Schultertasche für Raman-Handspektrometer

Schultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.

TID-SBG



BWT-840000414 18-V-Netzadapter

Netzadapter für 18 VDC, 1,67 A. Stecker für USA, EU, UK und AU sind im Lieferumfang enthalten.

TID-PWA

