



TacticID Mobile

BWT-840001195

Das TacticID® Mobile ist ein kostengünstiges, ergonomisches Raman-Handspektrometer mit einem 1064-nm-Laser und ausgewählten Bibliotheken für die schnelle, zerstörungsfreie Identifikation von Betäubungsmitteln, gefährlichen Chemikalien und verdächtigen Stoffen. Es wurde für den einfachen Einsatz durch Sicherheitspersonal vor Ort entwickelt, da es Proben schnell und direkt durch transparente Behälter scannen kann und die Ergebnisse der Identifikation klar auf dem grossen, sehr hellen und hochauflösenden Touchscreen angezeigt werden.

Das TacticID Mobile nutzt die Raman-Spektroskopie zur Messung des molekularen Fingerabdrucks einer Probe, die anhand der eingebundenen Betäubungsmittel-Spektrenbibliothek, Ausgangsstoffen, toxischen und gängigen Chemikalien, Arzneimitteln, Sprengstoffen und mehr identifiziert wird. Durch die Vor-Ort-Identifikation erhalten Ersthelfer eine verwertbare Probenidentifikation in weniger als einer Minute, die durch Sicherheitshinweise (GHS und NFPA 704) ergänzt wird und so eine schnelle Reaktion mit mehr Gewissheit ermöglicht.

Mit dem 1064-nm-Anregungslaser des TacticID Mobile lassen sich schwierige Strassenproben, farbige Proben und unreine Proben mit minimaler unerwünschter Fluoreszenz identifizieren. Das System kann über den Touchscreen oder die Tasten und somit sogar in Schutzkleidung bedient werden. Es verfügt über ein kompaktes Design mit einem robusten IP68-Gummischutz und hat die Fallprüfung nach der Militärnorm MIL-STD-810H bestanden.

Mit jedem Scan können weitere Informationen hinzugefügt werden, unter anderem Bilder, Standortmarkierungen, Notizen und andere Angaben zur Identifikation, aus denen sich ein umfassender Bericht mit allen einschlägigen Informationen in einem Dokument ergibt. Benutzer können eigene Bibliotheken anlegen und Anpassungen vornehmen.

Lieferumfang BWT-840001195

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	BWT-840000342	Rechtwinkliger Adapter Rechtwinkliger Adapter für die freihändige Messung mit Raman-Handgeräten. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile. 
1 STK	BWT-840000343	Aufsatzlinse Aufsatzlinse für Raman-Handgeräte. Kompatibel mit dem NanoRam-1064 und TacticID Mobile. 
1 STK	BWT-840000344	Adapter für Vial-Halter Adapter für Vial-Halter, kompatibel mit Vials mit einem Durchmesser von 15 mm. 

1 STK

BWT-840000345 NanoRam Flaschenadapter

NanoRam Flaschenadapter.

NR2-BSA



1 STK

BWT-840000348 Validierungskappe aus Polystyrol


Validierungskappe aus Polystyrol mit eingebautem Polystyrol nach ASTM-Standard.



1 STK

BWT-840000353 Schutzkappe für den Schaft

Schutzkappe für den Schaft von Raman-Handgeräten, Packung mit 10 Stück.

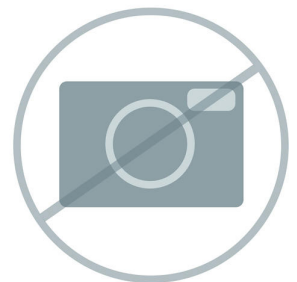

1 STK

BWT-840000354 Adaptertasche (NR2-PCH-ADPT)

Tasche für Adapter der Raman-Handgeräte, die mit dem NanoRam-1064, TacticID-N Plus und TacticID Mobile kompatibel sind.

NR2-PCH-ADPT



1 STK

BWT-840000419 Eingabestift/Kugelschreiber für TacticID

Kombination aus Eingabestift/Kugelschreiber für Touchscreens (Packung mit 5 Stück).

TID-STY



1 STK

BWT-840000912 Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte

Ersatzkit O-Ringe für Raman-Handgeräte (nur für den Schaft).

Das Kit beinhaltet: 15x O-Ring #1 mit ID 9.00 mm und 15x O-Ring #2 mit ID 10.00 mm (TacticID-Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064).

TID-ORK




1 STK

BWT-840001191 USB-Kabel Typ C auf Typ A

USB-Kabel Typ C auf Typ A. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.

HHX-USB

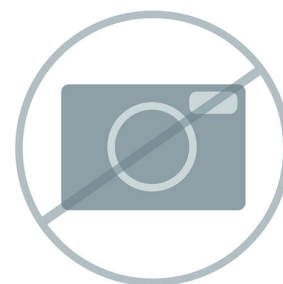


1 STK

BWT-840001192 Netzteil für das TacticID Mobile mit internationalen Steckern

Netzteil mit 15 VDC und 3,6 A. Inklusive Steckern für USA, EU, UK und AU. Kompatibel mit dem TacticID Mobile.


HHX-PWA

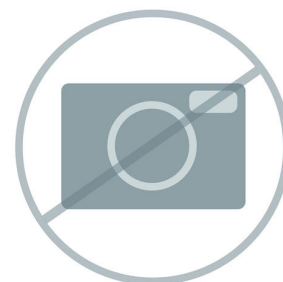

1 STK

BWT-840001252 TacticID Mobile Bibliothek verbotener und gängiger
Chemikalien

TacticID Mobile Bibliothek verbotener Substanzen, einschliesslich Drogen,
toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM),
Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.

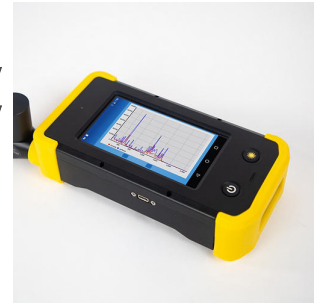

1 STK


BWT-840001193 USB-Stick mit Produkthandbüchern für das TacticID
Mobile

USB-Stick mit dem Produkthandbuch des TacticID Mobile. Inklusive USB-
A- sowie USB-C-Verbindungsstück. Kann für OTG-Funktionen genutzt
werden.

HHX-USB-OTG



Optionales Zubehör

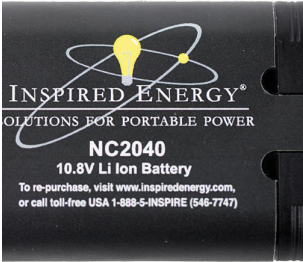Order no.	Beschreibung	
BWT-840000403	Lithium-Ionen-Akku mit 10.8 V	
	Lithium-Ionen-Akku zur Verwendung: kompatibel mit dem TacticID-N Plus, TacticID Mobile und NanoRam-1064.	
	TID-BAT	
BWT-840000428	WLAN-Router	
	Tragbarer, batteriebetriebener WLAN-Router, 3G/4G-Verbindung.	
BWT-840000949	Large Spot Adapter	
	Der Probennahmeadapter wurde für die Verwendung mit Raman-Handspektrometern von Metrohm entwickelt und bietet eine erhöhte Fokusgrösse sowie eine grössere Probennahmetiefe, um die Verbrennungsgefahr insbesondere bei empfindlichen oder dunkelfarbigem Proben zu minimieren. Darüber hinaus unterstützt dieser Adapter die Analyse durch Verpackungen, wenn er mit Geräten verwendet wird, die mit entsprechender Software kompatibel sind.	
	TID-STA	
BWT-840000969	Transflexionssonde für Raman-Handgerät 1064	
	Zubehör für Raman-Handspektrometer 1064: Kontakt-Transflexionssonde, Länge 6 Zoll, Arbeitsabstand ca. 1 mm, Betriebsdruck bis zu 2 bar bei Raumtemperatur..	
	NRX-CTP-IMP	

BWT-840000970 NanoRam Adapter für grosse Flaschen (1064)

Raman-Handspektrometer 1064 Zubehör: Adapter für grosse Flaschen mit 10 mm Arbeitsabstand.

NRX-BSA



BWT-840001154 Schultertasche für Raman-Handspektrometer

Schultertasche für die TacticID-Serie. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem 1000D-Gewebe, mit mehreren praktischen Taschen und Fächern für den Einsatz unter rauen Bedingungen.. Geeignet für alle TacticID-Produkte und NanoRam-Produkte. Nur zum Transportieren.

TID-SBG



BWT-840001184 Raman-Spektrenbibliothek mit über 1000 Verbindungen für das TacticID Mobile

Raman-Spektrenbibliothek mit über 1000 Spektren von gängigen Chemikalien, Betäubungsmitteln, Lösungsmitteln und Kunststoffen. Inklusive NFPA704- und GHS-Sicherheitshinweisen. Für die Verwendung mit dem TacticID Mobile.


TDL-XM-CNSP



BWT-840001194 Powerbank für das TacticID Mobile

Powerbank (Akku) für das TacticID Mobile. Kompatibel mit dem TacticID Mobile und dem Netzteil des TacticID Mobile zum Aufladen.


HHX-PWB

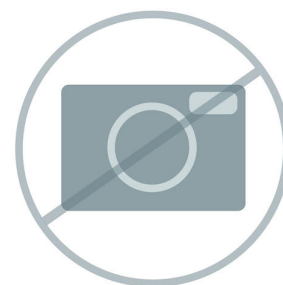

BWT-840001223 USB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID Mobile

USB-C Kfz-Ladegerät für das TacticID Mobile. Beinhaltet ein passendes USB-C-Kabel für das Schnellladen im Fahrzeug.

Modell HHX-CCA

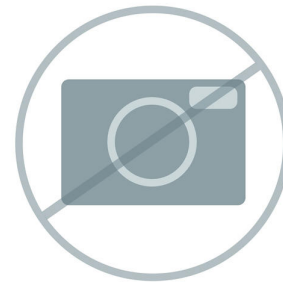

BWT-840001252 TacticID Mobile Bibliothek verbotener und gängiger Chemikalien

TacticID Mobile Bibliothek verbotener Substanzen, einschliesslich Drogen, toxischer Industriechemikalien (TIC), toxischer Industriematerialien (TIM), Ausgangsstoffen und gängiger Chemikalien.



BWT-840001266 Umfassende Raman-Bibliothek für TacticID Mobile

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek für TacticID Mobile – Über 29'000 Spektreneinträge von Chemikalien, Mineralien, organischen Chemikalien, Lösungsmitteln, Polymeren, Farbstoffen und Pigmenten, toxischen Industriechemikalien (TIC), toxischen Industriematerialien (TIM), Anorganika, Organometallen, Körperpflegeprodukten und verbotenen Substanzen.

TDL-XM-MCRL



BWT-840001323 Metrohm Mineralienbibliothek für TacticID Mobile

Metrohm Mineralienbibliothek für das TacticID Mobile.



Sprengstoffbibliothek für das TacticID Mobile.



Bibliothek der chemischen Kampfstoffe (CKS) für das TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) anorganischer Stoffe und Organometalle für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Körperpflegeprodukte für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Polymere und Polymeradditive für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Farbstoffe, Pigmente und Färbemittel für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) halogenierter organischer Stoffe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Stickstoffgruppe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Sauerstoffgruppe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) organischer Stoffe der Schwefelgruppe für TacticID Mobile.



Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Pestizide für TacticID Mobile.



66079330

TacticID Mobile MCRL – Biochemikalien

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) der Biochemikalien für TacticID Mobile.



66079340

TacticID Mobile MCRL – Pharmazeutische Wirkstoffe

Umfassende Metrohm Raman-Bibliothek (MCRL) pharmazeutischer Wirkstoffe für TacticID Mobile.

