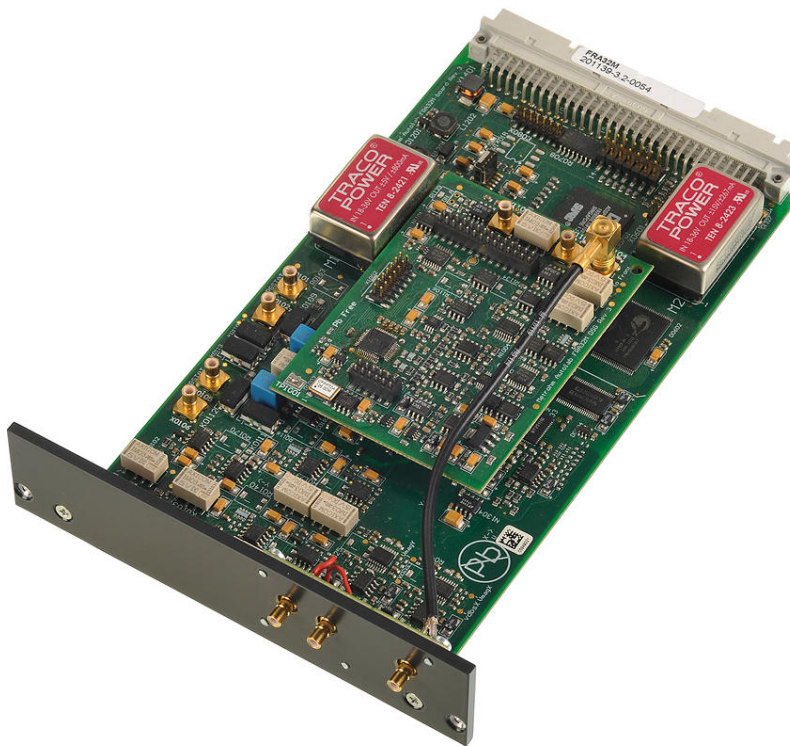




# Bipotentiostat-Modul für den Dualbetrieb

MBA.S

Das MBA.S ist ein zusätzliches Bipotentiostat-Modul, das in einen MultiBA (MBA) Autolab Potentiostat/Galvanostat installiert werden kann und das MBA-Gerät um eine zusätzliche Arbeitselektrode erweitert. In ein MBA-Gerät können maximal 5 MBA.S-Module zusammen mit einem FRA32M.S-Modul installiert werden.

## Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| RRDE.AUPT.S | Rotierende Ring-Scheibenelektrode, Goldscheibe und Platinring |

Der Elektrodentyp der rotierenden Ring-Scheibenelektrode besteht aus einer 5 mm-Goldscheibe mit einem konzentrischen Platinring in einem Abstand von 375 µm. Hierdurch wird ein theoretischer Kollektorwirkungsgrad von 24,9 % erreicht.



Der Elektrodentyp der rotierenden Ring-Scheibenelektrode besteht aus einer 5 mm-Scheibe aus Glassy Carbon mit einem konzentrischen Platinring in einem Abstand von 375  $\mu\text{m}$ . Hierdurch wird ein theoretischer Kollektorwirkungsgrad von 24,9 % erreicht.

