



778 Sample Processor (2 bombas)

2.778.0020

Procesador de muestras con una estación de trabajo y 2 bombas para el procesamiento automático de un bajo y medio número de muestras en el análisis de rutina, en combinación con Titrino o pH-/Ionmetros. Sistema compacto gracias a bomba incorporada para lavar el recipiente de valoración. Para aspirar la solución después de la valoración se puede conectar al procesador de muestras una bomba peristáltica o de membrana (como opción). Conexión directa y control de agitadores y Dosino a través de MSB. Control por regulador o software de PC *tiamo*.

Partes/accesorios 2.778.0020

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



5 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Tapón

Para cambiador de muestras



1 PCS

6.1446.160

Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo

Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.



1 PCS

6.1543.170

Punta de aspiración/Rosca M8

Punta de aspiración para los Sample Processors.



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



1 PCS

6.1805.110

Tubo de FEP / M6 / 80 cm

Con protección contra luz y doblado.



3 PCS

6.1805.420

Tubo de FEP / M6 / 48 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.510

Tubo PTFE/M8/60 cm

Con protección contra rotura.



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



1 PCS

6.1820.070

Acoplamiento 4 mm/6 mm/M8 interno

Para alargar tubos de aspirado en sistemas automatizados. Conectar el tubo de aspirado M8 directamente al tubo PTFE 6.1812.000.



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



1 PCS

6.2053.000

Sujeción de cable

Sujeción para fijar cables



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



3 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.




1 PCS


6.2751.080

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Sample Processor de una torre sin 786 Swing Head.

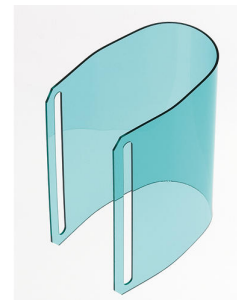

Accesorios opcionales

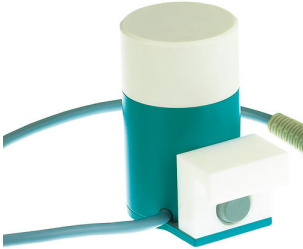Order no.	Descripción	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer Agitador magnético para cambiadores de muestras. El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras.	
2.802.0020	802 Stirrer para cambiador de muestras Agitador de varilla para cambiador de muestras y Sample Processor. Con hélice de agitador 6.1909.020 de 104 mm y cable montado fijo.	
6.1458.010	Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.	
6.1458.020	Cabezal de titulación / Conectores M10, 4 unidades Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.	

6.1458.030 Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



6.1458.040 Cabezal de titulación/3 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 120 mL. Con 3 orificios EN 14 y 4 orificios de 6,4 mm, así como 2 puntas de dosificación incl. Indicado para juego de accesorios de lavado y extracción.



6.1458.070 Cabezal de titulación/2 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.



6.2041.310 Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.320 Gradilla de muestras, 16 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

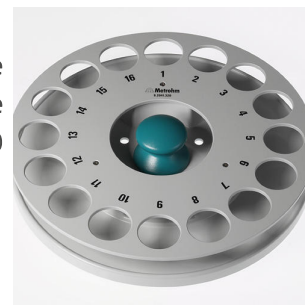

6.2041.340 Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.360 Gradilla de muestras 12 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta), 6.1459.310.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

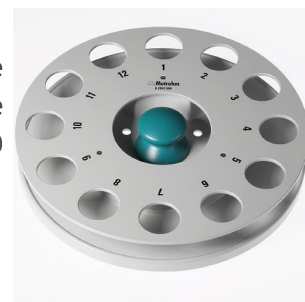

6.2041.370 Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

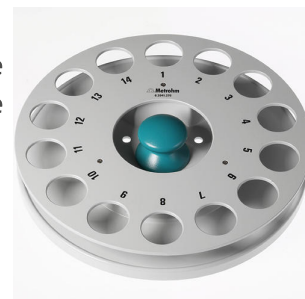

6.2041.380 Gradilla de muestras 14 x 235 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 235 mL (8 oz.).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.390 Gradilla de muestras, 16 x 100 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vasos de 100 mL, de forma baja.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.460 Gradilla de muestras, 21 x 100 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 21 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: tubos de digestión de 100 mL (CSB).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.470 Gradilla de muestras 22 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 22 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: polipropileno (PP)



6.2711.060

Bandeja de goteo para Sample Processors 778/810/814/838/858

Bandeja de goteo para 778, 810, 814, 838, 858 Sample Processors

