



Power Pack Heavy Metals (Manual)

2.797.3010

Nuestro paquete básico para la determinación de la concentración de los metales pesados críticos en el circuito agua-vapor de todo tipo de centrales eléctricas mediante voltamperometría. El sistema, que consta de un 797 VA Computrace y dos 800 Dosino, efectúa la determinación de una sola muestra de forma totalmente automática. Tras la preparación manual de las muestras se efectúa la adición de la solución auxiliar y de la solución patrón para la calibración sin intervención del usuario mediante dos sistemas de dosificación del modelo 800 Dosino.

Partes/accesorios 2.797.3010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.797.0010

797 VA Computrace para la analítica de trazas

El 797 VA Computrace es un moderno stand de medida voltamperométrico que se conecta al PC a través de un puerto USB. El software para PC suministrado con el aparato controla la medida y registra y evalúa los datos medidos. Gracias a la clara estructura del programa, el manejo es extraordinariamente sencillo. El potencióstato con galvanostato integrado garantiza la máxima sensibilidad con menos ruido.

Sistema voltamperométrico para el análisis de trazas y la enseñanza. Surtido de accesorios completo con el software de VA Computrace y todos los electrodos para un sistema de medida completo: electrodo multimodo pro (MME pro), electrodo de referencia Ag/AgCl y electrodo auxiliar de platino.



1 PCS

6.6053.030

797 VA Computrace Software CD 1.3

Software de control y evaluación para el 797 VA Computrace. Para los sistemas operativos Windows[®] 2000, Windows[®] XP Professional, Windows[®] Vista (32 bits) y Windows[®] 7 (32 bits).



1 PCS

6.1204.200

Agitador para VA Stands

Agitador para VA Stands, completo, sin metal



1 PCS

6.1226.030

Capilar de gota de mercurio (no silanizado) para MME

Capilar de gota de mercurio no silanizado (10 unidades)



1 PCS

6.1226.050

Capilar de gota de mercurio (silanizado) para MME

Capilar de gota de mercurio silanizado (10 unidades)




1 PCS

6.1244.020

Correa de accionamiento

para electrodos de disco rotatorio y agitadores en los Stands VA (3 unidades)

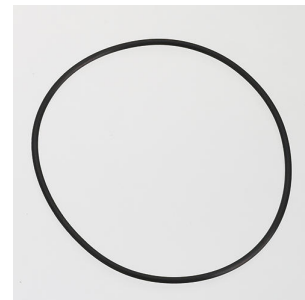

1 PCS

6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



1 PCS

6.1247.020

Agujas para MME

Agujas para Multi Mode Electrode (3 unidades).



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



7 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



2 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Botella / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior

Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



1 PCS

6.1801.080

Tubo flexible para conexión de nitrógeno

Para la alimentación de gas de aparatos voltamétricos



1 PCS

6.1805.020

Tubo de FEP / M6 / 52 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm
Con protección contra luz y doblado.



4 PCS 6.1808.000 Manguito de conexión M6



1 PCS 6.1819.010 Tubo de PTFE
En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



1 PCS 6.1824.000 Punta de microdosificación cuádruple
Con 4 x rosca M6. Para bancos de medida VA.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2055.100

Soporte de botella doble

Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de aspiración
6.5617.000



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2161.010

Bloque de alimentación con enchufe EU 230V/6V DC

Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.2406.000

Colector de mercurio

Hilo de plata (para determinación de gotitas de mercurio por amalgama)



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2703.000

Anillo de soporte para recipientes de titración



1 PCS

6.2709.080

Tapón para orificio de pipeta

Para 694, 747 VA Stand y Computrace VA



1 PCS

6.2711.030

Cubeta de retención para llenar el MME

Para 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace, así como 647, 663, 694, 747 VA Stands





Para apretar conexiones



Para diversas aplicaciones en CI y VA.



Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Electrodo de mercurio para voltamperometría. Se puede utilizar como DME, SMDE o HMDE.

