



815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/0P)

2.815.0130

Robotic USB Sample Processor XL para el tratamiento automático de una gran cantidad de muestras rutinarias en serie, así como de preparación de muestras compleja o desarrollos paralelos. Pueden conectarse un máximo de cuatro bombas (de membrana o peristálticas) y tres dosificadores para tareas de LQH.

Dadas las múltiples variantes de aplicación, la gradilla, los agitadores, el cabezal de titulación, el brazo giratorio, los Swing Head y los recipientes de muestras se deben pedir, adaptados a medida para la aplicación, por separado.

El control se efectúa de forma "independiente" mediante Touch Control. Para el control con PC se puede elegir de entre la siguiente selección de productos de software: el software de titulación tiamo™, el software de cromatografía MagIC Net, el software de voltamperometría viva, u OMNIS.

Partes/accesorios 2.815.0130

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Robotic USB Sample Processor XL para el tratamiento automático de una cantidad grande de muestras rutinarias en serie, así como de preparación de muestras compleja o desarrollos paralelos. Pueden conectarse un máximo de cuatro bombas (de membrana o peristálticas) y tres dosificadores para tareas de LQH.

Dadas las múltiples variantes de aplicación, la gradilla, los agitadores, el cabezal de titulación, el brazo giratorio, los Swing Head y los recipientes de muestras se deben realizar a la medida de la aplicación y solicitarse por separado.



Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Con protección contra luz y doblado.



Cable para Controller



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



6 PCS


6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



Cubierta de seguridad para los Sample Processor con 786 Swing Head

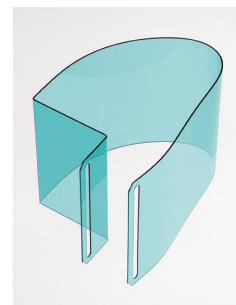

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.772.0120	772 Pump Unit – aspirate	
	Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras. La versión «Aspirar» contiene una gran variedad de accesorios para aspirar las soluciones tituladas.	
2.772.0130	772 Pump Unit – rinse	
	Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras. La versión «Limpiar» contiene una gran variedad de accesorios para limpiar.	
2.786.0010	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda	
	Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.	
2.786.0020	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la derecha	
	Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la derecha de la estación de trabajo.	

2.786.0030 786 Swing Head con brazo pivotante de valoración, hacia la derecha o la izquierda

Equipo adicional para Procesadores de muestras robóticos XL para valoración directa con recipientes de muestras de 75 mL y más grandes.



2.786.0040 786 Swing Head

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL sin cabezal de valoración o de transferencia.



2.801.0010 801 Stirrer

Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780 /781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).



2.802.0020 802 Stirrer para cambiador de muestras

Agitador de varilla para cambiador de muestras y Sample Processor.

Con hélice de agitador 6.1909.020 de 104 mm y cable montado fijo.



2.802.0040

802 Stirrer para 804 Ti Stand

Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.



2.804.0040

804 Ti Stand con soporte

Stand de valoración y regulador para el 802 Stirrer. Junto con el 802 Stirrer constituye una alternativa a los agitadores magnéticos. Stand de valoración con placa de base, barra de soporte y portaelectrodos.



2.823.0020

823 Membrane Pump Unit – aspirate

Bomba de membrana para conexión directa al procesador de muestras. La versión «Aspiración» incluye un amplio surtido de accesorios para la aspiración.



2.823.0030

823 Membrane Pump Unit – rinse

Bomba de membrana para conexión directa a procesadores de muestras. La versión «Lavado» contiene un amplio surtido de accesorios para el lavado.



2.843.0050

843 Pump Station (membrana) – lavado/aspiración para Sample Processors

La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas, que se pueden activar directamente siguiendo las instrucciones de la bomba del Sample Processor. La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios para el vaciado automático de los contenedores de titración y se requiere la limpieza de los equipos de titración. El accesorio está diseñado para la utilización con los Sample Processors 814 y 815.



2.843.0150

843 Pump Station (peristáltica) - lavado/aspiración para Sample Processors

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene dos bombas de manguera integradas, que se pueden activar directamente siguiendo las instrucciones de la bomba del Sample Processor. La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios para el vaciado automático de los contenedores de titración y se requiere la limpieza de los equipos de titración. El accesorio está diseñado para la utilización con los Sample Processors 814 y 815.



2.849.0010

849 Level Control

Equipo adicional para Sample Processors para control a distancia del estado de llenado de bidones de lavado o residuos a distancia. El 849 Level Control impide la marcha en seco de las bombas y/o el rebasamiento de los bidones. Apto para uso con soluciones acuosas, disolventes y suspensiones.



6.1458.010

Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio

Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.



6.1458.020

Cabezal de titulación / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



6.1458.030

Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



6.1458.040

Cabezal de titulación/3 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 120 mL. Con 3 orificios EN 14 y 4 orificios de 6,4 mm, así como 2 puntas de dosificación incl. Indicado para juego de accesorios de lavado y extracción.



6.1458.070

Cabezal de titulación/2 x EN 14

Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.



6.1462.030 Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head,
girando a la izquierda

Brazo giratorio de transferencia para el manejo de líquidos



6.1462.040 Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786 Swing Head,
girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



6.1462.050 Brazo giratorio con cabezal de valoración para 786 Swing Head, girando
a la izquierda o a la derecha

Cabezal de valoración para Swing Head



6.1462.060 Brazo giratorio con soporte para cabezal de valoración para 786 Swing
Head, girando a la izquierda

Soporte de cabezal de valoración para 786 Swing Head



6.1462.070 Brazo giratorio con soporte para cabezal de valoración para 786 Swing Head, girando a la derecha

Soporte de cabezal de valoración para 786 Swing Head



6.1462.080 Brazo giratorio Dis-Cover



6.1462.090 Brazo giratorio con Luer lock para 786 Swing Head, girando a la derecha

Brazo giratorio de transferencia para manejo de líquidos



6.1462.150 Brazo giratorio con cabezal de titulación y sensor vaso para 786 Swing Head, con giro a la derecha o a la izquierda

Cabezal de titulación con sensor vaso para 786 Swing Head, 2 M10, 1 SGJ 14,5 y 2 puntas de bureta



6.1462.160 Brazo giratorio con soporte para cabezal de valoración con sensor de vasos para 786 Swing Head, girando a la izquierda

Soporte de cabezal de valoración con sensor de vasos para 786 Swing Head



6.1462.170 Brazo giratorio con soporte para cabezal de valoración con sensor de vasos para 786 Swing Head, girando a la derecha

Soporte de cabezal de valoración con sensor de vasos para 786 Swing Head



6.1462.260 Brazo giratorio con soporte para cabezal de titración, giro a la izquierda, externo

Soporte para cabezal de titración para 786 Swing Head con posibilidad de girar hacia la posición exterior



6.2001.070 Consola de soporte para procesadores de muestras

Consola de soporte para procesadores de muestras para valoraciones externas y dilución (CI)



6.2041.350

Gradilla de muestras 48 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.400

Gradilla de muestras, 126 x 11 mL y 2 x 250 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 126 recipientes de muestras y 2 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y vasos de muestra: 6.2743.050, 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250, 6.2743.047, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.410

Gradilla de muestras, 141 x 11 mL y 1 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 141 recipientes de muestras y 1 botella de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.430

Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.440

Gradilla de muestras, 148 x 11 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 148 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.450

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.710

Gradilla de muestras, 160 x 6 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 160 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.800

Gradilla de muestras, 100 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 100 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.810 Gradilla de muestras, 34 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 34 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.820 Gradilla de muestras, 28 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 28 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.14332.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.830 Gradilla de muestras, 28 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 28 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.840 Gradilla de muestras, 59 x 120 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 59 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.850

Gradilla de muestras 59 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 59 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.900

Pieza insertable para gradilla de muestras, 54 x 75 mL, para baño María, (Al)

Pieza insertable para gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 54 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Material: aluminio (Al)



6.2058.020

Prolongación de cabezal de valoración 30 mm para procesadores de muestras

Prolongación de cabezal de valoración 30 mm para 789, 815 Sample Processors.



6.2058.030

Prolongación de cabezal de valoración 10 mm para procesadores de muestras

Prolongación del cabezal de valoración para el uso de gradillas para baño María.



6.2058.110

Prolongación de la torre para procesadores de muestras.

Prolongación de cabezal de valoración de 130 mm para procesadores de muestras. Prolongación de torre para aplicaciones DQO.



6.2141.300

Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor

Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor



6.2148.010

Remote Box MSB

Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.



6.2711.070

Bandeja colectora para 789, 815, 855

Bandeja colectora para 789, 815, 855 Robotic Sample Processor XL



6.2840.000

Baño María para Procesadores de muestras robóticos y Robotic Titrosampler

Baño María para Procesadores de muestras robóticos.



6.2841.000

Estación de lavado externa Polytron para aparatos Robotic Sample Processor


La estación de lavado externa puede ponerse al lado de la torre de Robotic Sample Processor y permite el lavado exterior del equipo del Polytron mientras se realizan otras acciones en la gradilla.



6.2841.010

Estación de lavado externa para brazo giratorio con cabezal de titulación 6.1458.040

La estación de lavado externa puede ponerse al lado de la torre de Robotic Sample Processor y permite el lavado exterior del equipo de titulación mientras se realizan otras acciones en la gradilla.

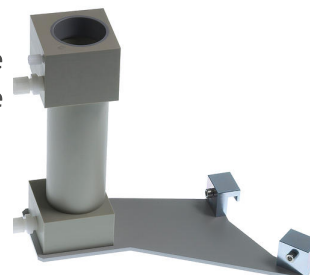

6.5619.000

Juego de accesorios de transferencia 0,5...2 mL para 789/815

Juego de accesorios completo para la transferencia de soluciones de 0,5 a 2,0 mL en el Robotic Sample Processor.



6.06000.000

Sistema de almacenamiento de software OMNIS

Programa de ordenador basado en licencias para controlar sistemas de análisis complejos de OMNIS.

- Instrucciones de trabajo, orientadas a los diferentes tipos de muestras, con numerosas plantillas
- Editor gráfico de métodos con numerosas plantillas
- Lista de muestras clara y profesional
- Gestión de aparatos, sistemas de trabajo, sensores y soluciones
- Idiomas de diálogo: alemán, inglés y chino



6.06003.010

Licencia "Stand-Alone" de OMNIS

Habilita el modo "Stand-Alone" del software OMNIS en un ordenador con Windows™.

Características:


- Se incluye una licencia de los aparatos OMNIS.
- Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.



6.2041.780

Gradilla de muestras 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 65 muestras en recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050) y 25 muestras en recipientes de muestras de 50 mL cada uno (6.02743.030)

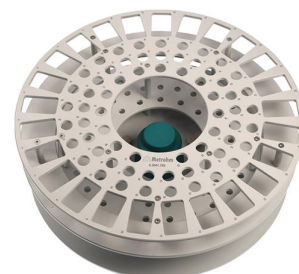

6.2041.770

Gradilla de muestras de 211 x 11 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 211 muestras en recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050)

