



815 Robotic Flexible Soliprep

2.815.2110

El sistema de preparación de muestras sólidas que deben ser homogeneizadas, filtradas y envasadas en viales cerrados.

Está compuesto por:

- 1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL
- 1 x 136 Polytron con fuente de alimentación
- 1 x 772 Pump Unit
- 1 x 786 Swing Head
- 1 x 786 Swing Head con cabezal de transferencia
- 1 x 800 Dosino

Partes/accesorios 2.815.2110

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.815.0110

815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

Robotic USB Sample Processor XL con dos estaciones de trabajo y dos bombas de membrana integradas para el tratamiento automático de una cantidad grande de muestras rutinarias en serie, así como de preparación de muestras compleja o desarrollos paralelos. Además de las bombas integradas, pueden conectarse un máximo de dos bombas más (de membrana o peristálticas) y tres dosificadores para tareas de LQH.



Dadas las múltiples variantes de aplicación, la gradilla, los agitadores, el cabezal de titulación, el brazo giratorio, los Swing Head y los recipientes de muestras se deben realizar a la medida de la aplicación y solicitarse por separado.

1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - Versión Metrohm


Homogeneizador que puede ser controlado directamente por tiamo™ o Touch Control.



1 PCS

1.136.0110

Fuente de alimentación para Polytron PT 1300 D

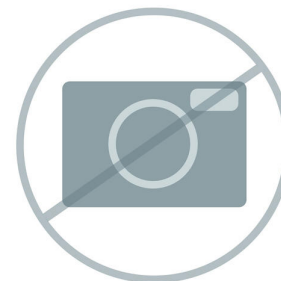

1 PCS

1.772.0110

772 Pump Unit

Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.



1 PCS

1.786.0010

786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (longitud del cable 1,5 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 1,5 m).



11 PCS

6.1432.320

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



1 PCS

6.1459.307

Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 1 unidad



1 PCS

6.1462.240

Cabezal de transferencia curvado con giro a la derecha para 786 Swing Head

Cabezal de transferencia curvado y con giro a la derecha para 786 Swing Head. El cabezal de transferencia, equipado con el adaptador 6.1808.220, se puede utilizar para soportar varias herramientas con conector Luer en gradillas múltiples.



1 PCS

6.1462.250

Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing Head

Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing head con una punta de bureta retraída para la adición de disolventes o reactivos de titración y tres toberas pulverizadoras para la limpieza. El brazo giratorio permite utilizar el Polytron para la preparación de muestras en gradillas de muestras múltiples.



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1562.130

Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL para procesadores de muestras

Tubo de transferencia para dilución de muestras y concentración con el Dosino en procesadores de muestras.



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



3 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



1 PCS

6.1625.010

Recipiente colector para Soliprep

Recipiente para la recogida segura de herramientas usadas en sistemas automatizados



2 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1805.120

Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.220

Adaptador de tubo para cabezal de transferencia

Adaptador con rosca externa M6 y conexión Luer para Cabezal de transferencia 6.1462.240 par el uso de herramientas con conexión Luer en gradillas de varias hileras.



1 PCS

6.1808.260

Distribuidor para tubos de bomba de Sample Processor

El distribuidor cuenta con una toma y cuatro roscas (M6) para conectar tubos de bomba.



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



1 PCS

6.1820.020

Adaptador M10/M6

Racor con rosca M10 para tubos 6.1812.XXX y roscas M6 para tubos 6.1805.XXX.



2 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



3 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



1 PCS

6.2037.070

Tapa con orificio para vaso de muestra de 250 mL

La tapa con orificio permite colocar los filtros acoplados en el sistema Soliprep y efectuar un lavado en la posición de vaso especial.



2 PCS

6.2053.000

Sujeción de cable

Sujeción para fijar cables



1 PCS

6.2057.150

Soporte para recipiente colector

Soporte para montaje de recipiente colector



1 PCS

6.2058.040

Reforzamiento del brazo giratorio para el 786 Swing Head

Reforzamiento del brazo giratorio para la estabilización del brazo giratorio conectado con el Swing Head 786 mediante el manejo de diferentes herramientas



1 PCS

6.2058.050

Placa de fijación para el deflector y para soporte del recipiente colector

La placa se monta en el lado de la torre del Sample Processor y permite la fijación de un disyuntor para retirar automáticamente las herramientas usadas.



1 PCS

6.2058.060

Disyuntor para el adaptador 61808220

El disyuntor se monta en el lado de la torre del Sample Processor con ayuda de la placa de fijación (6.2058.050) y permite la retirada automática de las herramientas Luerlock usadas al colector (6.1625.010)




1 PCS

6.2061.010

Soporte de botella para Dosino

Soporte de botella para hasta 2 Dosino, montado en botellas de reactivo de 1 L.

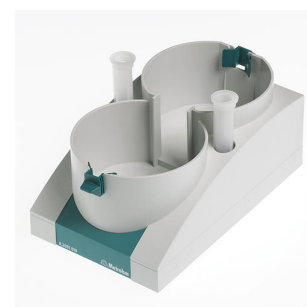

1 PCS

6.2067.000

Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL de Soliprep

Pieza para gradilla de muestras de 30 x 11 mL (6.2743.050)



1 PCS

6.2067.020

Pieza para filtro de inyección 12x30 mm para gradilla de muestras Soliprep

Pieza insertable de gradilla de muestras para 12x30 mm filtros desechables (conexión Luer)



1 PCS

6.2067.030

Insert 30x11.6 mm para gradilla de muestras Soliprep

Pieza insertable de gradilla de muestras para 30 x 11.6 mm ampollas. La parte superior para fijar las ampollas ya está montada en la gradilla de muestras Soliprep (6.2068.030).




1 PCS

6.2067.040

Pieza insertable 30 x agujas de inyección para gradilla Soliprep

Pieza insertable de gradilla de muestras para 30 x agujas de inyección (conexión Luer)

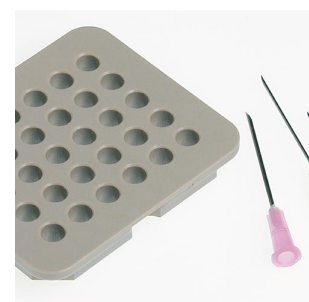

1 PCS

6.2068.030

Gradilla de muestras, 10 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 10 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



1 PCS

6.2134.110

Cable de conexión RS-232 conector DB9 – enchufe DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 (DB9) - Impresora Custom DP40. Para Titrino y 756/831 KF Coulometer. Cable de prolongación RS-232 (1:1)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.120

Llave de hexágono interior 1.5 mm



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2711.070

Bandeja colectora para 789, 815, 855

Bandeja colectora para 789, 815, 855 Robotic Sample Processor XL



Para una pulverización precisa de la solución de lavado.




200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



Cubierta de seguridad para los sistemas Robotic Soliprep Filtration y Flexible que en la torre 1 toman y expulsan diferentes herramientas como, por ejemplo, agujas de jeringas. Con esta cubierta se impide el acceso al radio de acción del brazo giratorio y, al mismo tiempo, protege contra el contacto con soluciones en caso de derrame accidental.

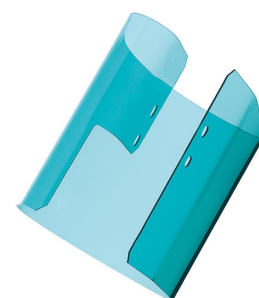

La estación de lavado externa puede ponerse al lado de la torre de Robotic Sample Processor y permite el lavado exterior del equipo del Polytron mientras se realizan otras acciones en la gradilla.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Habilita el modo "Stand-Alone" del OMNIS Software en un ordenador con Windows™.

Características:

- La licencia ya incluye dos licencias de los aparatos OMNIS.
- Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.



Programa de ordenador basado en licencias para controlar sistemas de análisis complejos de OMNIS.

- Instrucciones de trabajo, orientadas a los diferentes tipos de muestras, con numerosas plantillas
- Editor gráfico de métodos con numerosas plantillas
- Lista de muestras clara y profesional
- Gestión de aparatos, sistemas de trabajo, sensores y soluciones
- Idiomas de diálogo: alemán, inglés y chino



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.849.0010	849 Level Control Equipo adicional para Sample Processors para control a distancia del estado de llenado de bidones de lavado o residuos a distancia. El 849 Level Control impide la marcha en seco de las bombas y/o el rebasamiento de los bidones. Apto para uso con soluciones acuosas, disolventes y suspensiones.	
6.2148.010	Remote Box MSB Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.	
6.9012.000	Módulo de dispersión para Polytron, 115 mm Cabezal de dispersión estándar para Polytron 1300 D	
6.9012.010	Módulo de dispersión para Polytron, 157 mm Cabezal de dispersión especial (versión Metrohm) con cuchillas salientes	

6.2041.780

Gradilla de muestras 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 65 muestras en recipientes de muestras de 11 mL cada uno (6.2743.050) y 25 muestras en recipientes de muestras de 50 mL cada uno (6.02743.030)

