



856 Conductivity Module con Touch Control incl. celda de medida de la conductividad (acero fino)

2.856.0120

Conductímetro de gama alta basado en el 856 Conductivity Module, incluido 900 Touch Control, celda de medida de la conductividad (acero fino) y estándares de calibrado. La celda de medida de acero fino es especialmente adecuada para la medida de conductividades bajas.

El Conductivity Module tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino. En combinación con el 900 Touch Control, el 856 Conductivity Module cumple los requisitos de PCL y FDA 21 CFR part 11.

Partes/accesorios 2.856.0120

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Módulo de medición de la conductividad como ampliación de un sistema Titrande existente o autónomo en combinación con un 900 Touch Control. Con el 856 Conductivity Module se puede determinar tanto la conductividad, la temperatura como el TDS y la salinidad. Permite células de medida de la conductividad de la más moderna tecnología, las células de 5 anillos.

Gracias a la entrada de medida separada galvánicamente, es posible medir el valor de pH y la conductividad en el mismo recipiente sin perturbaciones.


El Conductivity Module tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino.

Tanto en combinación con el 900 Touch Control como a modo de aparato autónomo o conectado al *tiamo*™ full (a partir de la versión 2.0), cumple con los requisitos de PCL y FDA 21 CFR part 11.



Unidad de mando para Titrande, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución, manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexión directa a Internet e interface USB para la conexión de impresoras USB o una memoria USB.

Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés, español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.

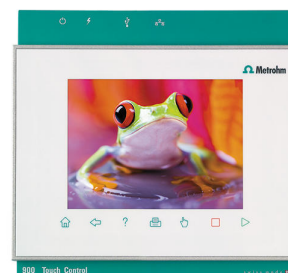

Celda de medida de la conductividad de acero fino con constante de celda $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module.

Este sensor es adecuado para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta $300 \mu\text{S/cm}$), por ejemplo, en agua desionizada o para medidas según la USP 645>.



1 PCS

6.2001.060

Consola de soporte sin barra de soporte

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrande, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2324.110

Solución patrón de conductividad 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.6064.010

Memoria USB para 900 Touch Control



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0920.100	Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo de 2 m) Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al 856 Conductivity Module en combinación con un cambiador de muestras. Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S/cm}$ hasta 20 mS/cm), por ejemplo, en: • Agua potable • Aguas superficiales • Aguas residuales	 A photograph of a conductivity cell with a green handle and a white cable.
6.0920.130	Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo de 2 m) Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al 856 Conductivity Module en combinación con un cambiador de muestras. Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S/cm}$ hasta 100 mS/cm), por ejemplo, en: • Agua potable • Aguas superficiales • Aguas residuales	 A photograph of a conductivity cell with a green handle and a white cable, similar to the one above but with a different cable length or connector.