



# 858 Professional Sample Processor CVS con Dosino para la transferencia de muestras

2.858.0120

El 858 Professional Sample Processor CVS con Dosino para la transferencia de muestras permite el procesamiento completamente automático de grandes series de muestras de aditivos orgánicos en baños galvánicos como abrillantadores y supresores mediante voltamperometría de redisolución cíclica (CVS, por sus siglas en inglés) junto con los aparatos Professional VA/CVS y el software viva. El sistema se controla directamente a través del software viva y permite el cambio automático de métodos entre las distintas clases de determinación. La gradilla de muestras suministrada tiene capacidad para 56 muestras de un máximo de 11 mL para la determinación de supresores y 28 muestras de un máximo de 50 mL para la determinación de abrillantadores. Se utiliza un Dosino para la transferencia de muestras en el vaso de medida. De este modo, se puede reducir la cantidad de muestra necesaria y medirla automáticamente.

El 858 Professional Sample Processor CVS se entrega con Dosino para la transferencia de muestras con el brazo giratorio montado, incluidos los accesorios, el Dosino, la gradilla de muestras y el cable de conexión para el montaje de un puesto completo de trabajo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.858.0120


| Qt.                                                                                                                                                                                                              | Order no.  | Descripción                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                            | 1.858.0010 | 858 Professional Sample Processor      |
| <p>El 858 Professional Sample Processor procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica del sistema 850 Professional IC o con un 800 Dosino.</p> |            |                                        |
|                                                                                                                               |            |                                        |
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                            | 1.800.0040 | 800 Dosino (longitud del cable 0,65 m) |
| <p>Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).</p>                                                                             |            |                                        |
|                                                                                                                               |            |                                        |
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                            | 6.1546.030 | Pinza del pistón                       |
| <p>Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.</p>                                                                                                                                |            |                                        |
|                                                                                                                              |            |                                        |
| 1 PCS                                                                                                                                                                                                            | 6.1602.115 | Adaptador para botella / S 40 / verde  |
| <p>Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).</p>                                                                                                                            |            |                                        |
|                                                                                                                             |            |                                        |

1 PCS

6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.

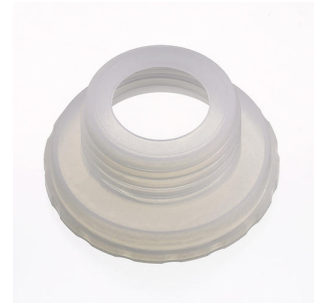

---

1 PCS

6.1803.020

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

Para todos los aparatos CI



---

1 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



---

1 PCS

6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit,  
M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con  
un tubo FEP / M6.



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



---

1 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



---

1 PCS

6.1831.020

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm

Para todos los componentes CI.



---

1 PCS

6.1835.050

Aguja de aspiración de muestras PEEK

Para cambiadores de muestras, para transferencia de grandes volúmenes de muestras, por ej. para la determinación de «brighteners».




1 PCS

6.2041.450

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

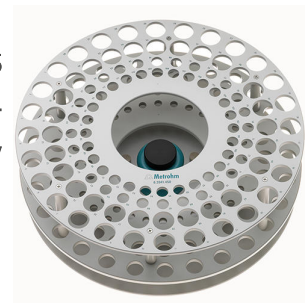

1 PCS

6.2057.040

Soporte para Dosino para el procesador de muestras

Soporte para Dosino para el 838 / 858 IC Sample Processor y para el 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



4 PCS


6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.

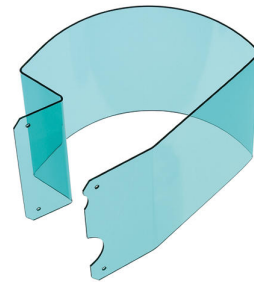

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

