



870 KF Titrino plus con impresora

2.870.1020

El 870 KF Titrino plus es un titulador KF económico para la determinación volumétrica del contenido de agua. Permite determinar de modo fiable y preciso contenidos de agua desde pocas ppm hasta el 100% en muestras sólidas, líquidas y gaseosas.

Gracias a su nueva interfaz de usuario, adaptada para facilitar el análisis de rutina, el usuario se familiarizará en muy poco tiempo con el uso del 870 Titrino plus. Su construcción robusta también lo convierte en el titulador ideal para las determinaciones de rutina.

El agitador, el recipiente de titulación, la unidad intercambiable de 10 mL, la impresora térmica USB Q3X y el electrodo están incluidos en el suministro básico.

Partes/accesorios 2.870.1020

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.870.0010

870 KF Titrino plus

El 870 KF Titrino plus es un titulador KF económico para la determinación volumétrica del contenido de agua. Permite determinar de modo fiable y preciso contenidos de agua desde pocas ppm hasta el 100% en muestras sólidas, líquidas y gaseosas.

Gracias a su nueva interfaz de usuario, adaptada para facilitar el análisis de rutina, el usuario se familiarizará en muy poco tiempo con el uso del 870 KF Titrino plus. Su construcción robusta también lo convierte en el titulador ideal para las determinaciones de rutina.

El recipiente de titulación y el electrodo están incluidos en el suministro.



1 PCS

1.803.0010

803 Ti Stand con agitador y bomba

Stand de valoración compacto con agitador magnético y bomba integrada para la adición de disolventes y la aspiración del contenido del recipiente de valoración. Apto para valoraciones Karl Fischer con Titrand. Puerto MSB.

Incluye accesorios completos, botella de disolvente y de residuos.



1 PCS

6.0338.100

Electrodo de doble hilo de platino para volumetría

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer volumétrica.



1 PCS

6.1244.040

Juego de juntas

Set de juntas para 6.1414.030. El set está compuesto por una junta y diferentes juntas tóricas.



1 PCS

6.1403.040

Tubo de adsorbedor KF

Para equipos KF. Con tapa y junta tórica.



1 PCS

6.1414.030

Parte superior del recipiente de titulación Karl Fischer
con 5 orificios

Para titulaciones Karl Fischer volumétricas.



1 PCS

6.1415.220

Recipiente de titración / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1446.060

Tapón / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Tapón/ B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.010

Septo / 12 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



1 PCS

6.1543.110

Punta de dosificación, rosca M8

Punta de transferencia, rosca M8



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



2 PCS

6.1602.105

Adaptador para botella / GL 45 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



1 PCS

6.1608.030

Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Tubo de adsorción con boquilla de tubo

Tapa con boquilla de tubo.



1 PCS

6.1623.000

Protección contra rebose del adaptador para botella

La protección contra rebose del adaptador para botella impide el rebose de la botella de residuos al utilizar la bomba de aspiración



1 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m





1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1819.030

Tubo

Para orificios roscados M8. Para adaptador para botella 6.1602.1XX E2135y botellas 6.1608.0XX



1 PCS

6.1819.050

Tubo

Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat



2 PCS

6.1903.020

Varilla de agitador / 16 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 16 mm de largo



2 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.




1 PCS

6.2001.060

Consola de soporte sin barra de soporte

Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrande, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.

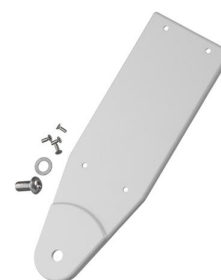

1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



1 PCS

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



1 PCS

6.2147.000

Teclado numérico USB

Teclado numérico USB para el Titrino plus, el Dosimat plus, el 862 Compact Titr sampler, el 869 Compact Sample Changer, el 863 Compact Autosampler y el 899 Coulometer. Incluye dos conectores USB integrados.



1 PCS

6.2151.100

Adaptador USB Mini (OTG) - USB A

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2412.000

Navecilla de pesada

Navecilla de pesada de vidrio para la parte superior del recipiente de titulación 6.1414.030 o para los recipientes de titulación 6.1455.31X, 6.1464.32X y 6.1465.320. Para determinaciones del contenido de agua. Con tubo de protección.



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 Llave hexagonal 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2723.310 Cubierta protectora para Titrino Plus

Cubierta protectora para pantalla y teclado para todos los aparatos de la familia Titrino plus.

Adecuado para: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus y 899 Coulometer.



2 PCS 6.2730.010 Tapa a rosca

De PP. Para septo 6.1448.010 o para fijar el tubo de secado 6.1403.040 o el electrodo 6.0338.100 en las partes superiores de los recipientes de valoración KF 6.1414.030 y 6.1414.040. Para aplicaciones KF.



1 PCS 6.2730.020 Tapón septo

Con junta tórica E.301.0041. Para septo 6.1448.010 y parte superior de recip. de titración 6.1414.030. Para aplicaciones KF.



3 PCS

6.2730.030

Tapón

Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2739.010

Llave

Para Unidades intercambiables.



1 PCS

6.2811.000

Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



1 PCS

6.3026.210

Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



4 PCS

6.9001.050

Papel térmico para Custom Neos-N / Q3X

Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X.
Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente.

1 rollo



1 PCS

1.142.0100

Impresora térmica Custom Q3X

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
2.860.0010	860 KF Thermoprep

El 860 KF Thermoprep se usa para la preparación de muestras térmica en la valoración Karl Fischer.

Muchas sustancias no son aptas para la valoración Karl Fischer directa por ser insolubles, por reaccionar con el reactivo KF o porque desprenden el agua que contienen muy lentamente o sólo a temperaturas muy elevadas. En viales de muestra cerrados herméticamente, las muestras se colocan en el horno y después se puede determinar el agua con cualquier valorador KF volumétrico o coulométrico.

