



871 Advanced Bioscan

2.871.0010

Detector amperométrico pulsado para determinaciones de alta sensibilidad de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos de azúcar, polisacáridos y otras sustancias oxidables. El 871 Advanced Bioscan amplía el sistema de cromatografía iónica de Metrohm, integrando el análisis de carbohidratos a la gama de las aplicaciones CI. El corazón del 871 Advanced Bioscan es el detector amperométrico pulsado con válvula de inyección y horno de columnas integrado. El control se hace a través del software Metrodata IC Net. Además del análisis de hidratos de carbono, el 871 Advanced Bioscan se usa para la determinación de aniones inorgánicos oxidables. Están disponibles diferentes celdas de medida, cada una de ellas con electrodo de trabajo de oro, plata, platino y carbón vitrificado.

Partes/accesorios 2.871.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.871.0010

871 Advanced Bioscan

Detector amperométrico pulsado para determinaciones de alta sensibilidad de azúcares, alcoholes de azúcar y ácidos de azúcar, polisacáridos y otras sustancias oxidables. El 871 Advanced Bioscan amplía el sistema de cromatografía iónica de Metrohm, integrando el análisis de carbohidratos a la gama de las aplicaciones CI. El corazón del 871 Advanced Bioscan es el detector amperométrico pulsado con válvula de inyección y horno de columnas integrado. El control se hace a través del software Metrodata IC Net. Además del análisis de hidratos de carbono, el 871 Advanced Bioscan se usa para la determinación de aniones inorgánicos oxidables. Están disponibles diferentes células de medida, cada una de ellas con electrodo de trabajo de oro, plata, platino y carbón vitrificado.



1 PCS

6.2156.010

Cable de registrador para Bioscan

Cable analógico Bioscan - registrador, para señal transformada (no se necesita en el sistema CI).



1 PCS

6.1816.060

Tubo de desagüe para el UV/VIS Compact IC y Bioscan

Tubo para desviar líquidos




1 PCS

6.1825.210

Bucle de muestras de PEEK 20 µL

Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK

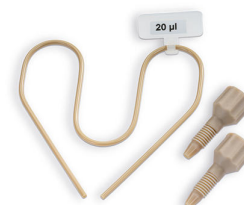

1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.2620.150

Amortiguador de impulsos (exento de metal)

Para todos los cromatógrafos iónicos



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1254.070	Celda de flujo continuo de plata para el Bioscan Celda de flujo continuo para el Bioscan, material del electrodo: plata	
6.1254.130	Celda vario de platino para Bioscan Celda de medida de platino con electrodo de trabajo recambiable.	
6.1254.140	Celda vario de plata para Bioscan Celda de medida de plata con electrodo de trabajo recambiable.	
6.1254.230	Electrodo de trabajo de platino para celda vario Electrodo de trabajo de platino para celda vario 6.1254.1X0	

6.2744.130

Tornillo de presión para celda de medida Bioscan

Para conexión de capilares de 1/16 in.



6.1803.030

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m

Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis

