



913 pH/DO Meter con maletín de accesorios

2.913.0120

Aparato de medida portátil de dos canales para realizar medidas de pH/mV y oxígeno disuelto. Este paquete contiene todo lo que necesita para comenzar al instante: aparato de medida, sensores y soluciones de calibración; todo en un robusto maletín de transporte.

- Aparato de medida portátil con batería incorporada y dos entradas de medida aisladas galvánicamente.
- Entrada de medida de pH analógica para electrodos pH estándar
- Entrada de medida digital para electrodos pH inteligentes o el Lumitrode de O₂
- Carcasa resistente, a prueba de agua y polvo (IP67) para uso intensivo en exteriores y en laboratorio
- Pantalla LCD a color con retroiluminación para facilitar la lectura de los resultados
- Interfaz USB para exportar datos fácilmente al ordenador o a la impresora
- Gran memoria interna (10 000 registros de datos)
- Modo de usuario y modo de experto protegidos por código PIN para evitar cambios no deseados en los parámetros
- Impresión y exportación de datos conforme a las PCL con identificación de usuario y marca de tiempo
- Maletín de transporte resistente para medidas rutinarias sobre el terreno

Partes/accesorios 2.913.0120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.913.0020	913 pH/DO Meter

El 913 pH/DO Meter ofrece dos entradas de medida para determinar el valor de pH y el oxígeno disuelto en el agua.



- Aparato de medida portátil con batería incorporada y dos entradas de medida aisladas galvánicamente.
- Entrada de medida de pH analógica para electrodos pH estándar
- Entrada de medida digital para la medida de O₂ usando el O₂-Lumitrode o electrodos pH inteligentes
- Carcasa resistente, a prueba de agua y polvo (IP67) para uso intensivo en exteriores y en laboratorio
- Pantalla LCD a color con retroiluminación para facilitar la lectura de los resultados
- Interfaz USB para exportar datos fácilmente al ordenador o a la impresora
- Gran memoria interna (10 000 registros de datos)
- Modo de usuario y modo de experto protegidos por código PIN para evitar cambios no deseados en los parámetros
- Impresión y exportación de datos conforme a las PCL con ID de usuario y marca de tiempo

1 PCS	6.2716.060	Maletín para 912 / 913 / 914
-------	------------	------------------------------

Maletín para los 912/913/914 pH/Conductometer.



1 PCS	6.2308.050	Electrolito 3 mol/L KCl (50 ml)
-------	------------	---------------------------------

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9



1 PCS

6.2166.100

Fuente de alimentación USB 5,25 V / 1,53 A

Fuente de alimentación USB para 912 / 913 / 914

Nivel de eficiencia VI



1 PCS

6.2151.110

Cable USB MINI (OTG) - USB A, 1.8 m

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2151.100

Adaptador USB Mini (OTG) - USB A

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2050.010

Correa para 912/913/914

Correa para 912/913/914 metros



1 PCS

6.2008.060

Soporte para depósito de conservación de electrodos

Práctico soporte para sujetar los depósitos de conservación de electrodos en los 912, 913 o 914 pH/Conductometer.



1 PCS

6.1614.000

Botella de salp./ 250 mL



1 PCS

6.1613.030

Botella / 25 mL / Label pH 4 (vacío)



1 PCS

6.1613.020

Botella / 25 mL / Label pH 7 (vacío)



2 PCS

6.1613.010

Botella / 25 mL



2 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



1 PCS

6.0228.030

Solitrode con Pt1000 (IP67, cable fijo de 1,2 m)

Electrodo pH combinado con sensor de temperatura integrado (Pt1000) y cable fijo con grado IP67 (1,2 m).

Este electrodo es apto para el uso en medidas de pH conforme a las PCL en soluciones libres de precipitados, proteínas y sulfuros. Gracias al eje de plástico robusto/irrompible de polipropileno y la protección de la membrana de vidrio contra impactos, este electrodo es mecánicamente muy resistente.

Además, este electrodo tiene un conector impermeable IP67 para uso móvil con nuestros pH-metros.

Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación.



Vaso de PP, 100 mL.



El sensor óptico para medir el oxígeno disuelto (DO) puede utilizarse con un 913 pH/DO Meter o un 914 pH/DO Conductometer. El principio de medida del sensor se basa en la extinción de la luminiscencia. El sensor, que ahorra espacio y no requiere mantenimiento, es adecuado, por ejemplo, para la medida de DO en:

- Control de calidad del agua
- Industria de aguas residuales
- Producción de bebidas
- Piscicultura

El sensor se suministra con un recipiente de calibración.

La tapa de medida (capuchón O₂), que contiene el luminóforo sensible al oxígeno, se puede reemplazar fácilmente, si es necesario.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
2.142.0100	Impresora térmica Custom Q3X Impresora compacta con interface USB para • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (cable 6.2151.140) • Eco Dosimat / Titrator • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.
2.854.0010	854 iConnect 854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).
6.2001.130	Consola de soporte para 912/913/914 Consola de soporte para covertir un 912/913/914 pH/Conductometer en un aparato de laboratorio.



6.2151.140

Cable Y USB A St - USB B St - Mini B St

Cable Y para la conexión de una impresora USB al 912 / 913 / 914 pH / Conductometer. Por medio de este cable se puede conectar al mismo tiempo una impresora y la fuente de alimentación al aparato de medida.



6.2166.500

Adaptador USB de 12 V para 912/913/914 pH/Conductometer.

Adaptador USB de 12 V para 912 / 913 / 914 pH/Conductometer



6.2325.000

juego pHit

Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso



6.2329.000

Solución patrón de oxígeno al 0%

Solución patrón de oxígeno al 0% para la calibración del Lumitrode para O_2 . Contiene 5 sobres de 30 mL cada uno.




Juego de repuesto para el O₂ Lumitrode. Este juego incluye un capuchón O₂ certificado de repuesto, un recipiente de calibración y un patrón de oxígeno de 5 x 30 mL, 0%.



Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (1,2 m, clavija de banana de 2 mm de diámetro). Este electrodo es especialmente apto:

- para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas
- para temperaturas elevadas
- para medidas de larga duración

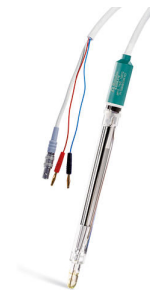


El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación.

Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol/L, almacenamiento en una solución de conservación.

Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a T>80 °C: Idrolyte, conservación en Idrolyte.

Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (1,2 m). Este electrodo es apto para las medidas de pH rutinarias en soluciones libres de precipitados, proteínas y sulfuros. Gracias al eje de plástico robusto/irrompible de polipropileno y la protección de la membrana de vidrio contra impactos, el electrodo es mecánicamente muy resistente.

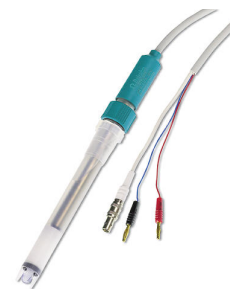

Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol/L, almacenamiento en una solución de conservación.

6.00226.600 Electrodo de inserción con Pt1000

Electrodo combinado de pH (electrolito gel) libre de mantenimiento para medidas de inserción de todo tipo (p. ej., en queso, carne, masa) con sensor de temperatura Pt1000 integrado. El electrodo se coloca en solución saturada de cloruro de potasio $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) y no es adecuado para soluciones pobres en iones. El indicador de envejecimiento advierte, ya desde una fase temprana de envejecimiento, que el electrodo debe sustituirse.



6.0224.100 Biotrode

Electrodo pH combinado para medidas en volúmenes de muestra muy pequeños ($>50 \mu\text{L}$) y muestras biológicas.

Idrolyte (6.2308.040) se utiliza como electrolito de referencia y solución de conservación.



6.2104.600 Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.



6.2313.000 Electrolito 3 mol/L KCl (1000 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



Electrodo pH combinado inteligente con chip de memoria integrado para datos del sensor y sensor de temperatura Pt1000. Este electrodo es especialmente apto:

- para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas
- para temperaturas elevadas
- para medidas de larga duración



El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación.

Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación.

Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a $T > 80 \text{ °C}$: Idrolyte, conservación en Idrolyte.

iTrodes se puede utilizar en Titrando, Ti-Touch o los 913/914-Meter.
