



NIRS XDS MasterLab Module

2.921.0310

Análisis rápidos, no destructivos, de comprimidos, cápsulas y otras formas de administración sólidas

El NIRS XDS MasterLab Analyzer permite a los productores de la industria farmacéutica realizar análisis rápidos y no destructivos de formas de administración sólidas, tales como comprimidos, cápsulas, comprimidos recubiertos, comprimidos de gelatina y cápsulas de gelatina. Con el NIRS XDS MasterLab Analyzer se pueden analizar también sólidos en viales. El análisis se realiza en el modo de reflexión o transmisión. La inyección de muestras tiene lugar mediante un carro de muestras móvil en dirección x e y que está diseñado para soportes con varios comprimidos o viales. Los análisis de las muestras individuales se optimizan mediante un adaptador Iris. Una celda de muestras disponible opcionalmente para sustancias de grano grueso amplía el análisis a prácticamente todas las formas sólidas, desde polvos finos hasta material de grano grueso, como pellets o copos.

Partes/accesorios 2.921.0310

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Análisis rápidos, no destructivos, de comprimidos, cápsulas y otras formas de administración sólidas

El NIRS XDS MasterLab Analyzer permite a los productores de la industria farmacéutica realizar análisis rápidos y no destructivos de formas de administración sólidas, tales como comprimidos, cápsulas, comprimidos recubiertos, comprimidos de gelatina y cápsulas de gelatina. Con el NIRS XDS MasterLab Analyzer se pueden analizar también sólidos en viales. El análisis se realiza en el modo de reflexión o transmisión. La inyección de muestras tiene lugar mediante un carro de muestras móvil en dirección x e y que está diseñado para soportes con varios comprimidos o viales. Los análisis de las muestras individuales se optimizan mediante un adaptador Iris. Una celda de muestras disponible opcionalmente para sustancias de grano grueso amplía el análisis a prácticamente todas las formas sólidas, desde polvos finos hasta material de grano grueso, como pellets o copos.



Adaptador Iris para la focalización de los recipientes de muestras pequeños, el patrón de reflexión, diferentes viales o un recipiente de transflexión en el NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer y NIRS XDS MultiVial Analyzer



Se precisa un patrón de reflexión para la calibración del monocromador con el módulo de muestras.

Para la fijación del patrón de calibración se utiliza un soporte en donde se posiciona el patrón.

Se precisan un patrón de reflexión y el soporte correspondiente para:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (número de pedido: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (número de pedido: 2.921.1310)




1 PCS

6.7404.000

Placa de apertura

Placa de apertura para reducir el tamaño del punto a 4,5 mm, principalmente para el análisis de comprimidos con el XDS MasterLab Analyzer.

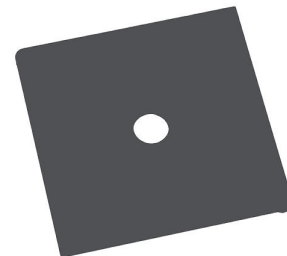

1 PCS

6.7440.580

Patrón de transmisión para MasterLab

Referencia de transmisión para la calibración del XDS MasterLabs para las medidas de transmisión.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.7402.200	Tapones de cierre para 6.7402.110 123 tapones de cierre para viales desechables de 15 mm para reflexión.	
6.7402.210	Tapones de cierre para 6.7402.120 225 tapones de cierre para viales desechables de 19 mm para reflexión.	
6.7402.220	Tapones de cierre para 6.7402.130 172 tapones de cierre para viales desechables de 22 mm para reflexión.	
6.7402.230	Tapones de cierre para 6.7402.140 216 tapones de cierre para viales desechables de 28 mm para reflexión.	

123 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 15 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



225 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 19 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



172 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 22 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



216 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 28 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para los siguientes instrumentos de análisis:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



El NIRS FlexiTray permite la máxima flexibilidad en el análisis de comprimidos y cápsulas. El mecanismo de resorte permite posicionar diferentes formas de manera reproducible, de modo que siempre se pueden garantizar resultados de medida exactos y precisos.

