



Autolab IMP

3500003360

El Autolab IMP es un potenciostato/galvanostato compacto con funcionalidad EIS incluida. Las especificaciones generales del Autolab IMP (± 10 V de tensión de conformidad/tensión medida /tensión aplicada, ± 100 mA de corriente medida/corriente aplicada, gama de frecuencias de 10 μ Hz a 1 MHz EIS e integrador analógico incluido) lo convierten en el aparato ideal para cualquier laboratorio educativo, así como para iniciar proyectos electroquímicos de cualquier tipo.

El Autolab IMP es controlado por el potente software NOVA, incluido en la entrega junto con una librería de procedimientos dedicados "EC Fundamentals" (Fundamentos de electroquímica), lo que facilita aún más el proceso educativo en el campo de la electroquímica. Dispone de entradas /salidas analógicas y digitales para controlar los accesorios y aparatos externos Autolab.

Partes/accesorios 3500003360

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

CABLE.PWR

Cable de alimentación

Cable de alimentación estándar para aparatos y accesorios de Autolab.




1 PCS

CELLCBL.M101.

Cable de celda

204

Cable de celda estándar, 1,5 m, con conexión para contraelectrodo (CE), electrodo de referencia (RE), electrodo sensor (S), electrodo de trabajo (WE) y puesta a tierra para M101/M204/PGSTAT204.

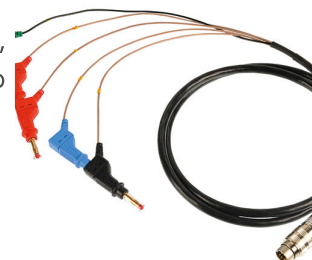


1 PCS

AUT.DUMCELL.S

Celda ficticia de Autolab

Celda ficticia para pruebas de aparatos.

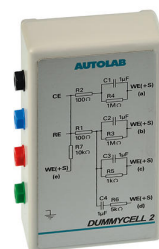

1 PCS

CBL.USB

Cable USB estándar

Cable USB estándar para aparatos de Autolab.




Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

CBL.MONIT.MAC. 204.S	Cable de monitor para M101/M204/PGSTAT204
-------------------------	---

Cable de monitor para M101/M204/PGSTAT204, con conexiones para salidas analógicas (E_{out} , i_{out} y V_{out}) y entradas (V_{in}).

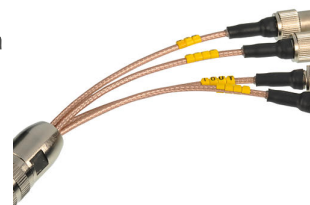

ALL.CLIP.BLACK	Pinza de cocodrilo negra
----------------	--------------------------

Pinza de cocodrilo negra para las conexiones a los electrodos de la celda electroquímica.



ALL.CLIP.RED	Pinza de cocodrilo roja
--------------	-------------------------

Pinza de cocodrilo roja para las conexiones a los electrodos de la celda electroquímica.



AUT204.CASE	Caja para el PGSTAT204
-------------	------------------------

La caja del PGSTAT204 está diseñada para guardar adecuadamente o transportar el PGSTAT204 de Autolab y sus componentes. La caja del PGSTAT204 tiene espacio suficiente para el PGSTAT204, el cable de alimentación, la celda ficticia, el cable de la celda, el cable del monitor, el manual de inicio de NOVA y el CD de instalación de NOVA.



IME663.101.S Interfaz para el Metrohm 663 VA Stand

Interfaz para el Metrohm 663 VA Stand

