



Ag-Titrode con recubrimiento de AgCl

6.00430.100CL

Electrodo de anillo de plata combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.

El anillo de plata está recubierto de cloruro (AgCl) para aumentar la sensibilidad y mejorar el límite de detección.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH constante (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Partes/accesorios 6.00430.100CL

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

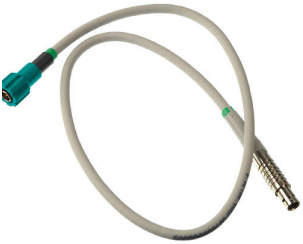
6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.02104.000	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	
6.02104.010	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	