



Ag Titrode con recubrimiento de Ag₂S

6.00430.100S

Electrodo de anillo de plata combinado con una membrana de vidrio de pH como electrodo de referencia.

El anillo de plata está recubierto de sulfuro de plata (Ag₂S) para aumentar la sensibilidad y mejorar el límite de detección.

Este electrodo no precisa mantenimiento y es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH constante (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

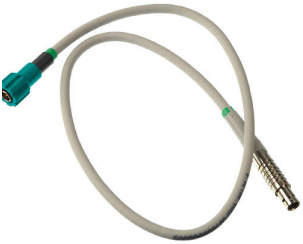
- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Este electrodo se conserva en agua destilada.

Partes/accesorios 6.00430.100S

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.
		
100 Stk	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento
		Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit. 

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.02104.000	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	
6.02104.010	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	