



Electrodo de anillo de Ag combinado

6.00450.100

Electrodo de anillo de plata combinado con un diafragma esmerilado fijo.

Este electrodo es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH variable (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

El diafragma esmerilado fijo es insensible a la contaminación y el anillo de plata refundido es resistente a los ácidos de alta concentración y soluciones salinas.

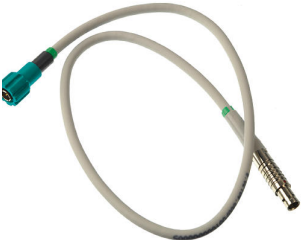
Como electrolito de referencia y para su conservación se utiliza $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Dependiendo de la aplicación, se recomienda el uso de un electrodo de anillo de Ag con recubrimiento (de AgBr-, AgCl- o Ag₂S-), que se puede incluir en el pedido.

Partes/accesorios 6.00450.100

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm Manguito EN 14/12 mm de polietileno.
		
100 Stk	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.
		

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.2310.010	Electrolito KNO₃ -1 mol/L 250 mL Solución de electrolito KNO₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)	
6.02104.000	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	
6.02104.010	Cable de electrodo con cabezal enchufable G / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un electrodo analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	