



Metrosep Carb 2 - 100/2,0

6.01090.210

La columna CI Metrosep Carb 2 - 100/2,0 es la versión microbore corta de las columnas Metrosep Carb 2 y es particularmente apta para la determinación de carbohidratos empleando eluyentes alcalinos y la detección amperométrica por impulsos. El material de la columna de intercambio de aniones de alta capacidad ha sido realizado a base de un copolímero de estireno-divinilbenceno. Es estable dentro de la gama de pH = 0-14 y separa la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Además, también es apta para el análisis de algunos alcoholes de azúcar y oligosacáridos. En la versión de 100 mm de la columna de separación Metrosep Carb 2 se pueden alcanzar tiempos cortos de análisis.

Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.01090.210

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

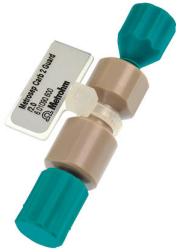
6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2,0	
	La versión microbore de la columna Metrosep Carb 2 Guard/2,0 elimina las contaminaciones con eficacia y protege así la columna de separación analítica. El diseño de esta columna de protección se ha seleccionado de manera que tenga un efecto insignificante en la separación cromatográfica.	
6.01806.000	Capilar PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m	
	Para el uso en las vías de flujo de alta presión, p. ej., como capilar de precalentamiento para las columnas Metrosep Carb 2 en una versión de 2 mm (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Columna Trap para eliminar del eluyente las contaminaciones de borato. La Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4,0 se emplea principalmente en los análisis de carbohidratos con eluyentes de hidróxido.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4,0	
	Columna Trap para eliminar trazas de carbonato en eluyentes de hidróxido.	