


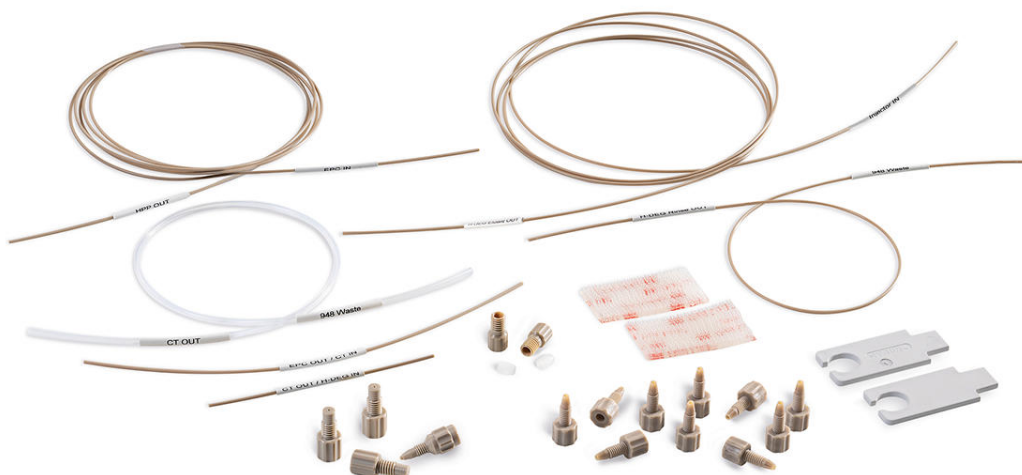

Kit de accesorios: CEP

6.05000.300

Kit de accesorios para la instalación del 948 Continuous IC Module, CEP

Partes/accesorios 6.05000.300

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.01805.470	Tubo FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 500 mm, CT OUT

Un tubo FEP que conecta la salida de la trampa aniónica continua al Waste Collector del cromatógrafo iónico.




1 PCS

6.01831.010

Capilar PEEK, 0,25 mm, HPP OUT

Un capilar PEEK que conecta la bomba de alta presión del cromatógrafo iónico con el Eluent Producer Cartridge (EPC) del 948 Continuous IC Module, CEP.

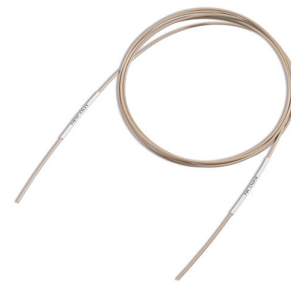

1 PCS

6.01831.020

Capilar PEEK, 0,25 mm, EPC OUT

Un capilar PEEK que conecta el Eluent Producer Cartridge (EPC) a la trampa continua (CT) del 948 Continuous IC Module, CEP.



1 PCS

6.01831.030

Capilar PEEK, 0,25 mm, CT OUT

Un capilar PEEK que conecta la trampa continua (CT) al High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP.




1 PCS

6.01831.040

Capilar PEEK, 0,25 mm, H-DEG OUT

Un capilar PEEK que conecta el High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP al inyector del cromatógrafo iónico.

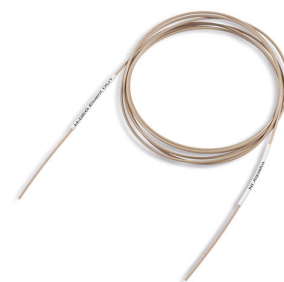

1 PCS

6.01831.050

Capilar PEEK, 0,25 mm, H-DEG Rinse

Un capilar PEEK que conecta el High-Pressure Degasser (H-DEG) del 948 Continuous IC Module, CEP al Waste Collector del cromatógrafo iónico.



1 PCS

6.2053.030

Cinta de sujeción para 6.2744.340, 25 x 50 mm

Cinta de sujeción para juego de accesorios CI para gradiente Dosino



2 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)

