



Actualización de OMNIS Sample Robot S-M WSM

6.05800.600

Este set contiene todos los componentes necesarios para la actualización de un OMNIS Sample Robot WSM existente, del tamaño S al tamaño M. Además de las subestructuras modulares y de gradilla requeridas, se incluyen todos los cables, tornillos, extensiones de brazos y la licencia funcional necesarios. El set incluye también un canal de descarga para el OMNIS Sample Robot M o L.

Partes/accesorios 6.05800.600

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

El canal de descarga se monta detrás de los puestos de trabajo del OMNIS Sample Robot WSM M o L y recoge en caso de fallo la solución que rebose para conducirla, con seguridad y sin contacto, a un recipiente de residuos a través de un tubo flexible.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)	
	Módulo para el montaje en el OMNIS Sample Robot WSM. Este módulo contiene un puesto de trabajo para el tratamiento automático de recipientes de muestras sin bombas. El puesto de trabajo recoge el vaso de muestra para el análisis. Entre análisis, los sensores empleados pueden limpiarse o depositarse en el vaso de almacenamiento del puesto de trabajo. Si el análisis requiere agitación, se puede utilizar un agitador de varilla separado o un agitador magnético para este puesto de trabajo.	
2.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)	
	Módulo para el montaje en el OMNIS Sample Robot WSM. Este módulo contiene un puesto de trabajo para el tratamiento automático de recipientes de muestras y dos bombas para la limpieza automática (lavado y extracción) de recipientes de muestras y sensores. El puesto de trabajo recoge el vaso de muestra para el análisis. Entre análisis, los sensores empleados pueden limpiarse o depositarse en el vaso de almacenamiento del puesto de trabajo. Si el análisis requiere agitación, se puede incorporar un agitador de varilla separado o un agitador magnético para este puesto de trabajo.	
2.1024.0030	OMNIS Workstation Module (2T/4P)	
	Módulo para el montaje en el OMNIS Sample Robot WSM. Este módulo contiene dos puestos de trabajo para el tratamiento automático de recipientes de muestras y cuatro bombas para la limpieza automática (lavado y extracción) de recipientes de muestras y sensores en ambos puestos de trabajo, que recogen el vaso de muestra para el análisis. Entre análisis, los sensores empleados pueden limpiarse o depositarse en el vaso de almacenamiento del puesto de trabajo. Si el análisis requiere agitación, se puede incorporar un agitador de varilla separado o un agitador magnético para cada puesto de trabajo.	

6.02041.010 Gradilla de muestras OMNIS, 9 x 250 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 9 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.


Plástico: polipropileno (PP)



6.02041.020 Gradilla de muestras OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 9 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: polipropileno (PP)

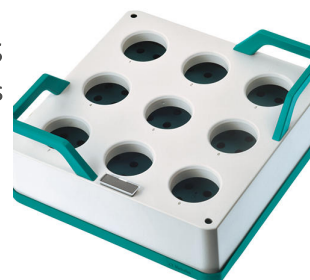

6.02041.030 Gradilla de muestras OMNIS, 16 x 120 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Plástico: polipropileno (PP)



6.02041.040 Gradilla de muestras OMNIS, 25 x 75 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 25 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Plástico: polipropileno (PP)



6.02041.050

Gradilla de muestras OMNIS, 9 x 150 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 9 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta y sin pico vertedor).

Plástico: polipropileno (PP)

