



Juego de accesorios CI: MiPuT

6.5330.170

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para Pick-up de muestras (técnica de inyección inteligente Pick up de Metrohm).

Partes/accesorios 6.5330.170

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

La columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones iónicas, es decir, para extraer contaminaciones aniónicas y catiónicas de soluciones acuosas. Su utilización se recomienda sobre todo en relación con "MISP", la "Metrohm Inline Sample Preparation", para limpiar el agua de transferencia. Utilizando la columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se pueden evitar las influencias del agua de transferencia en el ensayo en blanco del sistema.



1 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.

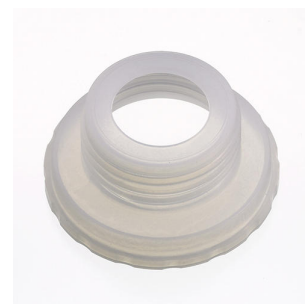

1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1808.090 Adaptador de rosca M8 exterior / M6 interior

Rosca M8 exterior, M6 interior, Por ej. para el montaje de los tubos de aire 6.2418.XXX en el recipiente de reactivo 6.1429.XXX del aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS 6.1819.110 Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 PCS 6.1825.290 Loop de muestra PEEK 250 µL

Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) y para PILS (particle into liquied sampler). Con 2 tornillos de presión PEEK.



1 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.1841.000

Capilar de transferencia PEEK 2 mL, 5 m




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.

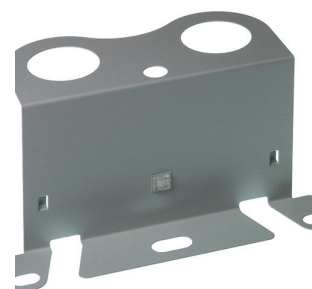

1 PCS

6.2624.100

Aguja «pick-up» MF

Aguja revestida de acero para el modo «pick-up» sin metal y para recipientes de muestras Eppendorf.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



1 PCS

6.2833.010

Soporte aguja/cánula 1/16 in

Para procesadores de muestras CI. Para cánulas de 1/16 in.



1 PCS

6.2841.120

Estación LQH, izquierda

Estación combinada de lavado y dilución para cambiadores de muestras con Swing Head. Para montar al lado izquierdo de la torre.



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL sin accesorios

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.9920.231

Placa de retención para gradilla de muestras 159 x 2 mL + 3 x 300 mL

Placa para retirar la tapa del recipiente en el Professional IC Sample Processor. Para recipientes de muestras de 2 mL.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit

