



Equipo de electrodos VA con scTRACE Gold para aparatos VA Computrace

6.5340.000

Juego completo de accesorios para la determinación de arsénico o mercurio con scTRACE Gold. Incluye un portaelectrodos, scTRACE Gold (4 unidades), vaso de medida, agitador y otros accesorios.

Partes/accesorios 6.5340.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1204.200	Agitador para VA Stands
		Agitador para VA Stands, completo, sin metal



1 PCS

6.1241.080

Mango de electrodo para el scTRACE Gold

Soporte para el scTRACE Gold con contactos enchufables para conectar cables de electrodo para electrodos de trabajo, de referencia y auxiliares. El mango de electrodo junto con el scTRACE Gold 6.1258.000 constituye un sensor completo para voltamperometría y su utilización en aparatos Professional VA. Se necesitan tres adaptadores 6.2112.130 para su uso en soportes VA y sistemas VA Computrace. El scTRACE Gold simplemente debe insertarse en el mango. Mientras que el scTRACE Gold es sustituido en intervalos periódicos, el mango de electrodo puede ser reutilizado.




1 PCS

6.1244.020

Correa de accionamiento

para electrodos de disco rotatorio y agitadores en los Stands VA (3 unidades)

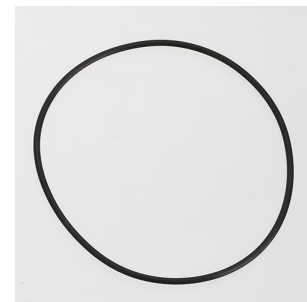

1 PCS

6.1258.000

scTRACE Gold (juego de 4 unidades)

Electrodo con microalambre de oro sobre una base de capa gruesa para la determinación del contenido de arsénico en aguas. El scTRACE Gold es un sensor voltamétrico combinado para la voltametría. El electrodo de trabajo con microalambre de oro, el electrodo de referencia Ag/AgCl y el electrodo auxiliar de carbono se encuentran en un sensor. Fácil de manejar y en su mayor parte no precisa de mantenimiento, con el scTRACE Gold se puede determinar, por ejemplo, el contenido de arsénico en agua en el rango de trazas. Junto con el mango de electrodo 6.1241.080, se puede utilizar en cada stand de medida de voltametría de Metrohm.



1 PCS

6.1415.150

Recipiente de titración / 5-70 mL



1 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



1 PCS

6.1808.000

Manguito de conexión M6



3 PCS

6.2112.130

Adaptador contacto enchufable 5,5 mm / contacto
roscado, dorado

Para electrodos VA



1 PCS

6.2753.210

Tapa

Para el separador de aceite 6.2753.200 y para las aplicaciones con el
scTRACE Gold.

