


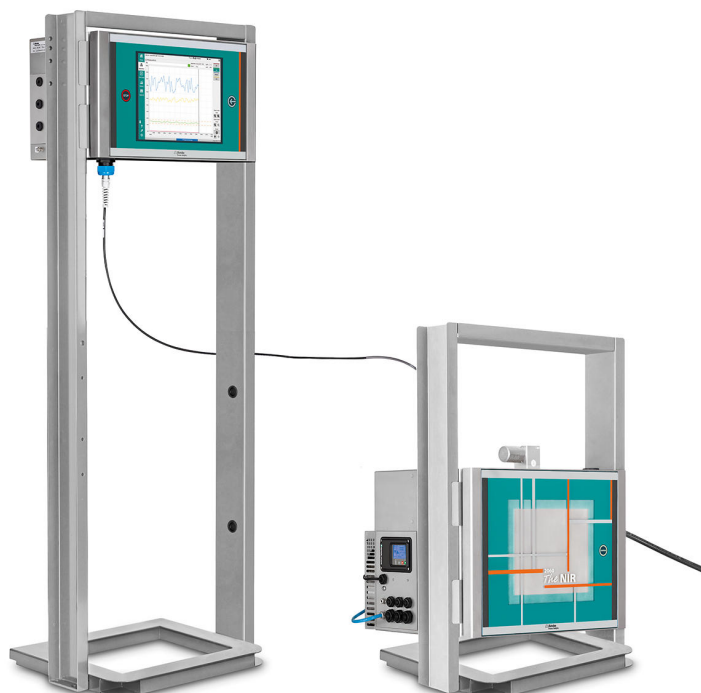

2060 The NIR-REx Analyzer

A472060040C

El 2060 *The* NIR-REx Analyzer es la siguiente generación de instrumentos de espectroscopía de procesos de Metrohm Process Analytics. Con su diseño único y probado de dentro afuera, ofrece resultados precisos cada *10 segundos*. Puede proporcionar un análisis no destructivo de líquidos y sólidos directamente en la línea de proceso o en un recipiente de reacción mediante el uso de fibra óptica y sondas de contacto. Ha sido diseñado para conectar hasta cinco (5) sondas y/o celdas de flujo. Los cinco canales se pueden configurar independientemente unos de otros utilizando nuestro versátil software propio integrado.

Como parte del 2060 Platform, el 2060 *The* NIR-REx Analyzer permite la separación única de la interfaz humana (IH) y el armario NIR mediante fibras ópticas. Esta configuración remota permite la colocación de ambos armarios en diferentes lugares de la planta en función de las preferencias del cliente y las clasificaciones de secciones.


Además, este instrumento de análisis cuenta con la certificación IECEx y cumple con las directivas ATEX de la UE. Ha sido diseñado con un sistema aprobado de purga/presurización junto con dispositivos electrónicos intrínsecamente seguros, que evitan que cualquier humo o gas

potencialmente explosivo procedente del aire ambiente entre en la envoltura del instrumento de análisis. Además, está disponible en otras tres versiones: 2060 *The NIR Analyzer*, 2060 *The NIR-R Analyzer*, y 2060 *The NIR-REx Analyzer*.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
A472060020C	2060 The NIR Analyzer	
	El 2060 <i>The NIR Analyzer</i> es la siguiente generación de instrumentos de espectroscopía de procesos de Metrohm Process Analytics. Con su diseño único y probado de dentro afuera, ofrece resultados precisos cada <i>10 segundos</i>. Puede proporcionar un análisis no destructivo de líquidos y sólidos directamente en la línea de proceso o en un recipiente de reacción mediante el uso de fibra óptica y sondas de contacto. Ha sido diseñado para conectar hasta cinco (5) sondas y/o celdas de flujo. Los cinco canales se pueden configurar independientemente unos de otros utilizando nuestro versátil software propio integrado. Como parte del 2060 Platform, el 2060 <i>The NIR Analyzer</i> cuenta con un concepto modular y está disponible en otras tres versiones: 2060 <i>The NIR-R Analyzer</i>, 2060 <i>The NIR-Ex Analyzer</i> y 2060 <i>The NIR-REx Analyzer</i>.	
A472060030C	2060 The NIR-Ex Analyzer	
	El 2060 <i>The NIR-Ex Analyzer</i> es la siguiente generación de instrumentos de espectroscopía de procesos de Metrohm Process Analytics. Con su diseño único y probado de dentro afuera, ofrece resultados precisos cada <i>10 segundos</i>. Puede proporcionar un análisis no destructivo de líquidos y sólidos directamente en la línea de proceso o en un recipiente de reacción mediante el uso de fibra óptica y sondas de contacto. Ha sido diseñado para conectar hasta cinco (5) sondas y/o celdas de flujo. Los cinco canales se pueden configurar independientemente unos de otros utilizando nuestro versátil software propio integrado. Además, este instrumento de análisis cuenta con la certificación IECEx y cumple con las directivas ATEX de la UE. Ha sido diseñado con un sistema aprobado de purga/presurización junto con dispositivos electrónicos intrínsecamente seguros, que evitan que cualquier humo o gas potencialmente explosivo procedente del aire ambiente entre en la envoltura del instrumento de análisis. Además, está disponible en otras tres versiones: 2060 <i>The NIR Analyzer</i>, 2060 <i>The NIR-R Analyzer</i>, y 2060 <i>The NIR-REx Analyzer</i>.	

El 2060 *The NIR-R Analyzer* es la siguiente generación de instrumentos de espectroscopía de procesos de Metrohm Process Analytics. Con su diseño único y probado de dentro afuera, ofrece resultados precisos cada *10 segundos*. Puede proporcionar un análisis no destructivo de líquidos y sólidos directamente en la línea de proceso o en un recipiente de reacción mediante el uso de fibra óptica y sondas de contacto. Ha sido diseñado para conectar hasta cinco (5) sondas y/o celdas de flujo. Los cinco canales se pueden configurar independientemente unos de otros utilizando nuestro versátil software propietario integrado.

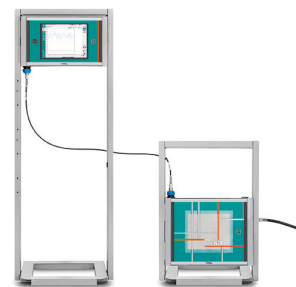

Como parte del 2060 Platform, el 2060 *The NIR-R Analyzer* permite la separación única de la interfaz humana (IH) y el armario NIR mediante fibras ópticas. Esta configuración remota permite la colocación de ambos armarios en diferentes lugares de la planta en función de las preferencias del cliente y las clasificaciones de secciones. Además, está disponible en otras tres versiones: 2060 *The NIR Analyzer*, 2060 *The NIR-Ex Analyzer* y 2060 *The NIR-REx Analyzer*.

Lámpara de repuesto para el 2060 *The NIR Analyzer* y OMNIS NIR Analyzer con contador de horas integrado.

