



TacticID Mobile

BWT-840001195

El TacticID® Mobile es un espectrómetro Raman de mano económico y ergonómico de 1064 nm con librerías específicas para la identificación rápida y no destructiva de narcóticos, productos químicos peligrosos y materiales sospechosos. Al estar diseñado para que el personal de seguridad lo pueda utilizar fácilmente sobre el terreno, las muestras se pueden analizar rápida y directamente a través de envases transparentes, y los resultados de la identificación se muestran claramente en la gran pantalla táctil de brillo intenso y alta resolución.

El TacticID Mobile utiliza la espectroscopía Raman para medir la huella molecular de una muestra que se identifica con bibliotecas de espectros incorporadas que incluyen narcóticos, precursores, sustancias químicas tóxicas y comunes, fármacos y explosivos, entre otros. Con la identificación en el punto de necesidad, los equipos de respuesta rápida obtienen una identificación de muestra procesable en menos de un minuto, acompañada de información de seguridad (SGA y NFPA 704), lo que permite una respuesta rápida con mayor certeza.

Con el láser de excitación de 1064 nm del TacticID Mobile, los usuarios pueden identificar muestras de calle difíciles, muestras de color y muestras impuras con una mínima interferencia de fluorescencia. El sistema se puede manejar con la pantalla táctil y la interfaz de botones duros, por lo que es posible usarlo incluso si se lleva puesto un equipo de protección. Tiene un diseño compacto con protección de goma IP68 resistente, que supera el ensayo de caídas y cumple la norma MIL-STD-810H.

Se puede añadir información adicional con cada escaneo, incluidas imágenes, marcas de localización, notas y otra información de identificación, proporcionando un informe completo con toda la información relevante en un solo documento. También se dispone de librerías creadas por el usuario y opciones de personalización.

Partes/accesorios BWT-840001195

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	BWT-840000342	Adaptador de ángulo recto
Adaptador de ángulo recto para efectuar medidas manos libres al utilizar aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.		
		
1 PCS	BWT-840000343	Accesorio lente
Accesorio lente para aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.		
		
1 PCS	BWT-840000344	Adaptador para soporte de frascos
Adaptador para soporte de frascos, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.		
		

1 PCS

BWT-840000345 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella

Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella.

NR2-BSA



1 PCS

BWT-840000348 Tapa de validación de poliestireno


Tapa de validación de poliestireno con poliestireno incorporado según la norma ASTM.



1 PCS

BWT-840000353 Tapa protectora para el eje

Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.

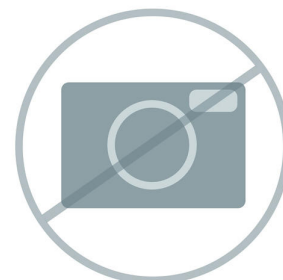

1 PCS

BWT-840000354 Bolsa para adaptadores (NR2-PCH-ADPT)

Bolsa para adaptadores Raman portátiles, compatible con NanoRam-1064, TacticID-N Plus y TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



1 PCS

BWT-840000419 Lápiz/bolígrafo para TacticID

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil (paquete de 5 unidades).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000912 Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles

Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles (solo para el eje).

Este kit incluye: 15 juntas tóricas n.º 1 con diámetro interior de 9,00 mm y 15 juntas tóricas n.º 2 con diámetro interior de 10,00 mm (TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064).

TID-ORK




1 PCS

BWT-840001191 Cable USB de tipo C a tipo A

Cable USB de tipo C a tipo A. Compatible con el TacticID Mobile.

HHX-USB

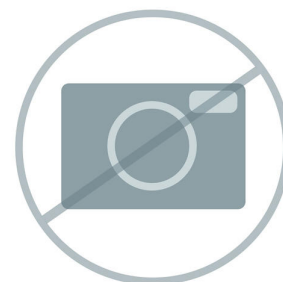


1 PCS

BWT-840001192 Adaptador de corriente para TacticID Mobile con conectores internacionales

Adaptador de corriente 15 V 3,6 A CC. Incluye conectores para EE. UU., UE, Reino Unido y Australia. Compatible con el TacticID Mobile.


HHX-PWA

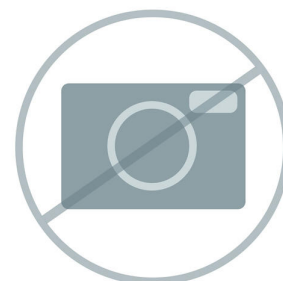

1 PCS

BWT-840001252 Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos y productos químicos en general

Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos, incluidas drogas, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.

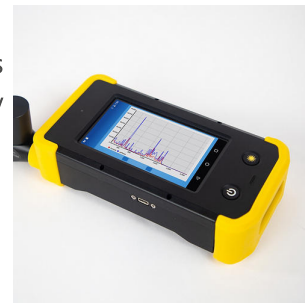


1 PCS


BWT-840001193 Unidad USB que contiene los manuales del producto TacticID Mobile

Unidad USB que contiene el manual del producto TacticID Mobile; incluye tanto el conector USB tipo A como el conector USB tipo C, y puede usarse para funciones de conexión sobre la marcha (OTG).

HHX-USB-OTG

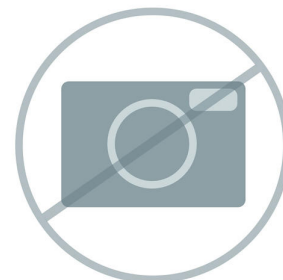

Accesorios opcionales

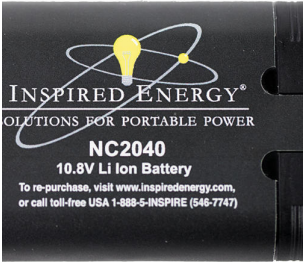Order no.	Descripción	
BWT-840000403	Batería recargable de iones de litio de 10,8 V	
	Batería recargable de iones de litio: puede usarse perfectamente con TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064.	
	TID-BAT	
BWT-840000428	Enrutador WLAN	
	Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.	
BWT-840000949	Adaptador de punto grande	
	El adaptador de punto grande para la toma de muestras está diseñado para su uso con los sistemas Raman de mano de Metrohm; este adaptador proporciona un mayor tamaño de punto y una mayor profundidad de muestreo para reducir al mínimo el riesgo de que se quemen las muestras, en particular las muestras sensibles o las de color oscuro. Además, este adaptador admite la vista a través, si se usa con dispositivos compatibles con el software correspondiente.	
	TID-STA	
BWT-840000969	Sonda de inmersión Raman 1064 portátil	
	Accesorio de espectrómetro 1064 Raman portátil: sonda de inmersión de contacto, longitud de 6 pulg., distancia de trabajo de aprox. 1 mm, presión de servicio de hasta 2 bar a temperatura ambiente.	
	NRX-CTP-IMP	

BWT-840000970 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de trabajo de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840001154 Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.


TID-SBG



BWT-840001184 Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 compuestos para el TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 espectros de productos químicos comunes, narcóticos, disolventes y plásticos. Incluye información de seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Para el uso con el TacticID Mobile.


TDL-XM-CNSP

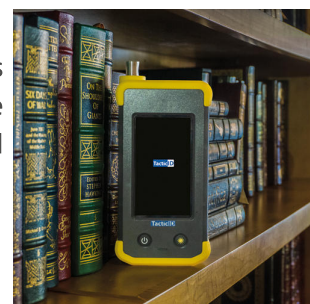

BWT-840001194 Batería externa para el TacticID Mobile

Batería externa para el TacticID Mobile. Compatible con la unidad TacticID Mobile y con el adaptador de corriente del TacticID Mobile para poder cargarlo.


HHX-PWB

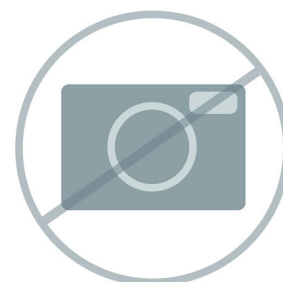

BWT-840001223 Cargador de coche USB-C para TacticID Mobile


Cargador de coche USB-C para TacticID Mobile. Incluye un cable USB-C dedicado para una carga rápida dentro de un vehículo.

Modelo HHX-CCA

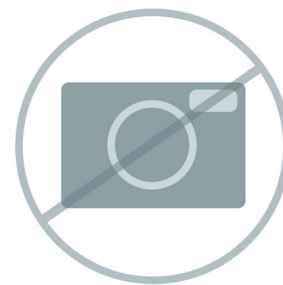

BWT-840001252 Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos y productos químicos en general

Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos, incluidas drogas, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.

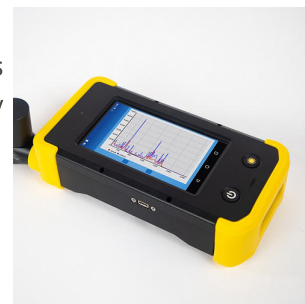

BWT-840001266 Librería Raman completa para TacticID Mobile


Librería Raman completa de Metrohm para TacticID Mobile: más de 29'000 entradas de espectros de productos químicos, minerales, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos.

TDL-XM-MCRL



BWT-840001323 Librería de minerales para TacticID Mobile

Librería de minerales de Metrohm para TacticID Mobile.

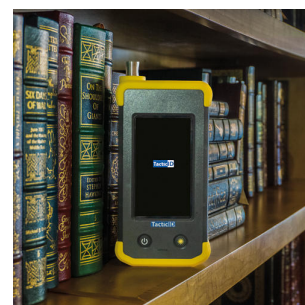

BWT-840001226 Librería de explosivos para TacticID Mobile

Librería de explosivos para TacticID Mobile.



BWT-840001190 Librería de CWA para TacticID Mobile

Librería de agentes de guerra química (CWA) para TacticID Mobile.



BWT-840001294 Librería MCRL de inorgánicos y organometálicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de inorgánicos y organometálicos para TacticID Mobile.



BWT-840001302 Librería MCRL de productos de cuidado personal para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para TacticID Mobile.



BWT-840001306 Librería MCRL de polímeros y aditivos de polímeros para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para TacticID Mobile.



BWT-840001310 Librería MCRL de colorantes, pigmentos y tintes para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para TacticID Mobile.



BWT-840001298 Librería MCRL de orgánicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos para TacticID Mobile.



BWT-840001319 Librería MCRL de orgánicos – halogenados para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para TacticID Mobile.



BWT-840001320 Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID Mobile.



BWT-840001321 Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID Mobile.



BWT-840001322 Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para TacticID Mobile.



66079320 Librería MCRL de pesticidas para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para TacticID Mobile.



66079330

Librería MCRL de bioquímicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para TacticID Mobile.



66079340

Librería MCRL de API para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para TacticID Mobile.

