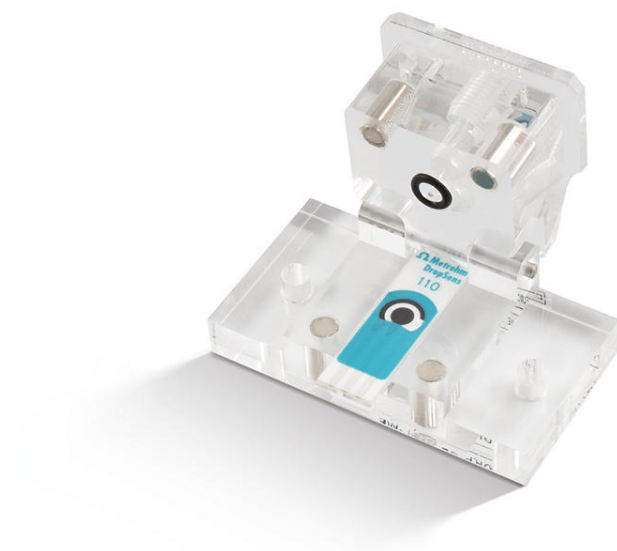




Celda de flujo (solo electrodo de trabajo)

DRP-CFLWCL-WE

Celda de flujo de tipo thin-layer de metacrilato para análisis FIA. Su junta tórica solo atrapa el electrodo de trabajo. Apta para el uso con electrodos serigrafiados estándar con la celda electroquímica en el centro de la tira. Sistema de cierre con potentes imanes. Accesorios de montaje incluidos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-110CNT-U50	Electrodo serigrafiado de carbono modificado con nanotubos de carbono multipared
	Electrodo serigrafiado de carbono modificado con nanotubos de carbono multipared. Diseñado para el desarrollo de (bio)sensores con una superficie activa electroquímica ampliada.



DRP-CAC

Conector de cable para electrodos serigrafiados

Conecta electrodos serigrafiados DropSens a cualquier tipo de potencióstato. Recomendado para trabajar con análisis en flujo o en estático.



DRP-250BT-U75

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT. Apto para el uso con microvolúmenes, para ensayos descentralizados o para desarrollar sensores específicos.



DRP-CAST

Conector de cable μ Stat para electrodos serigrafiados

Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.

