



Sonda Raman 638


DRP-RAMANPROBE638

Sonda de reflexión diseñada para su uso con una sola excitación de 638 nm de longitud de onda (hasta 300 mW). Adecuada para trabajar con celdas Raman de DropSens para electrodos serigrafiados (ref. RAMANCELL), celda Raman para electrodos convencionales (ref. RAMANCELL-C) o cualquier configuración Raman convencional.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-RAMANCELL-C	Celda espectroelectroquímica Raman para electrodos convencionales

Celda fabricada en PEEK para medidas espectroelectroquímicas. Diseñada para el uso con la sonda Raman, ref. RAMANPROBE, y electrodos convencionales de Metrohm.

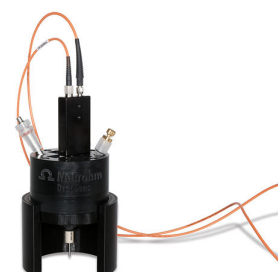

DRP-
SPELECRAMAN638

Aparato Raman espectroelectroquímico (láser de 638 nm)

SPELECRAMAN638 es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman. Combina en un solo instrumento un láser de clase 3B ($638\text{ nm} \pm 0,5$), un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitudes de onda de 640-885 nm y desplazamiento Raman 50-4370 cm^{-1}) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.



DRP-RAMANCELL Celda Raman para electrodos serigrafiados

Celda de reflexión de teflón negro para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman con electrodos serigrafiados en combinación con sonda Raman, ref. RAMANPROBE.

