


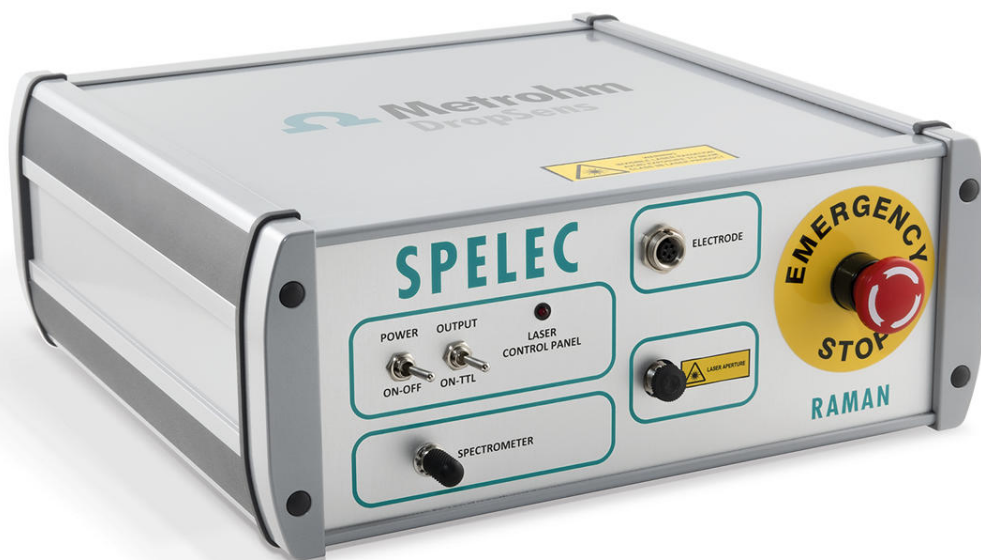

Aparato Raman espectroelectroquímico (láser de 532 nm)

DRP-SPELECRAMAN532

SPELECRAMAN532 es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman. Combina en un solo instrumento un láser de clase 3B (532 nm $\pm$ 0,5), un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitudes de onda de 534-700 nm y desplazamiento Raman 75-4520 cm⁻¹) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.

Partes/accesorios DRP-SPELECRAMAN532

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

DropView SPELEC es un software espectroelectroquímico que controla el instrumento SPELEC y ofrece una sincronización perfecta de las medidas ópticas y electroquímicas, así como herramientas avanzadas para el tratamiento de los datos.




Sonda de reflexión diseñada para su uso con una sola excitación de 785 nm de longitud de onda (hasta 500 mW). Adecuada para trabajar con celda Raman de DropSens para electrodos serigrafiados o con cualquier configuración Raman convencional.



Conecta los nodos individuales del μ Stat 8000(P)/4000(P) a electrodos convencionales.



Accesorios opcionales

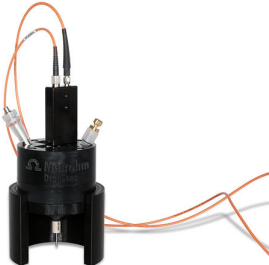Order no.	Descripción	
DRP-RAMANCELL	Celda Raman para electrodos serigrafiados	
	Celda de reflexión de teflón negro para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman con electrodos serigrafiados en combinación con sonda Raman, ref. RAMANPROBE.	
DRP-RAMANCELL-C	Celda espectroelectroquímica Raman para electrodos convencionales	
	Celda fabricada en PEEK para medidas espectroelectroquímicas. Diseñada para el uso con la sonda Raman, ref. RAMANPROBE, y electrodos convencionales de Metrohm.	