



797 VA Computrace automatizado para la CVS

MVA-13

El MVA-13 es un sistema analítico para la determinación automática del contenido de aditivos orgánicos en series de muestras de baños galvánicos con la técnica CVS («voltamperometría de redisolución cíclica») en las tareas rutinarias de laboratorio. Con el 838 Advanced VA Sample Processor, se puede examinar el contenido de supresores de hasta 56 muestras. En la determinación de abrillantadores, se pueden analizar automáticamente hasta 28 muestras. La posibilidad de recalibrar los métodos durante una serie de muestras garantiza la mayor precisión. Se compone del 797 VA Computrace para la CVS, 838 Advanced VA Sample Processor, tres 800 Dosino y equipo de lavado.

El sistema se suministra con todos los accesorios para crear el puesto de medida completo, incluido el software VA Computrace y los electrodos: electrodo de disco rotatorio de platino (RDE), electrodo de referencia Ag/AgCl y electrodo auxiliar de platino.

Partes/accesorios MVA-13

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

3 PCS

2.800.0010

800 Dosino

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm).



1 PCS

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station para los sistemas compactos VA

La 843 Membrane Pump Station tiene dos bombas de membrana incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace.

La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.



2 PCS

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



2 PCS 6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior aGL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



1 PCS 6.1805.020 Tubo de FEP / M6 / 52 cm
Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm
Con protección contra luz y doblado.



3 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m
Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA




1 PCS

6.2055.100

Soporte de botella doble

Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de aspiración
6.5617.000

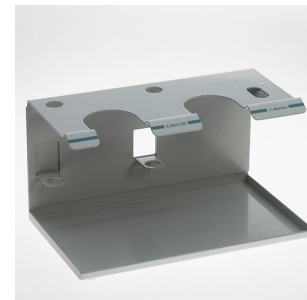

3 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



1 PCS


6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

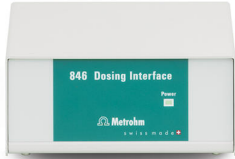Order no.	Descripción	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	Unidad de control USB para la conexión de un máximo de cuatro 800 Dosino u 805 Dosimat para tareas de dosificación y Liquid Handling. Para el manejo se necesita un Touch Control o una conexión a un ordenador con OMNIS Software, tiamo™, MagIC Net, viva o 797 VA Computrace.	
6.1204.170	Punta de electrodo de platino de 3 mm para CVS	
	Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 3 mm, superficie pulida, rosca M3. Rango de temperatura: 0 ...40 °C.	
6.1204.190	Punta de electrodo de platino de 1 mm para CVS	
	Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 1 mm $\pm 0,02$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,2 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.	