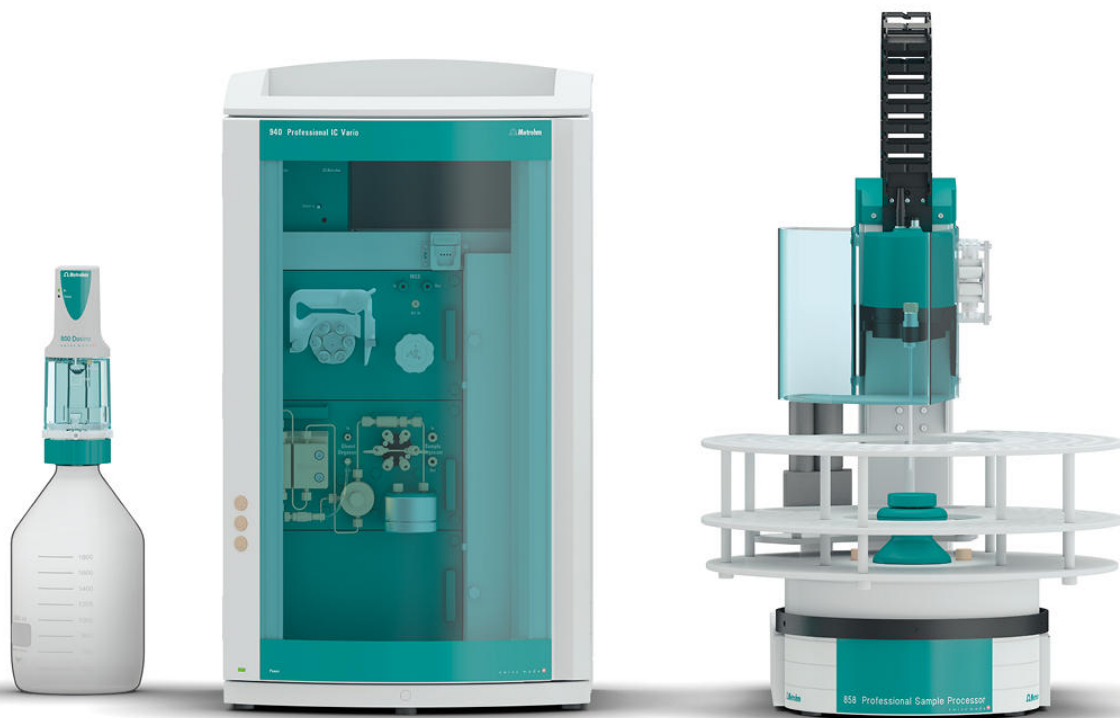




"ProfIC Vario 14 Anion" – Sistema Professional IC Vario con la técnica de inyección inteligente Pick up de Metrohm (MiPuT)

ProfIC-Vario-14-Anion

El sistema Professional IC Vario con técnica de inyección inteligente Pick up de Metrohm (MiPuT), supresión secuencial y detección de conductividad permite la determinación de aniones y cationes a partir de un volumen mínimo de muestras.

Ámbitos típicos de aplicación:

- Uso universal para todos los tipos de muestras, si solo se dispone de pequeñas cantidades de muestras
- Supervisión de procesos bioquímicos
- Extractos de muestras medioambientales

Representación esquemática

Guía de instalación

Partes/accesorios ProFI C-Vario-14-Anion

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	2.940.1500	940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP
		El 940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP es un aparato inteligente CI con supresión secuencial y una bomba peristáltica para la regeneración de supresores. El aparato se puede emplear con cualquier método de separación o de detección. Ámbitos típicos de aplicación: • Determinaciones de cationes o aniones con supresión secuencial y detección de conductividad • Análisis de trazas para aniones o cationes • Supervisión online para aniones o cationes
1 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector
		Detector de conductividad de alto rendimiento, inteligente y compacto para los aparatos CI inteligentes. La extraordinaria constancia de temperatura, el tratamiento completo de la señal dentro del bloque detector protegido y DSP (tratamiento digital de la señal controlado por microprocesador) de última generación garantizan la máxima precisión de la medida. Gracias a la zona de trabajo dinámica no es necesario el cambio de la zona (ni siquiera automático).
1 PCS	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump
		El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.



1 PCS

2.800.0010

800 Dosino

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm).



1 PCS

6.5330.170

Juego de accesorios CI: MiPuT

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para Pick-up de muestras (técnica de inyección inteligente Pick up de Metrohm).



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2041.480	Gradilla de muestras, 159 x 2 mL y 3 x 300 mL, (PVC) Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, apta para 159 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 2 mL (Eppendorf), 6.1608.080, 6.1627.000. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2842.000	MSM-HC Rotor A Rotor de supresor para todos los aparatos CI con MSM-HC (módulo supresor Metrohm de alta capacidad)	
6.2844.000	MSM-LC Rotor A Rotor supresor para usar con columnas de separación de 2 mm.	
6.2832.000	Rotor MSM A Rotor de supresor para todos los aparatos CI con MSM (Módulo Supresor Metrohm)	

6.2842.020

Cartucho adaptador, MSM

Mediante el cartucho adaptador se puede instalar tanto el MSM Rotor A como el MSM-LC Rotor A en la carcasa del rotor.



2.941.0010

941 Eluent Production Module

El 941 Eluent Production Module permite la producción automática de un eluyente. Además permite el funcionamiento continuo sin intervención manual y garantiza tiempos estables de retención. Puede combinarse con todos los aparatos CI de Metrohm y es controlado por el MagIC Net.



6.2842.200

MSM-HC Rotor C

Rotor de supresor para todos los aparatos CI con accionamiento MSM-HC (Metrohm Suppressor Module de alta capacidad) para la supresión de cationes.



Software de cromatografía profesional de Metrohm para el control de todos los sistemas inteligentes Professional IC, los aparatos Compact IC y sus periféricos, todos los detectores y los distintos Autosampler, el 800 Dosino, el 771 Compact Interface, etc. Este software permite el control, el registro, la evaluación y la monitorización de datos, así como la generación de informes de análisis de cromatografía iónica.



Interfaz de usuario gráfica para las operaciones más frecuentes, amplios programas de base de datos, desarrollo de métodos, configuración y panel de control manual de sistemas; administración de usuarios muy flexible, eficientes operaciones de base de datos, amplias funciones de exportación de datos, generador de informes que se puede configurar de forma individual, control y monitorización de todos los componentes del sistema y de los resultados de la cromatografía.

MagIC Net Professional cumple totalmente con la normativa FDA 21 CFR Part 11 y también con las Prácticas Correctas de Laboratorio (PCL).

MagIC Net está disponible en 15 idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, chino tradicional, francés, italiano, español, portugués, búlgaro, checo, húngaro, japonés, coreano, ruso, eslovaco

Con esta versión se ha modernizado la interfaz de usuario gráfica, lo que, entre otros beneficios, ha mejorado el escalamiento y la nitidez de la interfaz de usuario en monitores 4K.

1 licencia

Los archivos de instalación y los documentos se suministran en una memoria USB.



Software de cromatografía cliente-servidor de Metrohm para el control de todos los sistemas inteligentes Professional IC, los aparatos Compact IC y sus periféricos, todos los detectores y los distintos Autosampler, el 800 Dosino, el 771 Compact Interface, etc.

Este software permite el control, el registro, la evaluación y la monitorización de datos, así como la generación de informes de análisis de cromatografía iónica.

Los datos y métodos se almacenan de forma centralizada en el servidor.

Interfaz de usuario gráfica para las operaciones más frecuentes, amplios programas de base de datos, desarrollo de métodos, configuración y panel de control manual de sistemas; administración de usuarios muy flexible, eficientes operaciones de base de datos, amplias funciones de exportación de datos, generador de informes que se puede configurar de forma individual, control y monitorización de todos los componentes del sistema y de los resultados de la cromatografía.

MagIC Net Multi cumple plenamente con la normativa FDA 21 CFR Part 11 y también con las Prácticas Correctas de Laboratorio (PCL).

MagIC Net está disponible en 15 idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, chino tradicional, francés, italiano, español, portugués, búlgaro, checo, húngaro, japonés, coreano, ruso, eslovaco

Con esta versión se ha modernizado la interfaz de usuario gráfica, lo que, entre otros beneficios, ha mejorado el escalamiento y la nitidez de la interfaz de usuario en monitores 4K.

Se ha mejorado el rendimiento para los sistemas cliente-servidor con servidores fuera de la red interna de la empresa.

Versión cliente-servidor con 3 licencias
