



VoltIC pro I – El sistema unificado de CI y voltamperometría para la determinación paralela de aniones, cationes y metales pesados

VoltIC pro I

VoltIC pro I es la combinación perfecta de CI y voltamperometría para la determinación simultánea de aniones, cationes y metales pesados. MagIC Net™ toma el control de los aparatos CI e inicia la determinación voltamperométrica. Además, elabora un resumen de todos los resultados de la CI y de la voltamperometría.

Partes/accesorios VoltIC pro I

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Detector de conductividad de alto rendimiento, inteligente y compacto para los aparatos CI inteligentes. La extraordinaria constancia de temperatura, el tratamiento completo de la señal dentro del bloque detector protegido y DSP (tratamiento digital de la señal controlado por microprocesador) de última generación garantizan la máxima precisión de la medida. Gracias a la zona de trabajo dinámica no es necesario el cambio de la zona (ni siquiera automático).



El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de grabación/lectura para Unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (150 cm).



La 843 Peristaltic Pump Station tiene dos bombas peristálticas incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace.

La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.



El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.



1 PCS

6.1602.150

Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



1 PCS

6.1608.030

Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



2 PCS 6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



1 PCS 6.1803.030 Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m
Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample
Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis



1 PCS 6.1803.150 PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



1 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m
Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit,
M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con
un tubo FEP / M6.



2 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA




1 PCS

6.1822.410

Tubo capilar de conexión de PEEK

Tubo capilar de conexión para la transferencia de muestras con
cambiadores de muestras, 1 x M6, diámetro interior 0.5 mm, para el
análisis de trazas

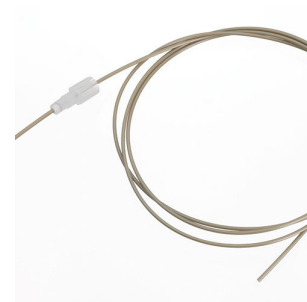


1 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltametría

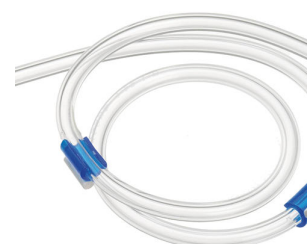

1 PCS

6.1831.070

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 70 cm



1 PCS

6.2041.450

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS

6.2055.100

Soporte de botella doble

Soporte de botella para 2 botellas de 1 L. Para equipo de aspiración 6.5617.000



1 PCS

6.2057.040

Soporte para Dosino para el procesador de muestras

Soporte para Dosino para el 838 / 858 IC Sample Processor y para el 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2134.100

Cable de conexión RS-232, 5 m, DB9 – DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 - Titrino, 756 KF Coulometer, 762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC, 743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 PCS

6.2148.010

Remote Box MSB

Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.




2 PCS

6.2148.050

Convertidor USB/RS-232 para 900 Touch Control

Amplía el 900 Touch Control con una interfaz RS-232 para la conexión de, p. ej., balanzas.

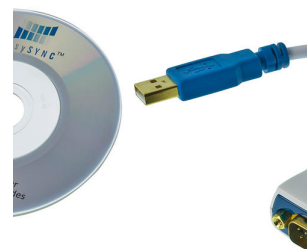

1 PCS

6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS

6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



3 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



1 PCS

6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



2 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.




1 PCS

6.5620.000

Set de conexión para la 807 Dosing Unit: puerto 4

Para la conexión de un tubo M6 al puerto 4 de una 807 Dosing Unit (paso de un conector Luer a M6), incluye elemento de fijación

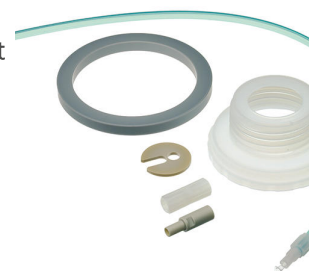

1 PCS

6.2141.290

Cable de conexión 843 Pump Station - 838 Advanced
Sample Processor

Cable para conexión a distancia entre 843 Pump Station y 838 Advanced
Sample Processor .

