




Combustion Oven (TEI)

2.0136.0600

Le Combustion Oven (TEI) est l'unité centrale destinée à la combustion pyrohydrolytique d'échantillons permettant de préparer l'analyse consécutive par chromatographie ionique.

Contenu de la livraison 2.0136.0600

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.0136.0600	Combustion Oven (TEI)

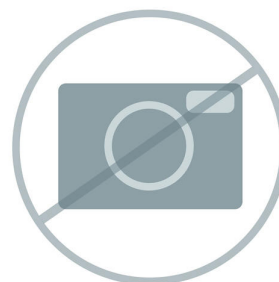

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.07311.010	Boat Introduction Module, quartz Boat Introduction Module pour le Combustion IC à utiliser avec le tube d'incinération en quartz. Ce module permet de transférer au moyen de creusets des échantillons destinés à la combustion dans le four. Il contient également une pincette et une boîte de Pétri permettant de manipuler les creusets.
6.07311.020	Boat Introduction Module, céramique Boat Introduction Module pour le Combustion IC à utiliser avec le tube d'incinération en céramique. Ce module permet de transférer au moyen de creusets des échantillons destinés à la combustion dans le four. Il contient également une pincette et une boîte de Pétri permettant de manipuler les creusets.
6.07311.030	Liquid Introduction Module, manuel (TEI) Le Liquid Introduction Module permet la combustion d'échantillons liquides par injection directe de l'échantillon au moyen d'une seringue automatisée. Ce module peut être utilisé pour des échantillons présentant un point d'ébullition 420 °C. En outre, ce module est capable d'acheminer des échantillons gazeux ou de GPL du GLS Sampler CIC dans le four.
6.07311.040	Liquid Introduction Module, automatisé (TEI) Le Liquid Introduction Module permet la combustion d'échantillons liquides par injection directe de l'échantillon au moyen du Liquid Autosampler CIC. Ce module peut être utilisé pour des échantillons présentant un point d'ébullition < 420 °C. En outre, ce module est capable d'acheminer des échantillons gazeux ou de GPL du GLS Sampler CIC dans le four.



6.07311.100 Tube d'incinération en quartz (TEI)

Tube d'incinération en quartz destiné au Combustion Oven (TEI).



6.07311.110 Tube d'incinération en céramique (TEI)

Tube d'incinération en céramique destiné au Combustion Oven (TEI).



6.07311.200 Creuset d'échantillon, quartz, pk=3

Creuset en quartz destiné à l'injection d'échantillon dans le Metrohm Combustion IC (TEI), 3 pièces.



6.07311.210 Creuset d'échantillon, quartz, pk=30

Creuset en quartz destiné à l'injection d'échantillon dans le Metrohm Combustion IC (TEI), 30 pièces.



6.07311.220 Creuset d'échantillon, céramique, pk=3

Creuset en céramique destiné à l'injection d'échantillon dans le Metrohm Combustion IC (TEI), 3 pièces.



6.07311.230 Creuset d'échantillon, céramique, pk=30

Creuset en céramique destiné à l'injection d'échantillon dans le Metrohm Combustion IC (TEI), 30 pièces.



6.07311.240 Alimentateur de creusets d'échantillon, quartz

Alimentateur de creusets d'échantillon du Boat Introduction Module 6.07311.010, en quartz.



6.07311.250 Alimentateur de creusets d'échantillon, céramique

Alimentateur de creusets d'échantillon du Boat Introduction Module 6.07311.020, en céramique.



6.07311.260 Tube de guidage du Boat Introduction Module

Tube de guidage destiné à être utilisé avec le Boat Introduction Module en quartz (6.07311.010) ou en céramique (6.07311.020).



6.07311.270 Ensemble de joints toriques (TEI), silicone

Ensemble de joints toriques (TEI) destiné au tube d'incinération et au tube de guidage du Boat Introduction Module.



6.07311.280 Ensemble de joints toriques pour tube d'incinération (TEI), silicone

Ensemble de joints toriques (TEI) destiné au tube d'incinération.



6.07311.290 Septum pour Introduction Module (TEI)

Septum destiné au port d'injection des Introduction Modules (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 et 6.07311.040.



6.07311.300 Couvercle de septum pour Liquid Introduction Module

Couvercle destiné à fixer le septum 6.07311.290 dans le Liquid Introduction Modul.




6.07311.310 Tuyau de raccordement d'oxygène et d'eau ultrapure (TEI)

Tuyau destiné à l'alimentation en oxygène et en eau ultrapure à l'entrée du tube d'incinération (TEI).



6.07311.350 Filtre de rechange pour Combustion Oven (TEI)

Filtre de rechange destiné au ventilateur du Combustion Oven (TEI).

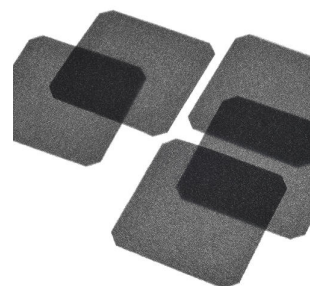

6.07313.100 Seringue 100 µL pour injection manuelle (TEI)

Seringue doseuse destinée à l'injection manuelle d'échantillons liquides au moyen d'un des trois Introduction Modules (6.07311.010, 6.07311.020 ou 6.07311.030).



6.07313.110

Aiguille de rechange pour CIC (TEI)

Aiguille de rechange (TEI) destinée à la seringue doseuse du Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) ou à l'injection manuelle d'échantillons liquides.

