



791 VA Detector

2.791.0020

Détecteur ampérométrique pour la chromatographie ionique. La détection électrochimique (ampérométrie) avec le 791 VA Detector est une méthode de détection extrêmement sensible qui est employée avec succès en HPCL et en chromatographie ionique. La méthode se caractérise par une excellente sélectivité: seules les substances oxydables ou réductibles sont reconnues, le chlorure et le sulfate ne sont pas détectés et ne perturbent donc pas la détermination électrochimique, même lorsque leurs concentrations sont très élevées. Le détecteur peut être utilisé soit en série, soit en parallèle avec les détecteurs généralement utilisés en CI ou HPCL (par exemple, détecteurs de conductivité ou UV/VIS). Diverses électrodes adaptées à chaque application ampérométrique sont disponibles.

Contenu de la livraison 2.791.0020


Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.791.0010

Détecteur CI-VA 791

D

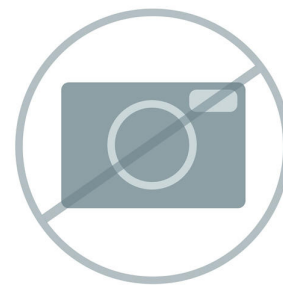

3 STK

6.2120.020

Câble pour mini-électrode / fiche F - 2 mm

1 mini-douille pour broches de connexion diamètre 2 mm et 1 mini-fiche de type F. Pour connexion des mini-électrodes du Détecteur CI-VA



4 STK

6.2704.010

Joint d'étanchéité pour cellule de détecteur VA

En PTFE. Pour 656 Electrochemical Detector et Détecteur VA



3 STK

6.2704.020

Joint d'étanchéité pour cellule de détecteur VA

Pour 656 Electrochemical Detector et Détecteur VA



Reconstruction électrique de la cellule de voltampérométrie à des fins de contrôle et de simulation. Pour Détecteurs VA



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1204.130	Pointe d'électrode en Ag Pointe d'électrode en argent (Ag), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.	
6.1204.140	Pointe d'électrode en or Pointe d'électrode en or (Au), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.	
6.2128.170	Câble de connexion 771 - Analogique Pour la connexion 771 IC Compact Interface - sortie analogique du détecteur (732, 791)	
6.2802.000	Jeu de polissage pour électrodes solides Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)	