



Power Pack Heavy Metals (Manual)

2.797.3010

Notre pack de base pour la détermination par voltampérométrie de la concentration des métaux lourds critiques dans le circuit eau-vapeur de tous les types de centrales thermiques. Ce système constitué d'un 797 VA Computrace et de deux 800 Dosino, effectue la détermination d'un échantillon individuel de manière entièrement automatique. Après la mise en place manuelle de l'échantillon, intervient l'ajout de solution auxiliaire et de solution standard pour un calibrage, sans intervention de l'utilisateur, réalisé par deux systèmes de dosage de type 800 Dosino.

Contenu de la livraison 2.797.3010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.797.0010

797 VA Computrace pour l'analyse de traces

Le 797 VA Computrace est un poste de mesure moderne pour la voltampérométrie, connecté à un PC par l'intermédiaire d'un port USB. Le logiciel PC livré avec l'appareil effectue la mesure, enregistre les données mesurées et en fait l'évaluation. Grâce à la structure claire du logiciel, le maniement de l'appareil est d'une exceptionnelle simplicité. Le potentiostat/galvanostat intégré garantit une excellente sensibilité et un bruit de fond réduit.



Système de voltampérométrie pour l'analyse de traces et la formation. Accessoires complets avec le logiciel VA Computrace et toutes les électrodes pour un système de mesure complet : électrode multi-mode pro (MME pro), électrode de référence Ag/AgCl et électrode auxiliaire en platine.

1 STK

6.6053.030

797 VA Computrace Software CD 1.3

Logiciel de commande et d'évaluation pour le 797 VA Computrace. Pour les systèmes d'exploitation Windows[®] 2000, Windows[®] XP Professional, Windows[®] Vista (32 bits) et Windows[®] 7 (32 bits).



1 STK

6.1204.200

Agitateur pour Postes VA

Agitateur pour Postes VA complet, exempt de métal



1 STK

6.1226.030

Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.



1 STK

6.1226.050

Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)




1 STK

6.1244.020

Courroie de transmission

Pour les électrodes à disque tournant et agitateurs dans les Postes VA (3 pièces)

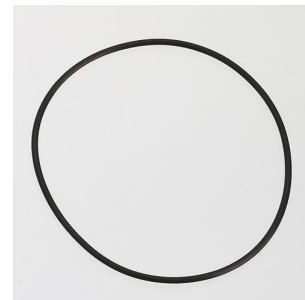

1 STK

6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



1 STK

6.1247.020

Aiguilles pour MME

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



1 STK

6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL



7 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



2 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.090

Flacon / 250 mL / GL 45



2 STK

6.1618.060

Adaptateur de filetage GL 45 auf GL 45

Adaptateur de filetage (GL 45 à GL 45); entre autres pour les flacons à réactifs avec bride surélevée



1 STK

6.1801.080

Tuyau pour connexion azote

Pour une alimentation en gaz des appareils de voltampérométrie



1 STK

6.1805.020

Tuyau en FEP / M6 / 52 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.120

Tuyau en FEP / M6 / 100 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



4 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



1 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



1 STK

6.1824.000

Pointe de distribution micro quadruple

Avec 4 filetages M6. Pour postes de mesure VA.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2055.100

Support de flacon double

Support pour 2 flacons à 1 L. Pour l'équipement d'aspiration 6.5617.000



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2161.010

Bloc d'alimentation, fiche EU 230V /6V DC

Bloc d'alimentation pour 827 pH lab



1 STK

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.2406.000

Preneur de gouttes de mercure

Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2703.000

Valet pour vase titrage



1 STK

6.2709.080

Bouchon pour ouverture de pipettage

Pour 694, 747 VA Stands et VA Computrace



1 STK

6.2711.030

Cuve de rétention pour le remplissage des MME

Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et
647, 663, 694, 747 VA Stand





Pour serrer les raccords à vis



Pour différentes applications de CI et VA.



Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Électrode au mercure pour la voltampérométrie. Peut être utilisée comme DME, SMDE ou HMDE.

