



831 KF Coulometer avec électrode génératrice à diaphragme

2.831.0010

Coulomètre économique avec cellule de titrage et électrode génératrice à diaphragme pour la détermination de l'eau jusqu'au niveau de traces.

Ce coulomètre est devenu incontournable dans de nombreux laboratoires grâce à sa fiabilité, son affichage graphique rétro-éclairé, les dialogues multilingues et la simplicité de son maniement. L'affichage clair donne des informations sur les paramètres de titrage importants et transmet sans équivoque le déroulement du titrage sous forme de courbe μg d'eau en fonction du temps.

Gamme de mesure recommandée : 10 μg à 200 mg d'eau absolue

Contenu de la livraison 2.831.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------



Pour montage sur une potence de diamètre 10 mm; sans embase (resp. support) et sans potence; sans bloc d'alimentation, avec câble attachant.



Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.



Électrode génératrice avec diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22.

Cette électrode génératrice convient idéalement à :

- Échantillons à teneur en eau absolue très faible, < 50 ppm
- Détermination coulométrique de la teneur en eau dans les échantillons huileux
- Applications utilisant des réactifs de cétone
- Applications utilisant des réactifs mauvais conducteurs (ajout de chloroforme, xylène > 10 %)



1 STK

6.1403.030

Tube d'adsorption KF pour cellule de coulomètre

Pour les coulomètres KF.



1 STK

6.1437.000

Bouchon à RN 14



1 STK

6.1446.060

Bouchon / B-14/15 / M10



2 STK

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.



1 STK

6.1464.320

Vase de titrage KF 80-250 mL / coulométrie



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2001.050

Support de potence, sans potence

Pour 756, 831 KF Coulometer et 728 Stirrer (agitateur magnétique)



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.





Support pour récipient de titrage pour cellules de titrage coulométrique
Pour 756, 831 KF Coulometer



Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux
appareils Metrohm avec douille type F.



Avec fiche H. Pour la connexion d'électrode génératrice - Coulomètre KF.
Longueur: 1 m



1 STK

6.2130.090

Clavier pour 831

Clavier pour 831 KF Coulometer



1 STK

6.2701.040

Fermeture à vis GL 18 avec orifice

En PBT. Avec orifice pour septum 6.1448.020. Pour la cellule sans diaphragme 6.5405.000 et les récipients de titrage 6.1464.32X et 6.1465.320.



3 STK

6.2713.000

Joint PTFE RN14

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 14.



1 STK

6.2713.010

Joint PTFE RN29

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 29.



1 STK

6.2713.020

Joint PTFE RN19

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 19.



1 STK

6.2730.030

Bouchon

Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.



1 STK

6.2738.000

Entonnoir

Pour coulomètre KF.



1 STK

6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



2 STK

6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



2 STK

6.2816.090

Seringue 5 mL

Seringue 5 mL en PP, avec connecteur Luer.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.860.0010	860 KF Thermoprep Le 860 KF Thermoprep sert à la préparation thermique des échantillons dans le domaine des titrages Karl Fischer. De nombreuses substances ne sont pas appropriées à l'analyse directe par titrage Karl Fischer car elles sont insolubles, réagissent avec le réactif KF ou ne libèrent leur teneur en eau que lentement ou seulement à température élevée. À l'aide de petits récipients échantillons hermétiquement fermés (vials), les échantillons sont transférés dans le four, où la teneur en eau est ensuite déterminée, à l'aide d'un titreur KF volumétrique ou coulométrique.



6.1464.323	Récipient de titrage KF / 80 - 250 mL / coulométrique / verre brun
------------	--



6.1465.320	Vase de titrage avec 2 ouvertures latérales / 80 - 250 mL / coulométrie Pour 756 et 831 KF Coulometers
------------	---




6.5406.000 Équipement coulométrique KF comprenant une électrode génératrice avec diaphragme

Set d'accessoires complet pour coulomètres KF.



6.5406.010 Équipement KF coulométrique avec électrode génératrice sans diaphragme

Ensemble d'accessoires complet pour coulomètre KF.

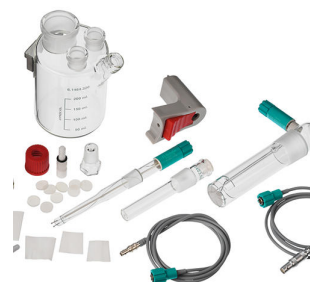

6.1439.010 Tube d'addition et d'aspiration KF

Tube d'addition et d'aspiration KF pour cellule de coulomètre avec raccord M8 6.1811.010.

