



838 Advanced VA Sample Processor

2.838.0310

Le 838 Advanced VA Sample Processor est un passeur d'échantillons permettant, en combinaison avec la voltampérométrie cyclique inverse (Cyclic Voltammetric Stripping - CVS) avec le 797 VA Computrace, une détermination totalement automatique des additifs organiques dans des bains galvaniques. Des séries d'analyses de brillanters (brighteners) ou de supprimeurs (suppressors) peuvent être effectuées successivement sans surveillance particulière. Le rack d'échantillons livré avec l'appareil peut contenir jusqu'à 56 échantillons de 11 mL ou de 50 mL maximum.

Le 838 Advanced VA Sample Processor dispose d'un éditeur de méthodes flexible permettant d'adapter les séquences d'analyse aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Le clavier séparé donne accès à l'éditeur de méthodes et à tous les autres paramétrages d'appareil. Pendant la détermination d'une série d'échantillons, le 838 Advanced VA Sample Processor est commandé à distance par le 797 VA Computrace.

L'appareil est fourni avec accessoires, rack d'échantillons, clavier et accessoires spécifiques permettant d'installer un poste de travail complet, mais sans équipement de rinçage.

Contenu de la livraison 2.838.0310

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.838.0010	838 Advanced IC Sample Processor
		Processeur d'échantillons CI Advanced dans sa version de base.
		
1 STK	6.1618.020	Adaptateur de filetage S40 à GL 45
		Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.
		
1 STK	6.1805.020	Tuyau en FEP / M6 / 52 cm
		Avec protection contre la lumière et le flambage
		
1 STK	6.1805.060	Tuyau en FEP / M6 / 60 cm
		Avec protection contre la lumière et le flambage
		

1 STK 6.1805.120 Tuyau en FEP / M6 / 100 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1808.000 Manchon couplage M6



2 STK 6.1808.020 Raccord olive avec filetage interne M6
1 filetage intérieur M6 et 1 olive pour tuyaux. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour les appareils de mesure de stabilité.



1 STK 6.1819.010 Tuyau en PTFE
Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA




1 STK

6.1822.420

Capillaire de connexion en PEEK

Capillaire de connexion pour le transfert d'échantillons avec passeurs d'échantillons, 1 x M6, diamètre interne 0.75 mm pour la détermination d'additifs organiques avec CVS

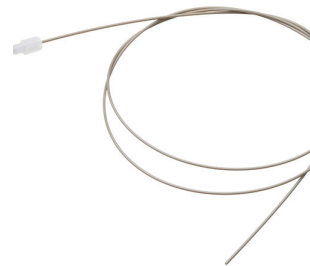


2 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie

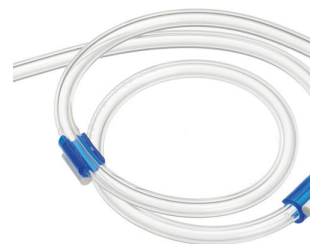

2 STK

6.1826.150

Tuyau pour pompe péristaltique (violet/jaune)

Pour Advanced VA Sample Processor 838 et tous les appareils IC avec pompe péristaltique.



1 STK

6.1831.070

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 70 cm

For Advanced VA Sample Processor




1 STK

6.1831.080

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 110 cm

For Advanced VA Sample Processor

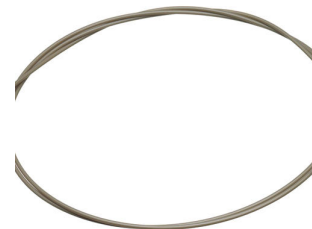

1 STK

6.1835.050

Aiguille d'aspiration d'échantillons en PEEK

Pour passeur d'échantillons pour le transfert de grands volumes d'échantillons, par exemple dans le cas de la détermination de brillanters.




1 STK

6.2041.450

Rack d'échantillons, 56 x 11 mL et 56 x 50 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 112 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, flacons Sarstedt 50 mL.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

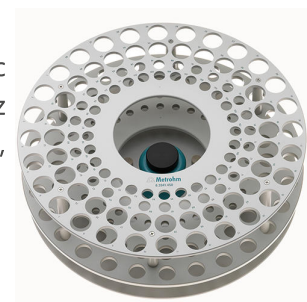

1 STK

6.2057.040

Support pour Dosino pour Sample Processor

Support pour Dosino pour 838 / 858 IC Sample Processor et pour 838 Advanced VA Sample Processor



1 STK

6.2141.290

Câble de connexion 843 Pump Station - 838
Advanced Sample Processor

Câble pour la connexion «remote» entre la 843 Pump Station et le 838
Advanced Sample Processor.



1 STK

6.2142.050

Clavier pour 838 Advanced Sample Processor

Clavier pour 838 Advanced IC/VA Sample Processor



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2739.000 Clé
Pour serrer les raccords à vis



1 STK 6.2743.057 Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



1 STK 6.2744.010 Vis de pression 5x
Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.

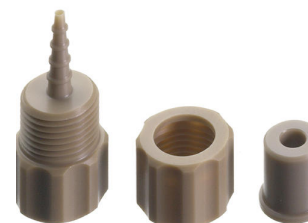

4 STK

6.2747.010

Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.




1 STK

6.2751.110

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour Advanced IC/VA Sample Processors.

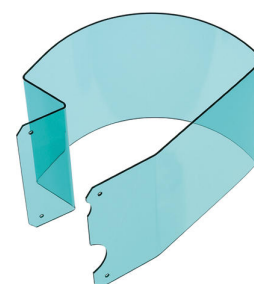

1 STK

6.2833.020

Support d'aiguille 1/8 in. avec connexion tubulaire
M6

Pour les passeurs d'échantillons. Pour la connexion de tuyaux FEP avec
raccord M6



1 STK

6.2846.000

Aiguille d'aspiration d'échantillons en oxyde de
zirconium

Aiguille d'aspiration d'échantillons pour Sample Processors et passeur
d'échantillons en voltampérométrie.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA	
	La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b�cher de mesure dans des syst�mes VA et CVS semi-automatis�s ou enti�rement automatis�s � l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltamp�rom�trie dispose de tous les accessoires n�cessaires au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station pour les syst�mes Compact VA	
	La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes p�ristaltiques int�gr�es qui peuvent �tre command�es directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure dans des syst�mes VA et CVS semi-automatis�s ou enti�rement automatis�s � l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltamp�rom�trie dispose de tous les accessoires n�cessaires au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure.	
6.2743.050	R�cipient d'�chantillon 11 mL	
	2 000 pi�ces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'�chantillons VA. Les r�cipients d'�chantillon CI sont fabriqu�s en plastique polypropyl�ne (PP) pour les applications m�dicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions st�riles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les r�cipients d'�chantillon sont contr�l�s al�atoirement pour les anions et les cations lixiviables.	