



Oil Titrino plus

2.848.3010

L'Oil Titrino plus vous propose un ensemble complet permettant la détermination des indices de base et d'acide des produits à base d'huile. Vous obtenez, en plus des méthodes de détermination décrites en détail, tous les accessoires nécessaires à vos titrages. Dans l'ensemble sont compris un titreur, un agitateur à hélice et une Solvotrode easyClean, une électrode de verre de mesure du pH spécialisée dans les titrages en milieu non-aqueux.

Contenu de la livraison 2.848.3010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.848.0010	848 Titrino plus

Titreur compact pour

- titrages dynamiques (DET) automatiques à point d'équivalence
- titrages monotones (MET) automatiques à point d'équivalence
- titrages à point final (SET)



1 STK

1.802.0010

802 Stirrer (agitateur à hélice) pour 727 Ti Stand

Agitateur à hélice, y compris régulateur de vitesse de rotation séparé 6.2137.000 et hélice d'agitation 6.1909.010.



1 STK

1.804.0010

804 Ti Stand, sans support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Sans support.



1 STK

6.0229.010

Solvotrode easyClean (câble fixe 1,2 m)

Électrode pH combinée avec diaphragme flexible easyClean et câble fixe (1,2 m) pour tous les titrages acide-base en milieu non aqueux.

La membrane de verre est optimisée pour les solutions peu conductrices et, grâce au diaphragme easyClean facile à nettoyer, cette électrode est également adaptée à des échantillons fortement contaminés (par ex. de l'huile usagée).

Cette électrode peut être utilisée avec des électrolytes de référence non aqueux (tels que le chlorure de lithium ou le bromure de tétraéthylammonium). Conservation dans l'électrolyte de référence correspondant.

La Solvotrode easyClean est également disponible avec une longueur de câble fixe de 2,0 m sous la référence article 6.0229.020.



1 STK

6.1909.010

Tige d'agitation / 87 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 96 mm. Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802




1 STK

6.2001.060

Console statif sans potence

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrand, Titrino plus,
Dosimat plus ou 856/867

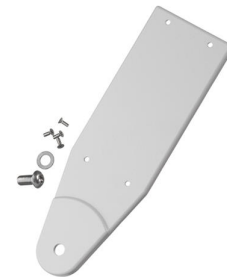

1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2147.000

Clavier numérique USB

Clavier numérique USB pour le Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler et 899 Coulometer. Avec deux ports USB inclus.



1 STK

6.2151.100

Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L dans éthylène glycol (250 mL)

Électrolyte TEABr (bromure de tétraéthylammonium dans éthylène glycol), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2723.310 Capuchon protecteur pour Titrino Plus

Capuchon protecteur pour écran et clavier pour tous les appareils de la gamme Titrino plus.

Compatible avec : 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



1 STK 6.2739.010 Clé
Pour Unités interchangeables.



1 STK 6.3026.220 Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



1 STK

6.6061.010

Méthodes Titrino plus, clé USB

Contient les méthodes de FOOD PAC, WINE PAC et OIL PAC à importer directement dans le Titrino plus.




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.0229.100	Solvotrode Électrode pH combinée pour tous les titrages acide-base en milieu non aqueux. La membrane de verre est optimisée pour les solutions peu conductrices et, grâce au diaphragme rodé flexible, cette électrode est également adaptée à des échantillons contaminés. Cette électrode peut être utilisée avec des électrolytes de référence non aqueux (chlorure de lithium ou bromure de tétraéthylammonium). Conservation dans l'électrolyte de référence correspondant.	
6.2104.020	Câble d'électrode / 1 m / F Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.	
6.2141.230	Câble «remote» Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station Câble pour la connexion «remote entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler et Titrino plus et/ou Pump Station.	
6.2141.240	Câble «remote» Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus Câble pour la connexion «remote entre Dosimat plus et Compact Sample Changer et/ou Titrino plus lors de l'utilisation du câble 6.2141.260.	

6.2141.250

Câble «remote» Compact Sample Changer - Titrino

Câble pour la connexion «remote» entre Compact Sample Changer et Titrinos avec connexion «remote» à 25 pôles.

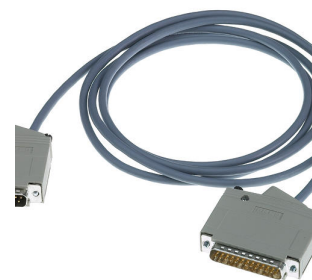

6.2141.260

Câble «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus et Titrino plus

Câble de distribution pour la connexion «remote» du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).



6.2151.120

Câble USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Pour la connexion d'appareils USB



6.3026.110

Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.150

Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.210

Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.250

Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
