



Titreur conductimétrique + solvant

2.856.2210

Ensemble complet pour le titrage conductimétrique, comme pour la détermination de l'indice d'alcalinité dans les produits pétroliers selon la norme IP400.

Avec une seconde burette supplémentaire pour l'ajout automatique du solvant.

Avec un 856 Conductivity Module, un 801 Agitateur magnétique, 2 x 800 Dosino, 2 x 807 Dosing Unit (20 et 50 mL), une cellule de mesure de conductivité et le logiciel tiamo™ light.

Contenu de la livraison 2.856.2210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.801.0010	801 Stirrer

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrande, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attendant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



Module de mesure de la conductivité comme extension d'un système Titrande en place ou, en appareil autonome, en association avec un 900 Touch Control. Le 856 Conductivity Module permet de mesurer la conductivité et la température ainsi que de déterminer les TDS et la salinité. Il est compatible avec les cellules de mesure de conductivité à 5 pôles, des cellules de mesure de toute dernière technologie.

La valeur pH et la conductivité peuvent être mesurées sans interférence dans un même bécher grâce à l'entrée de mesure à séparation galvanique.

Le Conductivity Module dispose de 2 interfaces USB pour la connexion d'imprimantes, de lecteurs de code barre ou de passeurs d'échantillons, ainsi que de 4 interfaces MSB pour agitateurs ou Dosino.

Que ce soit en association avec le 900 Touch Control comme appareil de mesure autonome ou comme élément intégré au *tiamo*™ full (à partir de la version 2.0), il satisfait aux exigences des BPL et de la FDA 21 CFR partie 11.



Cellule de mesure de conductivité à 5 pôles avec constante de cellule c = 0,7 cm⁻¹ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (1,2 m) pour connexion au 856 Conductivity Module.

Ce capteur est adapté aux mesures de moyenne conductivité (de 5 µS /cm à 20 mS/cm) comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées



Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.





Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrand, Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller





2 mm.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



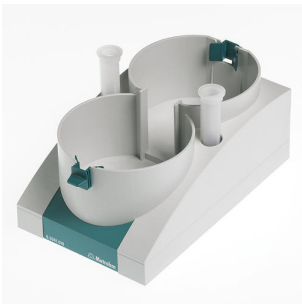
807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 1,5 m).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2061.010	Support de bouteille pour Dosinos Support de bouteille pour jusqu'à 2 Dosinos, monté sur les bouteilles à réactifs de 1 L.	
6.2065.000	Cadre d'empilage pour 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module Support du «Reagent Organizer sur la Dosing Interface	