



858 Professional Sample Processor CVS avec Dosino pour transfert d'échantillon

2.858.0120

Le 858 Professional Sample Processor pour CVS avec Dosino pour transfert d'échantillon permet le traitement entièrement automatisé de grandes séries d'échantillons d'additifs organiques dans des bains galvaniques, comme les agents de brillantage (« brighteners ») et les agents de lissage (« suppressors ») à l'aide de la « Cyclic Voltammetric Stripping » (CVS) en association avec des appareils Professional VA/CVS et viva. Le système est contrôlé directement par le logiciel viva et autorise le changement automatique parmi les différentes méthodes de détermination. Le rack d'échantillons livré avec l'appareil peut contenir 56 échantillons de 11 mL maximum pour la détermination de supprimeurs et 28 échantillons de 50 mL maximum pour la détermination des agents de brillantage. Un Dosino est utilisé pour le transfert d'échantillon dans le récipient de mesure. La quantité d'échantillon nécessaire peut ainsi être réduite et mesurée automatiquement.

Le 858 Professional Sample Processor CVS avec Dosino pour transfert d'échantillon est fourni avec un bras pivotant intégré, y compris accessoires, Dosino, rack d'échantillons et câble de connexion, permettant d'installer un poste de travail complet, mais sans équipement de rinçage.

Contenu de la livraison 2.858.0120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.858.0010

858 Professional Sample Processor

Le 858 Professional Sample Processor traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique au 850 Professional IC System soit par un 800 Dosino.



1 STK

1.800.0040

800 Dosino (câble de 0,65 m de longueur)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).




1 STK

6.1618.020

Adaptateur de filetage S40 à GL 45

Adaptateur pour bouteilles avec filetage S40 (Merck...) à GL45.

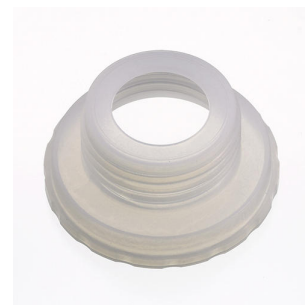

1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



1 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.280

Adaptateur 807 Dosing Unit port 4, M6 intérieur

Adaptateur pour l'utilisation du port 4 de la 807 Dosing Unit pour la connexion avec un tuyau FEP/M6.



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.1819.010

Tuyau en PTFE

Dans le couvercle du vase de mesure des Postes VA



1 STK

6.1831.020

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 22 cm

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.1835.050

Aiguille d'aspiration d'échantillons en PEEK

Pour passeur d'échantillons pour le transfert de grands volumes d'échantillons, par exemple dans le cas de la détermination de brillanceurs.




1 STK

6.2041.450

Rack d'échantillons, 56 x 11 mL et 56 x 50 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 112 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, flacons Sarstedt 50 mL.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

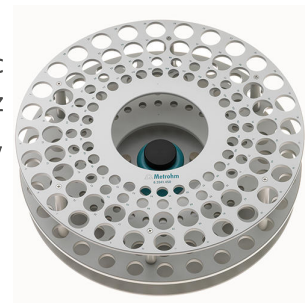

1 STK

6.2057.040

Support pour Dosino pour Sample Processor

Support pour Dosino pour 838 / 858 IC Sample Processor et pour 838 Advanced VA Sample Processor



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.080

Pince coupante pour capillaires

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1 /16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2743.057

Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



4 STK


6.2747.010

Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.



Protection de sécurité pour Advanced IC/VA Sample Processors.

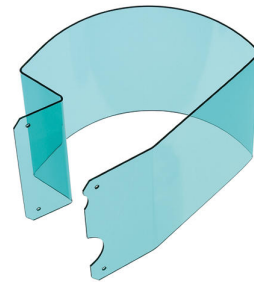

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

