



874 Oven Sample Processor - Flacons spéciaux

2.874.0130

Le 874 Oven Sample Processor sert à la préparation thermique automatisée des échantillons pour le titrage Karl Fischer. La méthode d'extraction avec four est surtout adaptée aux échantillons qui ne libèrent leur eau qu'à des températures très élevées, aux échantillons difficilement solubles ou à ceux qui réagissent avec le réactif KF.

Cet appareil peut être adapté aux récipients d'échantillons spécifiques au client. Merci de contacter un représentant Metrohm local pour de plus amples informations.

Contenu de la livraison 2.874.0130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.874.0010	874 Oven Sample Processor

Le 874 Oven Sample Processor sert pour la préparation thermique automatisée des échantillons pour le titrage Karl Fischer. La méthode d'extraction avec four est surtout adaptée aux échantillons qui libèrent leur eau seulement à des températures très élevées, des échantillons difficilement solubles ou qui réagissent avec le réactif KF.



1 STK

6.1446.170

Bouchon pour tuyau de chauffage

Pour récipients KF coulométriques, en combinaison avec les connexions tubulaires chauffées 6.1830.000, 6.1830.010, 6.1830.020



2 STK

6.1602.145

Adaptateur de siphon pour flacon sécheur

Fermeture à vis avec filetage GL 45 pour flacon sécheur 6.1608.050.



2 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



2 STK

6.1805.010

Tuyau en FEP / M6 / 13 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.1805.050

Tuyau en FEP / M6 / 18 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.470

Tuyau en FEP / M6 / 44 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.040

Adaptateur de filetage M6 extérieur / M8 intérieur

Filetage M6 extérieur, M8 intérieur.



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



2 STK

6.1821.040

Tube de filtration

Tube de filtration pour flacon sécheur 6.1608.050. Pour Rancimat et fours Karl Fischer.



1 STK

6.1830.030

Tuyau de chauffage

Tuyau de chauffage avec filetage M6 pour les 860 KF Thermoprep, 885 Compact Oven Sample Processor et 874 USB Oven Sample Processor.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2053.000

Agrafe pour câble

Agrafe pour câble pour fixer les câbles



1 STK

6.2063.020

Pièce d'insertion d'échantillon

Pièce d'insertion d'échantillon pour flacons d'échantillon en verre de 6 mL (6.2419.000) pour 874



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2627.010

Pièce d'insertion pour four

Utilisable avec le 874 USB Oven Sample Processor



1 STK

6.2724.010

Filtre anti-poussière

Filtre anti-poussière pour Rancimats et fours Karl Fischer.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2751.140

Protection de sécurité

Protection de sécurité en PMAM pour le 874 Oven Sample Processor.



1 STK

6.2816.070

Aiguille d'injection

Utilisée avec les fours Karl Fischer.



1 STK

6.2816.080

Aiguille d'échappement

Pour Thermoprep KF.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.851.0010	851 Titrande avec électrode génératrice à diaphragme Coulomètre avec électrode génératrice à diaphragme et 801 Stirrer. La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire. Le 851 Titrande rend les titrages coulométriques simples et rapides. Gamme de mesure recommandée : 10 µg à 200 mg d'eau absolue Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant
2.851.0110	851 Titrande avec électrode génératrice sans diaphragme Coulomètre avec électrode génératrice sans diaphragme. La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire. Le 851 Titrande rend les titrages coulométriques simples et rapides. Gamme de mesure recommandée : 10 µg à 200 mg d'eau absolue. Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.



Coulomètre avec électrode génératrice à diaphragme, 801 Stirrer et cellule de titrage volumétrique complète.

La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire.



Gamme de mesure recommandée en coulométrie : 10 µg à 200 mg d'eau absolue

Le 852 Titrando maîtrise le titrage volumétrique Karl Fischer en plus du titrage coulométrique.

Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.

Coulomètre avec électrode génératrice sans diaphragme et cellule de titrage volumétrique complète

La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire.



Gamme de mesure recommandée en coulométrie : 10 µg à 200 mg d'eau absolue.

Le 852 Titrando maîtrise le titrage volumétrique Karl Fischer en plus du titrage coulométrique.

Utilisation avec le logiciel OMNIS, *tiamo* ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.

2.800.0010

800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).



2.801.0010

801 Stirrer

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attenant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



6.2041.730

Rack d'échantillons, 25 x 2-30 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 874 Oven Sample Processor pour 25 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon d'un diamètre de 16 à 32,4 mm.

Matériau : Aluminium (Al)



6.2041.720

Rack d'échantillons, 36 x 6 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 874 Oven Sample Processor pour 36 récipients d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.




807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Équipement de mesure pour contrôler la température de 774 Oven Sample Processor, 832, 860 Thermoprep.

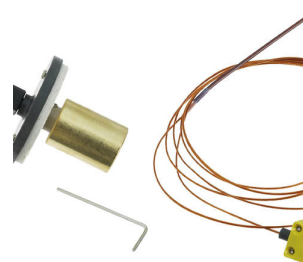

Support d'aiguille (58 mm) avec Luer-lock pour les fours Karl Fischer 860, 874 et 885.



Support d'aiguille (73 mm) avec Luer-lock pour les fours Karl Fischer 860, 874 et 885.



6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010

Tamis moléculaire (US)

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

