


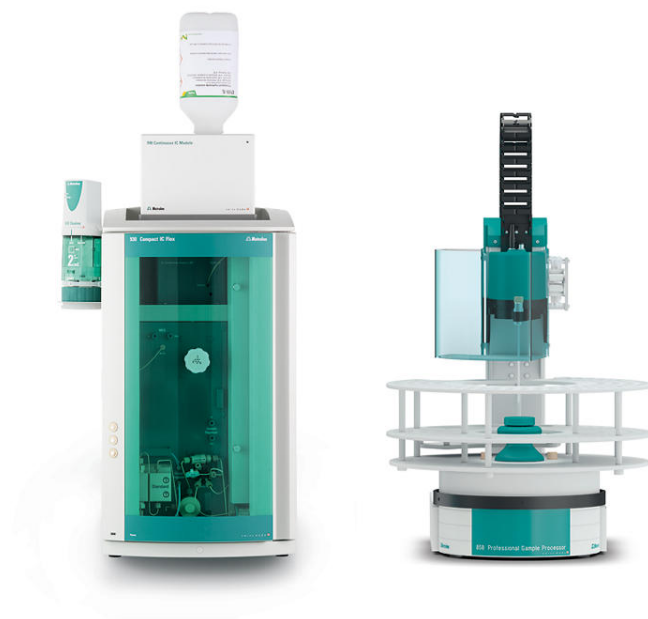

Continuous IC Package DR

2.930.8030

Le Continuous IC Package DR permet d'analyser des anions avec des éluants d'hydroxyde. Il comprend tous les composants nécessaires, tels que le 930 Compact IC Flex Oven/SeS/Deg, l'IC Conductivity Detector MB, le 948 Continuous IC Module, le 858 Professional Sample Processor : pompe, la régénération Dosino (DR) et le logiciel MagIC Net.

Contenu de la livraison 2.930.8030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.800.0030	800 Dosino (câble de 1,5 m de longueur)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 1,5 m).



1 STK

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.



1 STK

6.02850.000

Dégazeur haute pression

Le dégazeur haute pression élimine l'hydrogène gazeux produit par la production d'éluant.



1 STK

6.02850.100

Trap anion continu

Le Trap continu des anions (CT-A) élimine les impuretés anioniques et le carbonate, de l'éluant.



1 STK

6.02850.200

Cartouche Eluent Producer A

La cartouche Eluent Producer A (EPC A) produit l'éluant hydroxyde de haute pureté à partir du concentré d'hydroxyde 4 mol/L, basé sur l'électrolyse de l'eau. La membrane échangeuse de cations permet la migration sélective des cations dans l'éluant. L'EPC A est alimenté par de l'eau ultrapure qui peut être utilisée de manière entièrement automatique en combinaison avec une installation de traitement de l'eau.




1 STK

6.05000.300

Kit d'accessoires : CEP

Kit d'accessoires pour l'installation du 948 Continuous IC Module, CEP

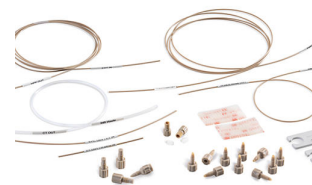

1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



3 STK

6.1608.080

Flacon / 300 mL

Récipient de rinçage pour les Processeurs d'échantillons CI.



1 STK

6.1803.030

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m

Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



2 STK

6.1826.360

Tuyau pour pompe péristaltique LFL (blanc/blanc), 3 fixations

Pour Passeurs d'échantillons



1 STK

6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 STK

6.1831.160

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm



1 STK

6.2041.760

Rack d'échantillons 54 x 11ml + 1 x 300ml

Rack d'échantillons de petit diamètre pour 54 récipients d'échantillons de 11 ml en deux rangs plus 1 flacon de 300 ml.



1 STK

6.2064.000

Dispositif de retenue pour béciers pour l'Advanced
Sample Processor

Lame pour enlever les couvercles des tubes sur l'Advanced Sample
Processor. Pour tubes d'échantillons de 2,5 et 11 mL



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer
et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 STK

6.2621.300

Jeu d'outils pour l'Advanced IC Sample Processor

Jeu d'outils contenant une clé à fourche et une clé hexagonale.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.

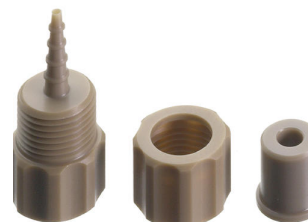


1 STK

6.2751.110

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour Advanced IC/VA Sample Processors.

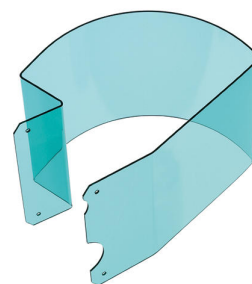

1 STK

6.2842.100

MSM-HC Rotor A, hydroxyde

Rotor de suppresseur à haute capacité pour les éluants d'hydroxyde pour tous les appareils CI avec MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité).



1 STK

6.2846.010

Aiguille d'échantillonnage en oxyde de zirconium
avec pointe en PEEK

Aiguille d'échantillonnage pour Sample Processor et passeur d'échantillons en chromatographie ionique. La pointe en PEEK garantit un perçage sûr du couvercle du flacon.



1 STK

6.5000.000

Kit d'accessoires : Vario/Flex Base

Kit d'accessoires de base pour un Professional IC Vario ou un Compact IC Flex.



1 STK

6.5000.010

Kit d'accessoires : Vario/Flex ONE

Kit d'accessoires pour module ONE (pompe CI avec injecteur) pour les appareils Professional IC Vario et Compact IC Flex.



1 STK

6.5000.020

Kit d'accessoires : Vario/Flex SeS

Kit d'accessoires pour suppression séquentielle (SeS) pour les appareils Professional IC Vario et Compact IC Flex. Sans rotor pour supprimeur.




1 STK

6.5330.190

Équipement CI : Dosino, régénération

Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour la régénération automatique du Metrohm Suppressor Module (MSM).

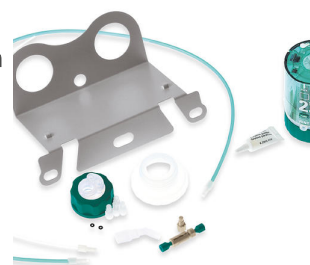

Logiciel professionnel de chromatographie de Metrohm pour le contrôle d'un appareil Compact CI intelligent, d'un détecteur et d'un Autosampler ou d'un 771 Compact Interface. Le logiciel assure le contrôle, permet d'enregistrer, d'évaluer et de contrôler les données, ainsi que de générer les rapports d'analyses par chromatographie ionique.



Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, logiciels complets de base de données, développement de méthodes, configuration et commande de système manuelle ; administration des utilisateurs très flexible, opérations de bases de données performantes, fonctions d'exportation de données complètes, générateur de rapports configurable individuellement, commande et contrôle des différents composants du système et des résultats de chromatographie ionique.

MagIC Net Compact satisfait totalement à la directive FDA 21 CFR Part 11 ainsi qu'aux BPL.

MagIC Net est disponible dans 15 langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, chinois traditionnel, français, italien, espagnol, portugais, bulgare, tchèque, hongrois, japonais, coréen, russe, slovaque

Dans cette version, l'interface utilisateur graphique a été modernisée, ce qui améliore entre autres la mise à l'échelle et la netteté de l'interface utilisateur sur les écrans 4K.

1 licence.

L'installation et les documents sont fournis sur une clé USB.